

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Photometer-System



MD50 • MD150

(EN) Instruction manual.....	3	(DE) Gebrauchsanleitung.....	27
(ES) Manual de instrucciones.....	53	(FR) Mode d'emploi.....	78
(PT) Manual de instruções.....	104	(IT) Manuale d'istruzione.....	130
(NL) Gebruiksaanwijzing.....	154	(TR) Kullanım Talimatları.....	179
(RU) Инструкции по эксплуатации.....	203	(ZH) 使用说明.....	230

Table of Contents

Photometer Series

1 Introduction	5
1.1 General Information	5
1.1.1 Read instructions before use	5
1.1.2 Purpose of the Product	5
1.1.3 Authorized use	5
1.1.4 Requirements for safe use	5
1.1.5 Keep instructions	6
1.1.6 User qualification	6
1.1.7 Handling of hazardous chemicals	6
1.1.8 Disposal notes	6
1.2 List of all used signs in the document	6
2 Product overview	8
2.1 Guide to symbols	8
2.3 Features	8
2.4 Product description	8
2.4.1 Instrument view	9
2.4.2 Description of the keys and switches	9
2.4.3 Interface description	10
3 Commissioning	11
3.1 Operating environment	11
3.2 Contents of delivery	11
3.3 Inserting and replacing the batteries	12
4 Operation	13
4.1 First start up	13
4.2 General operation principles	13
4.3 Control elements	14
4.3.1 List of control elements and their function	14
4.5 Data transfer	19
4.5.1 Data transfer via USB	19
4.5.2 Data transfer via NFC	19
5 Maintenance	21
5.1 Recommended maintenance schedule	21
6 Troubleshooting	22
6.1 Error messages and what to do	22
7 Accessories & Replacement parts	23
7.1 List of Accessories	23
8 Specifications	24

9 Appendix

26

9.1 Copyright and Trademark Notice

26

EN

1 Introduction

1.1 General Information

1.1.1 Read instructions before use

This manual provides important information on the safe operation of the product. Please read this manual carefully and familiarize yourself with the product before use.

1.1.2 Purpose of the Product

Lovibond photometers are designed to measure different parameters in aqueous samples in a variety of applications such as e.g. drinking water, waste water, industrial processing water, pool water and science & research.

Lovibond photometers are suitable to be used in laboratory settings as benchtop as well as in the field as portable instrument. For portability instruments are delivered in robust carrying cases with required accessories.

Performance of the instruments can be impacted by exposure to extreme light and temperature that is why the instruments should always be used under recommended environmental conditions.

1.1.3 Authorized use

The manufacturer's liability and warranty for damage is voided with improper use, failure to follow this manual, use by unqualified personnel, or unauthorized changes to the product.

The manufacturer is not liable for costs or damages that arise from the user or third parties due to the use of this product, especially in cases of improper use of the product or misuse or faults in the connection of the product.

The manufacturer assumes no liability for print errors.

1.1.4 Requirements for safe use

Note the following points for safe use:

- If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.
- The product may only be used according to the authorized use specified above.
- The product may only be supplied with power by the energy sources mentioned in this operating manual.
- The product may only be used under the environmental conditions mentioned in this operating manual.
- The product must not be opened or modified.

The product must not be used if:

- it is visibly damaged (e.g. after being transported)
- it was stored under adverse conditions for a lengthy period of time (storage conditions, see chapter "Specifications")

1.1.5 Keep instructions

The manual must be kept in the vicinity of the product so you can always find the information you need.

1.1.6 User qualification

The operating personnel must be able to understand and correctly implement the safety labels and safety instructions on the packages and inserts of the products.

The user must be capable and able to read and understand this manual in order to familiarize themselves with the handling and to ensure safe use.

1.1.7 Handling of hazardous chemicals

Chemical and/or biological hazards may exist where this product is used. Abide by all governing laws, regulations and protocols when using this product.

For the development of products, Lovibond® pays close attention to safety. Some hazards from dangerous substances cannot be avoided. If self-produced tests or solutions are used, the responsibility concerning any risks caused by those tests or solutions lies with the user (personal responsibility).

1.1.8 Disposal notes

Dispose of the batteries and electrical devices at a suitable facility according to local legal requirements.

It is illegal to dispose of the batteries with household waste.

Within the European Union, the batteries are removed at a specialized treatment center at the instrument's end of life.



Instruments marked with this symbol must not be disposed of in normal domestic waste.

1.2 List of all used signs in the document

The following symbols are used in this manual to identify sections that require special attention:



Danger!

A hazard exists that will result in death or severe injury if not avoided.



Warning!

Improper handling of certain reagents can cause damage to your health. In any case follow the safety labels on the packing, the safety instructions of the package insert and available SDS. Protective measures specified there have to be followed exactly.



Caution!

A hazard exists that may result in minor or moderate injury.



Notice!

Important information or specific instructions need to be strictly followed.

EN

2 Product overview

2.1 Guide to symbols

Labels attached to the product should be strictly observed to avoid personal injury or damage to the product. Refer to this chapter for information regarding the nature of the danger or risk before taking any action where such label is present.



For professional users in the European Union:

If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.

For disposal in countries outside of the European Union:

This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

2.3 Features

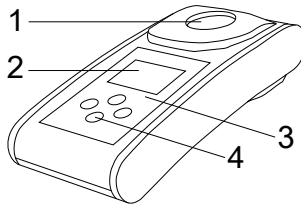
Lovibond MD50 and MD150 photometers provide high level of accuracy and efficiency with user friendly interface.

- Robust design, Water & Dust proof.
- Innovative optics system to provide higher accuracy.
- Multi-coloured backlight .
- Updateable to include the latest methods.
- Non lingual UI with icons and symbols for global use.
- Memory capacity up to 100 data sets.
- Wireless data transfer via NFC to AqualX App.
- Wired data transfer via USB Cable to PC.
- PC software to import one user method and update the instrument.

2.4 Product description

Lovibond's MD50 and MD150 are series of single and multiparameter photometers designed specially for customers who wants to measure specific parameters in either Pool water, drinking water, industrial water or wastewater applications. With high quality stable LED and mounted Light guides to achieve sufficient light on detector, the instruments provide high accuracy in measurement results and operational efficiency. MD50 and MD150's Compact design makes them a perfect handheld instruments ideal in the field. Lovibond instruments with the help of locally produced reagents and test standards provide a complete solution to meet requirements in the water analysis industry.

2.4.1 Instrument view



Front Side

1 - Sample Chamber





2 - Display

3 - Variant Name

4 - Power button



EN

2.4.2 Description of the keys and switches

Key	Function
	Down key Turns Instrument on or off Used for scrolling downward
	Test key Measure sample Select or confirm an action
	Back key Go back to previous menu Turns backlight on or off
	Up key Scroll lists upward Go into settings menu


2.4.3 Interface description

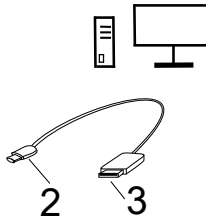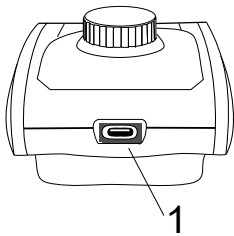1. USB-C port for data transfer, updates and method import via PC software.



1. USB-C Port (waterproof)
2. USB-C
3. USB-A

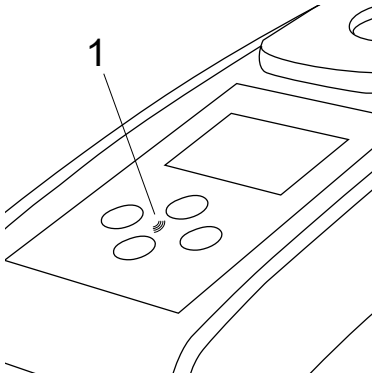2. NFC for wireless data transfer to smart devices via App.



1. NFC field

3 Commissioning

3.1 Operating environment

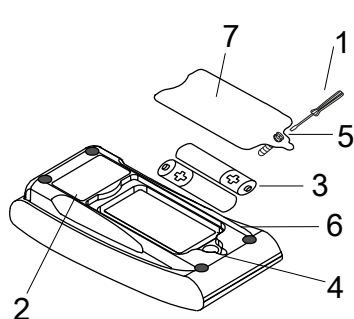
The instrument can be used in any indoor or outdoor environment that is deemed safe for an operator to perform the analysis. However it is recommended to not use instrument in bright sunlight to avoid errors caused by stray light. This environment includes a temperature range from 5 to 50 degrees C with a non-condensing humidity up to 90%. Large temperature differences between the instrument and the environment can lead to errors – e.g. due to the formation of condensation in the area of the lens or on the vial.

EN

3.2 Contents of delivery

Instrument
2 Batteries (AA)
3 Vials 24 mm Ø
3 Plastic stirring rods 10 cm
Brush 11 cm
Screw driver
Syringe 10 mL
USB Cable
Instruction manual
Methods manual (QR Code)
Certificate of Compliance
Warranty Information
Carrying case with Foam insert
Reagents for methods

3.3 Inserting and replacing the batteries



- 1 - screw driver
- 2 - instrument back
- 3 - battery
- 4 - notch
- 5 - screw
- 6 - seal ring
- 7 - battery compartment cover

1. Switch the instrument off.
2. If necessary remove vial from the sample chamber.
3. Place the instrument upside down on a clean and even surface.
4. Unscrew the one screw (5) of the battery compartment cover (7).
5. Lift off battery compartment cover (7) at the notch (4).
6. Remove old batteries (3).
7. Place 2 new batteries.
Ensuring the correct polarity!
8. Close the battery compartment cover (7).
Check the seal ring (6) of the notch to make sure it is tight-fitting.
9. Tighten the screws (5) carefully.



Caution!

To ensure that the instrument is water proof:

- Seal ring must be in position
- Battery compartment cover must be fixed with all screws



Caution!

Dispose of used batteries in accordance with all federal, state and local regulations.

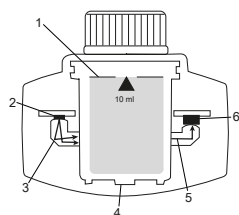
4 Operation

4.1 First start up

- Insert the batteries as described in chapter 3.3.
- Turn the instrument on by pressing Down key.
- The instrument will show company logo in sequence.
- Instrument's firmware version will be displayed on screen for a short while.
- Set date and time by following procedure described in 4.3.1.
- Choose reagent type to display your desired methods only. For more details please follow procedure described in 4.3.1
- A methods' list will appear which will be the home screen of the instrument.

Note: Instrument backlight will turn on by default, to turn the backlight off, please press Back key for 3 seconds.

4.2 General operation principles



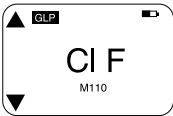

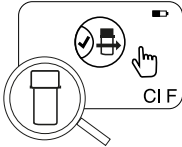



1. Sample vial
2. Light source
3. Lightguide
4. Sample chamber
5. Lightbeam
6. Spectrometric sensor + detector




The photometer has pre-programmed methods which are derived from standard analytical procedures. To ensure simplified and error free analysis, necessary calibration curves with reagents, reaction times and sequences are all programmed into these methods. The optical setup of photometer consists of a light source, interference filters (specific variants) and a spectrometric sensor. Lovibond photometers use LEDs as light source which are highly energy efficient and have a long life to last as long as the life of the photometer itself. A high quality spectrometric sensor is used to collect and measure the amount of light transmitted through the sample and transfers it to a microprocessor which digitally calculates the concentration and displays results in respective units.

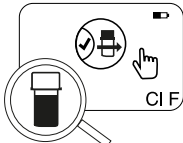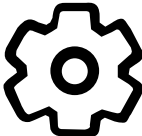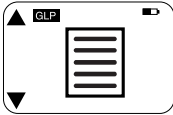
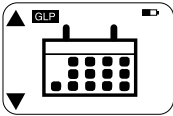

4.3 Control elements


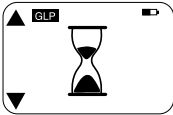
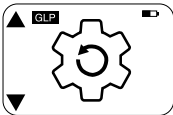
4.3.1 List of control elements and their function


Function	Description	How to execute function
	Turn Instrument on/off	<ul style="list-style-type: none"> • Press Down key to turn on the instrument. • Press and hold Down key to turn off the instrument.
	Backlight	<ul style="list-style-type: none"> • Press and hold the Back key for 3 seconds to turn the backlight on or off.
	Measurement mode	<ul style="list-style-type: none"> • Last used method will be shown on the display. • Navigate through the method list and select the desired method. • Press the Test key to select method.
	Back to previous view	<ul style="list-style-type: none"> • Press the Back key to go back to previous screen.
	Perform Zero	<ul style="list-style-type: none"> • Fill 24 mm vial with 10 ml sample, or use 16 mm reagent blank vial where necessary. • Note: Each method has different blank requirements, please follow the methods procedure to correctly blanking the instrument. Please download the methods description by scanning the QR code on the last page. • Close vial. • Place sample vial in the sample chamber. Pay attention to the positioning! • Press Test key to blank the instrument. • In case of countdowns, measurement takes place automatically after the countdown is finished.

Function	Description	How to execute function
	Perform Test	<ul style="list-style-type: none"> The countdown can be skipped by pressing the test button again, but it is strongly recommended that you follow the procedure. After the measurement, the empty cuvette symbol changes to a full cuvette (bottom left of the display). <p>Note: You can disable timers for all methods from settings.</p> <p>Attention: The accuracy of tests cannot be guaranteed if method procedures are not followed.</p>
$\text{Cl}_2 \text{ F} + \text{Cl}_2 \text{ T} =$ $\text{mg/L Cl}_2 \text{ comb}$	Concatenated methods	<p>Some methods are linked together to calculate concentration of specific parameters.</p> <p>In this case result of the first part method will not be displayed and the instrument will continue for the second part method.</p> <p>When procedure is finished press Up or Down key to switch between final calculated result and part method result.</p>

Function	Description	How to execute function
mg/L Cl ₂ F ⇌ mg/L Br ₂	Change citation form	<ul style="list-style-type: none"> • Result is displayed in default citation form. • Press Up or Down key to change the citation form. • The new chosen citation form is saved by the instrument as default and will show results in this citation form unless reset to default.
	User calibration	<ul style="list-style-type: none"> • For user calibration, select and perform test using standard of known concentration instead of water sample. • Hold Test key for 3 seconds when results are displayed. • The instrument goes into the calibration mode. • Press Up key or Down key to decrease / increase displayed value to match with target value. • Press Test key to accept adjusted value. You can cancel the calibration at any time by pressing Back key. • A log entry will be created with method number. "Calib" and Calibration factor with date and time stamp.
	Absorbance measurement	<p>Absorbance measurement will follow the same procedure as concentration methods. Scroll methods list to select the absorbance method. Absorbance methods for each available wavelength will be displayed in the list.</p>
	Settings menu	<ul style="list-style-type: none"> • When in home menu, press and hold Up key for 3 seconds to enter settings menu. • Scroll up and down to view different setting options.

Function	Description	How to execute function
	Enter logs menu	<ul style="list-style-type: none"> • When log symbol is displayed press Test key to enter logs. • The instrument displays a list of all saved results/ protocols • Press Up or Down key to scroll through the results in the list. • All results and protocols are preselected by default for transfer. • Press Test key to select/unselect individual results to transfer. • Press and hold Test key for 3 seconds to select / unselect all results. • Press and hold Up key for 3 seconds to transfer results via NFC. • Press Back key to go back to previous menu.
	Date setting	<ul style="list-style-type: none"> • Press Test key to open date setting menu. • Press Up or Down key to toggle through the format. • Press Test key to confirm format. • Press Up or Down key to adjust date. • When the arrow is on the last digit, press the Test key to confirm or press the Back key to return to the previous position. The date is set and the instrument goes back to settings menu. • A protocol entry will be created in logs for the date change.
	Time setting	<ul style="list-style-type: none"> • Press Test key to open time setting menu. • Press the Up or Down key to decrease or increase the value. • When the arrow is at the last position, press the Test key to confirm or press the Back key to go back or cancel the setting. • A protocol entry will be created in logs for time change.

Function	Description	How to execute function
	One Time Zero	<p>Some methods offer a One Time Zero to make the measurement process more efficient.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press Up or Down key to scroll to the OTZ symbol in the settings menu. • Press Test key to enable or disable OTZ. • Perform zero as described in the method, the instrument saves this zero and uses it for next measurements unless the instrument is turned off or a new zero is performed. • An OTZ icon will be displayed on screen during measurement and will be protocolled in the logs as a separate entry. <p>Note: You can always overwrite OTZ by pressing back key and performing a new zero.</p>
	Timers on/off	<ul style="list-style-type: none"> • Press Up or Down key to scroll to Timers icon from the settings menu. • You can deactivate integrated timers for all methods through this setting. • Press Test key to enable/disable timers. • A protocol entry in the logs will be created with the time stamp. <p>Attention: It is recommended to follow integrated timers in methods procedures to achieve accurate results.</p>
	Factory reset	<ul style="list-style-type: none"> • Press the Up or Down key to navigate to the Factory settings menu. • Press the Test key to select the factory settings. • Press the Test key again to confirm the process or press the Back key to cancel the reset. • An entry with a time stamp is created in the logs. <p>Note: A reset deletes user methods, user calibration and all saved results.</p>

Function	Description	How to execute function
	Select reagent type	<p>Attention: Please transfer all results before resetting the instrument.</p> <p>Selecting the reagent type allows you to display only selected methods in the Home menu and hide methods of other reagent types.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Press the Up or Down key to navigate to the menu for selecting the reagent type. • Press the Test key to access the menu. • Press the Up or Down key to navigate to other options or press the Test key to select the desired reagent type.

4.5 Data transfer

You can transfer all or selected data to either the app or the PC software. Please select the log icon in the settings menu to display the saved results. MD 50 provides two options to transfer data:

1. Data transfer via USB cable
2. Data transfer via NFC

4.5.1 Data transfer via USB

- To transfer data via USB cable Lovibond® Data Expert software is required which is provided free of cost and is available for download on the Lovibond website.
- Please install the software on your PC and follow instructions on the software on how to transfer data.
- Once connected, the instrument will show USB Symbol on the status bar.
- Go to Logs menu as described in chapter 4.3.1 and select specific or all results to transfer via USB.

Note: No action will be required on photometer to initiate the data transfer process.

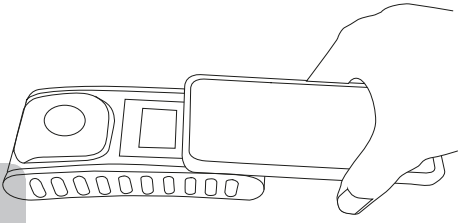
4.5.2 Data transfer via NFC

- To transfer measurement results via NFC, go to Logs menu as described in chapter 4.3.1 and select specific or all results to transfer via NFC.
- Press and hold Up key to save results in the NFC tag.
- Open the AquaLX® app and bring the smart device close to the instrument to transfer the results (as shown in the picture).
- Press Back key to go back to the settings menu.

Note: When you return to the settings menu, all data is deleted from the NFC tag.

- Make sure that NFC is enabled on the smart device.

EN



5 Maintenance

5.1 Recommended maintenance schedule

Task	What to Do	What not to do
Clean instrument and measurement chamber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clean measurement chamber using lint-free, moist cloths (oil free) or cotton buds. 2. If the housing surface is dirty, wipe it with a soft cloth and mild soapy water. 3. Remove any chemicals splashes as soon as possible. 4. For disinfection, you can use isopropanol for cleaning for a short time. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do not use vial which is not tightly closed. 2. Do not use detergents that include solvents. 3. Do not spray or pour chemicals directly into the measuring chamber.
Clean accessories	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vials, caps and stirring rods should be cleaned thoroughly after each analysis to prevent interference. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do not use vials that have visible scratches. 2. Use vials which are not completely dry from outside.
Battery replacement	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remove batteries when storing instrument for longer period of time to avoid battery leakage. 2. Use always non-rechargeable batteries. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Do not use unspecified type of battery.
Storage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Store the instrument and accessories under ambient conditions specified. 	








Warning!

Improper handling of certain reagents can cause damage to your health. In any case follow the safety labels on the packing, the safety instructions of the package insert and available SDS. Protective measures specified there have to be followed exactly.

6 Troubleshooting

6.1 Error messages and what to do

Display	Possible Causes	What to do
	<p>Over range - Reading is exceeding the range.</p> <p>Water sample is too cloudy.</p> <p>Too much light on the detector.</p>	<p>Dilute the sample.</p> <p>Filtrate water sample.</p> <p>Check the seal on the cuvette cap.</p>
	<p>Under range - The reading is below the detection limit of method.</p>	<p>Make sure that reagents dosing and reaction times have been according to the method's instruction. Check sample to make sure it sufficient concentration of the parameter being measured.</p>
	<p>Insufficient light on detector.</p>	<p>Clean the measurement chamber to clean any dust particles blocking the light.</p>
	<p>Calculation error.</p>	
<p>Instrument shut off immediately</p>	<p>Batterie low</p> 	<p>Replace the batteries.</p>

7 Accessories & Replacement parts

7.1 List of Accessories

250 mL bottle, AF 631	375072
Brush, 11 cm length	380230
Cleaning cloth	197635
Cuvette stand for 6 round cuvettes Ø 24 mm	418951
Factory Calibration certificate ISO 9001 for MD50	999756
Factory Calibration certificate ISO 9001 for method CI M100 (MD50)	999720
Factory Calibration certificate ISO 9001 for method CI M110 (MD50)	999721
Fixed price service package for MD50	19802710
Measuring beaker, 100 ml	384801
Mixing cylinder, 25 ml	19802650
Plastic funnel with handle (white)	471007
Reference Standard Kit Chlorine - 0.2 and 1.0 mg/l (MD50)	275620
Reference Standard Kit Chlorine - 0.5 and 2.0 mg/l (MD50)	275621
Reference Standard Kit Chlorine - 1.0 and 4.0 mg/l (MD50)	275622
Round cuvette 24 mm ø, set of 5	197629
Round cuvette 24 mm ø, set of 12	197620
Sealing ring for round vials 24 mm ø, set of 12	197626
Service plan - 3 years for MD50	19802810
Stirring rod, 10 cm length	364109
Stirring rod, 10 cm length, set of 10	364130
Stirring rod, 13 cm length	364100
Stirring rod, 13 cm length, set of 10	364120
USB-C cable 1 m, USB-C to A	19820-081
Verification Standard Kit MD50	215700
Water sampler with bottle 250 mL and lid, AF 631	170500

8 Specifications

Optics	LED, spectrometer sensor, interference filter (selected variants only)
Light Source	LED
Wavelength	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Photometric Range	0 - 3 Abs
Photometric Accuracy	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
Suitable Vials	<ul style="list-style-type: none"> • Round Cuvettes 13 mm • Round Cuvettes 16 mm • Round Cuvettes 24 mm
Display	Backlit LCD
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
Data Transfer Format	.csv
Operation	Foil keypad
Auto – OFF	Yes
Programmability	yes with PC software
Calibration	Factory and user adjustment - return to factory adjustment possible at any time
Updates	Firmware and methods update
Internal Storage	Internal ring memory for 100 data records
Battery Life Time	approx. 5000 measurements (without backlight)
Portability	Portable
Degree of Pollution	2
Maximum altitude above sea level	3500
Environmental Conditions	5 - 50 °C at a relative humidity of 30 - 95 % (non-condensing)
Protection Class	IP 67
Compliance	CE

Languages Full User Manual	<ul style="list-style-type: none">• Chinese• Dutch• English• French• German• Italian• Portuguese• Russian• Spanish• Turkish
----------------------------	--

Dimensions	155 x 76 x 45 mm
------------	------------------

Weight	247 g
--------	-------

**Caution!**

Subject to technical modification!
To ensure maximum accuracy of test results, always use the reagent systems supplied by the instrument manufacturer.

9 Appendix

9.1 Copyright and Trademark Notice

iOS® is a registered trademark of Cisco, Inc. and licensed to Apple, Inc.

iTunes Store® is a trademark of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android™ and Google Play™ are trademark of Google, Inc.

Excel® is a trademark of Microsoft Corp., registered in the U.S. and other countries.

EN

Inhaltsverzeichnis

Photometer Serie

1 Einleitung	29
1.1 Allgemeine Informationen	29
1.1.1 Anleitung vor Gebrauch lesen	29
1.1.2 Zweck des Produktes	29
1.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	29
1.1.4 Voraussetzungen für einen sicheren Gebrauch	29
1.1.5 Anleitung aufbewahren	30
1.1.6 Benutzerqualifikation	30
1.1.7 Umgang mit gefährlichen Chemikalien	30
1.1.8 Entsorgungshinweise	30
1.2 Liste aller verwendeten Zeichen im Dokument	30
2 Produktübersicht	32
2.1 Leitfaden zu Symbolen	32
2.3 Ausstattung	32
2.4 Beschreibung des Produktes	32
2.4.1 Geräteansicht	33
2.4.2 Beschreibung der Tasten und Schalter	33
2.4.3 Beschreibung der Schnittstellen	34
3 Inbetriebnahme	35
3.1 Betriebsumgebung	35
3.2 Lieferumfang	35
3.3 Einsetzen und Auswechseln der Batterien	36
4 Arbeitsweise	37
4.1 Erstmalige Inbetriebnahme	37
4.2 Allgemeine Funktionsprinzipien	37
4.3 Bedienelemente	38
4.3.1 Liste der Bedienelemente und deren Funktionen	38
4.5 Übertragung von Daten	44
4.5.1 Datenübertragung über USB Kabel	44
4.5.2 Datenübertragung über NFC	45
5 Wartung	46
5.1 Empfohlener Wartungsplan	46
6 Fehlerbehebung	48
6.1 Fehlermeldungen und was zu tun ist	48
7 Zubehör & Ersatzteile	49
7.1 Zubehörliste	49
8 Spezifikationen	50

9 Appendix

52

9.1 Hinweis zu Copyright und Warenzeichen

52

DE

1 Einleitung

1.1 Allgemeine Informationen

1.1.1 Anleitung vor Gebrauch lesen

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Handhabung des Produkts. Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Produkt vertraut, bevor Sie damit arbeiten.

DE

1.1.2 Zweck des Produktes

Lovibond Photometer sind für Messungen verschiedener Parametern in den Bereichen wie Trinkwasseraufbereitung, Abwasserbehandlung, industrielles Prozesswasser, Schwimmbadwasser und Forschung konzipiert. Sie sind sowohl als Tischgeräte als auch als tragbare Geräte erhältlich.

Für den Transport werden die Geräte in robusten Koffern mit dem erforderlichen Zubehör geliefert.

Die Leistung der Geräte kann durch extreme Licht- und Temperatureinflüsse beeinträchtigt werden, weshalb die Geräte immer unter den empfohlenen Umgebungsbedingungen verwendet werden sollten.

1.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Haftung und Gewährleistung des Herstellers für Schäden und Folgeschäden erlischt bei unsachgemäßer Verwendung, wie Missachtung dieser Gebrauchsanleitung, Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Fachpersonal oder nicht autorisierten Änderungen am Produkt.

Der Hersteller haftet nicht für Kosten oder Schäden, die dem Benutzer oder Dritten durch die Verwendung dieses Produkts entstehen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Druckfehler.

1.1.4 Voraussetzungen für einen sicheren Gebrauch

Beachten Sie für einen sicheren Gebrauch die folgenden Punkte:

- Wenn das Gerät in einer vom Hersteller nicht festgelegten Weise benutzt wird, kann der vom Gerät unterstützte Schutz beeinträchtigt sein.
- Das Produkt darf nur gemäß der oben angegebenen autorisierten Verwendung benutzt werden.
- Das Produkt darf nur von den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Energiequellen mit Strom versorgt werden.
- Das Produkt darf nur unter den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Umgebungsbedingungen eingesetzt werden.
- Das Produkt darf nicht geöffnet oder verändert werden.

Das Produkt darf nicht in Gebrauch genommen werden, wenn:

- es sichtbar beschädigt ist (z. B. nach dem Transport)
- es über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Bedingungen gelagert wurde (Lagerbedingungen; siehe Kapitel "Spezifikationen")

1.1.5 Anleitung aufbewahren

Die Gebrauchsanleitung muss in der Nähe des Produktes aufbewahrt werden, damit die benötigten Informationen immer verfügbar sind.

1.1.6 Benutzerqualifikation

Das Bedienpersonal muss in der Lage sein, die Sicherheitsetiketten und Sicherheitshinweise auf den Verpackungen und Beilagen der Produkte zu verstehen und korrekt umzusetzen.

Der Benutzer muss fähig und in der Lage sein, diese Gebrauchsanleitung zu lesen und zu verstehen, um sich mit der Handhabung vertraut zu machen und einen sicheren Umgang zu gewährleisten.

1.1.7 Umgang mit gefährlichen Chemikalien

Bei Verwendung dieses Produktes können chemische und / oder biologische Gefahren bestehen. Befolgen Sie alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Protokolle, wenn Sie dieses Produkt benutzen.

Lovibond® achtet besonders bei der Entwicklung von Produkten auf die Sicherheit. Einige Gefahren durch gefährliche Substanzen können nicht vermieden werden. Wenn selbst erstellte Tests oder Lösungen verwendet werden, liegt die Verantwortung für alle durch diese Tests oder Lösungen verursachten Risiken beim Benutzer (persönliche Verantwortung).

1.1.8 Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie die Batterien und elektrischen Geräte in einer geeigneten Einrichtung gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.

Es ist illegal, die Batterien mit dem Hausmüll zu entsorgen.

Innerhalb der Europäischen Union werden die Batterien am Ende der Lebensdauer des Gerätes in einer spezialisierten Recycling-Sammelstelle entsorgt.



Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

1.2 Liste aller verwendeten Zeichen im Dokument

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, um Abschnitte zu kennzeichnen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern:



Gefahr!

Es besteht eine Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird!

**Warnung!**

Ein unsachgemäßer Umgang mit bestimmten Reagenzien kann Ihre Gesundheit schädigen. Befolgen Sie in jedem Fall die Angaben auf den Sicherheitsetiketten der Verpackung, die Sicherheitshinweise der Packungsbeilage und das verfügbare Sicherheitsdatenblatt. Dort festgelegte Schutzmaßnahmen müssen genau befolgt werden.

**Vorsicht!**

Es besteht eine Gefahr, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

**Hinweis!**

Wichtige Informationen oder spezielle Anweisungen müssen unbedingt beachtet werden.

2 Produktübersicht

2.1 Leitfaden zu Symbolen

Am Produkt angebrachte Etiketten sollten unbedingt beachtet werden, um Personenschäden oder Schäden am Produkt zu vermeiden. Wenn ein solches Etikett vorhanden ist, finden Sie in diesem Kapitel Informationen über die Art der Gefahr und das verbundene Risiko. Danach folgen die Maßnahmen.



Für professionelle Anwender in der Europäischen Union:

Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte (EEE) entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten für weitere Informationen.

Für die Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union:

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

2.3 Ausstattung

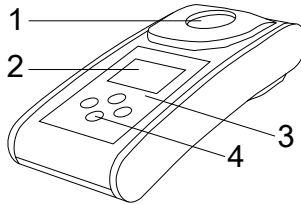
Lovibond MD50 und MD150 Photometer bieten ein hohes Maß an Genauigkeit und Effizienz mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

- Robustes Design, wasser- und staubdicht.
- Innovatives optisches System für eine höhere Genauigkeit.
- Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung.
- Aktualisierbar, um die neuesten Methoden zu integrieren.
- Nichtsprachliche Benutzeroberfläche mit Icons und Symbolen für den globalen Einsatz.
- Speicherkapazität für bis zu 100 Datensätze.
- Drahtlose Datenübertragung über NFC zur AquaLX App.
- Kabelgebundene Datenübertragung über USB-Kabel zum PC.
- PC-Software zum Importieren von eine Benutzermethode und zum Aktualisieren des Geräts.

2.4 Beschreibung des Produktes

Lovibond's MD50 und MD150 sind Serien von Einzel- und Multiparameter-Photometern, die speziell für Kunden entwickelt wurden, die spezifische Parameter in Poolwasser-, Trinkwasser-, Industriewasser- oder Abwasseranwendungen messen wollen. Mit qualitativ hochwertigen, stabilen LED und montierten Lichtleitern, um ausreichend Licht auf den Detektor zu bringen, bieten die Geräte eine hohe Genauigkeit der Messergebnisse und operative Effizienz. Das kompakte Design des MD50 und MD150 macht sie zu perfekten tragbaren Instrumenten, ideal für den Einsatz vor Ort. Lovibond Geräte bieten mit Hilfe von lokal hergestellten Reagenzien und Teststandards eine Komplettlösung für die Anforderungen in der Wasseranalysebranche.




2.4.1 Geräteansicht



- Vorderansicht
 1 - Messschacht
 2 - Display
 3 - Modell
 4 - Ein/Aus-Taste



DE

2.4.2 Beschreibung der Tasten und Schalter

Taste	Funktion
	Abwärtstaste Schaltet das Gerät ein oder aus Im Menü nach unten blättern
	Test-Taste Probe messen Auswahl oder Bestätigen einer Aktion
	Zurück-Taste Zurück zum vorherigen Menü Schaltet die Hintergrundbeleuchtung ein/aus
	Aufwärtstaste Im Menü nach oben blättern Aufrufen des Einstellungsmenüs


2.4.3 Beschreibung der Schnittstellen

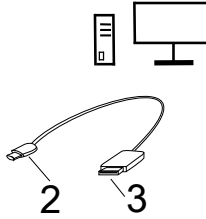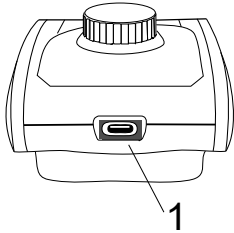1. USB-C Anschluss für eine Datenübertragung, Updates und Methodenimport über eine PC-Software.



1. USB-C Anschluss (wasserdicht)
2. USB-C
3. USB-A

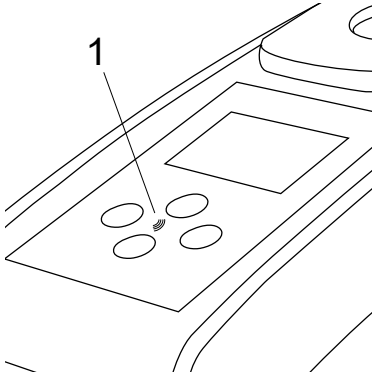2. NFC für die drahtlose Datenübertragung auf Smart Devices via App.



1. NFC-Feld

3 Inbetriebnahme

3.1 Betriebsumgebung

Das Gerät kann in jeder Innen- oder Außenumgebung verwendet werden, in der ein Bediener die Analyse sicher durchführen kann. Es wird jedoch empfohlen, das Gerät nicht in hellem Sonnenlicht zu verwenden, um Fehler durch Streulicht zu vermeiden. Diese Umgebung umfasst einen Temperaturbereich von 5 bis 40 °C und eine nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit von bis zu 90 %. Große Temperaturunterschiede zwischen dem Gerät und der Umgebung können zu Fehlern führen - z.B. durch die Bildung von Kondenswasser im Bereich der Linse oder auf der Küvette.

DE

3.2 Lieferumfang

Instrument

2 Batterien (AA)

3 Probenküvetten 24 mm Ø

3 Rührstäbe, Plastik 10 cm

Schraubendreher

Reinigungsbürste 11 cm

Dosierspritze 10 mL

USB Kabel

Geräteanleitung

Methodenanleitung (QR-Code)

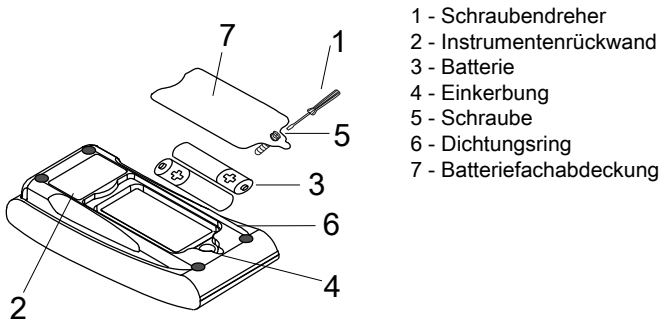
Konformitätserklärung

Garantieerklärung

Koffer mit Einsatz

Reagenzien für die Methoden

3.3 Einsetzen und Auswechseln der Batterien



1. Das Gerät ausschalten.
2. Gegebenenfalls Küvette aus dem Messschacht nehmen.
3. Legen Sie das Gerät kopfüber auf eine saubere und ebene Fläche.
4. Die eine Schraube (5) des Batteriefachdeckels (7) herausdrehen.
5. Heben Sie den Batteriefachdeckel (7) an der Kerbe (4) an.
6. Entfernen Sie die alten Batterien (3).
7. Legen Sie 2 neue Batterien ein.
8. Achten Sie auf die richtige Polarität!
9. Setzen Sie den Batteriefachdeckel (7) wieder auf.
10. Prüfen Sie den Dichtungsring (6) der Aussparung auf Dichtigkeit.
11. Ziehen Sie die Schrauben (5) vorsichtig an.



Vorsicht!

Um die Wasserdichtigkeit des Geräts zu gewährleisten:

- muss der Dichtungsring in der richtigen Position sein
- muss der Batteriefachdeckel mit allen Schrauben fixiert sein



Vorsicht!

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien in Übereinstimmung mit allen Bundes-, Landes- und örtlichen Vorschriften.

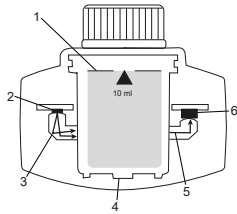
4 Arbeitsweise

4.1 Erstmalige Inbetriebnahme

- Legen Sie die Batterien, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, ein.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Abwärtstaste drücken.
- Auf dem Gerät wird zuerst das Firmenlogo angezeigt.
- Die Firmware-Version des Geräts werden danach kurzzeitig auf dem Bildschirm angezeigt.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, wie in 4.3.1 beschrieben.
- Wählen Sie den Reagenztyp, um nur die von Ihnen gewünschten Methoden anzuzeigen. Für weitere Details folgen Sie bitte der in 4.3.1 beschriebenen Prozedur.
- Es wird eine Liste der Methoden angezeigt, die den Startbildschirm des Instruments darstellt.

Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung des Geräts schaltet sich standardmäßig ein. Um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten, drücken Sie bitte die Zurück-Taste für 3 Sekunden.

4.2 Allgemeine Funktionsprinzipien



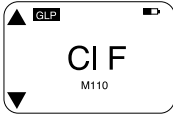

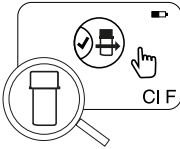



1. Kuvette mit Probe
2. Lichtquelle
3. Lichtleiter
4. Probenkammer
5. Lichtstrahl
6. Spektrometrischer Sensor + Detektor

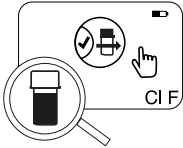
Das Photometer verfügt über vorprogrammierte Methoden, die von analytischen Standardverfahren abgeleitet sind. Um eine vereinfachte und fehlerfreie Analyse zu gewährleisten, sind die notwendigen Kalibrierkurven mit Reagenzien, Reaktionszeiten und -abläufe in diese Methoden einprogrammiert. Der optische Aufbau eines Photometers besteht aus einer Lichtquelle, Interferenzfiltern (spezifische Varianten) und einem spektrometrischen Sensor. Lovibond-Photometer verwenden LEDs als Lichtquelle, die sehr energieeffizient sind und eine lange Lebensdauer haben, die der Lebensdauer des Photometers selbst entspricht. Ein hochwertiger spektrometrischer Sensor sammelt und misst die Lichtmenge, die durch die Probe hindurchgeht, und überträgt sie an einen Mikroprozessor, der die Konzentration digital berechnet und die Ergebnisse in den entsprechenden Einheiten anzeigt.


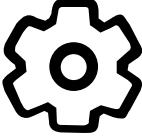

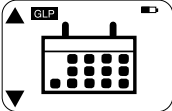
4.3 Bedienelemente

4.3.1 Liste der Bedienelemente und deren Funktionen

Funktion	Beschreibung	So führen Sie die Funktion aus
	Gerät ein/aus schalten	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Abwärtstaste, um das Gerät einzuschalten. • Halten Sie die Abwärtstaste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
	Hintergrundbeleuchtung	<ul style="list-style-type: none"> • Halten Sie die Zurück-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
	Messmodus	<ul style="list-style-type: none"> • Die zuletzt verwendete Methode wird auf dem Display angezeigt. • Navigieren Sie durch die Methodenliste und markieren Sie die gewünschte Methode. • Drücken Sie die Test-Taste, um die Methode auszuwählen.
	Zurück zur vorherigen Ansicht	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
	Nullabgleich durchführen	<ul style="list-style-type: none"> • Füllen Sie die 24-mm-Küvette mit 10 ml Probe, oder verwenden Sie gegebenenfalls eine 16-mm-Reagenzküvette. • Hinweis: Jede Methode stellt andere Anforderungen an den Blindwert, bitte befolgen Sie das Verfahren der jeweiligen Methode, um einen Nullabgleich korrekt durchzuführen. Bitte laden Sie die Methodenbeschreibung herunter, indem Sie den QR-Code auf der letzten Seite scannen. • Küvette verschließen. • Küvette in den Messschacht stellen. Achten Sie auf die Positionierung! • Test-Taste drücken um einen Nullabgleich durchzuführen.


Funktion	Beschreibung	So führen Sie die Funktion aus
		<ul style="list-style-type: none"> • Im Falle eines Countdowns erfolgt die Messung automatisch nach Ablauf des Countdowns. • Durch erneutes Drücken der Test-Taste kann den Countdown übersprungen werden, es wird jedoch dringend empfohlen, die Vorgehensweise zu befolgen. • Nach der Messung wechselt das Symbol der leeren Küvette zu einer vollen Küvette (links unten im Display). <p>Hinweis: Sie können die Timer für alle Methoden, in den Einstellungen deaktivieren.</p> <p>Achtung: Die Genauigkeit der Tests kann nicht garantiert werden, wenn die korrekte Durchführung nicht befolgt wird.</p>
	<p>Test durchführen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bereiten Sie die Probenküvette, wie in der Methodenbeschreibung erklärt, vor. Bitte laden Sie die Methodenbeschreibung herunter, indem Sie den QR-Code auf der letzten Seite scannen. • Drücken Sie die Test-Taste, um den Test durchzuführen. • Einige Methoden haben integrierte Timer vor oder nach dem Drücken der Test-Taste. Das Gerät führt die Messung durch, sobald der Countdown abgelaufen ist. • Der Benutzer kann den Countdown durch erneutes Drücken der Test-Taste überspringen, es wird jedoch dringend empfohlen, die Durchführung der Methode zu befolgen. <p>Hinweis: Sie können die Timer für alle Methoden in den Einstellungen deaktivieren.</p> <p>Achtung: Die Genauigkeit der Tests kann nicht garantiert werden, wenn die korrekte Durchführung der Methoden nicht befolgt wird.</p>
$\text{Cl}_2 \text{ F} + \text{Cl}_2 \text{ T} =$ $\text{mg/L Cl}_2 \text{ comb}$	<p>Verkettete Methoden</p>	<p>Einige Methoden sind miteinander verknüpft, um die Konzentration bestimmter Parameter zu berechnen.</p>

Funktion	Beschreibung	So führen Sie die Funktion aus
mg/L Cl ₂ F ⇄ mg/L Br ₂	Zitierform ändern	<p>In diesem Fall wird das Ergebnis der ersten Teilmethode nicht angezeigt und das Gerät fährt mit der zweiten Teilmethode fort.</p> <p>Wenn die Durchführung abgeschlossen ist, drücken Sie die Abwärtstaste oder die Aufwärtstaste, um zwischen dem berechneten Endergebnis und dem Ergebnis der Teilmethode zu wechseln.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Ergebnis wird in der Standardzitierform angezeigt. • Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste, um die Zitierform zu ändern. • Die neu gewählte Zitierform wird vom Gerät als Standard gespeichert und zeigt die Ergebnisse in dieser Zitierform an, bis die Standardeinstellung wiederhergestellt wird.
	Anwenderkalibrierung	<ul style="list-style-type: none"> • Für die Anwenderkalibrierung wählen Sie einen Test mit einem Standard bekannter Konzentration anstelle einer Wasserprobe und führen ihn durch. • Halten Sie die Test-Taste für 3 Sekunden gedrückt, wenn die Ergebnisse angezeigt werden. • Das Gerät wechselt in den Kalibrierungsmodus. • Mit Hilfe der Abwärtstaste oder der Aufwärtstaste verringern bzw. erhöhen Sie den angezeigten Wert bis er mit dem Zielwert übereinstimmt. • Drücken Sie die Test-Taste, um den eingestellten Wert zu übernehmen. Sie können die Kalibrierung jederzeit durch Drücken der Zurück-Taste abbrechen. • Es wird ein Protokolleintrag mit der Methodennummer erstellt. "Calib" und Kalibrierungsfaktor mit Datum und Zeitangabe.

Funktion	Beschreibung	So führen Sie die Funktion aus
	Absorption	<p>Navigieren Sie durch die Methodenliste, um die Absorptionsmethode auszuwählen. Die Absorptionsmethoden für jede verfügbare Wellenlänge werden in der Liste angezeigt.</p>
	Einstellungsmenü	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie sich im Home-Menü befinden, halten Sie die Aufwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen. • Navigieren Sie nach oben und unten, um verschiedene Einstellungsoptionen anzuzeigen.
	Protokolle einsehen	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn dieses Symbol angezeigt wird, drücken Sie die Test-Taste, um die Protokolle aufzurufen. • Das Gerät zeigt eine Liste mit allen gespeicherten Ergebnissen/Daten an. • Mit Hilfe der Pfeil-Tasten navigieren Sie durch die Ergebnisse in der Liste. • Standardmäßig sind alle Ergebnisse und Protokolle vorausgewählt. • Drücken Sie die Test-Taste, um einzelne Ergebnisse für die Übertragung auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben. • Halten Sie die Test-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um alle Ergebnisse auszuwählen bzw. die Auswahl aufzuheben. • Halten Sie die Aufwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um Ergebnisse über NFC. • Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
	Datum einstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Test-Taste, um das Menü für die Datumseinstellung zu öffnen. • Drücken Sie die Abwärtstaste oder die Aufwärtstaste, um zwischen den Formaten zu wechseln.

Funktion**Beschreibung****So führen Sie die Funktion aus**

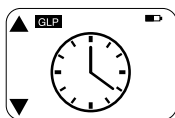- Drücken Sie die Test-Taste, um das Format zu bestätigen.
- Stellen Sie mit Hilfe der Abwärtstaste oder der Aufwärtstaste das Datum ein.
- Wenn der Pfeil auf der letzten Ziffer steht, drücken Sie die Test-Taste zur Bestätigung oder drücken Sie die Zurück-Taste, um zur vorherigen Position zurückzukehren. Das Datum ist eingestellt und das Gerät kehrt zum Einstellungs Menü zurück.
- Für die Datumsänderung wird ein Protokolleintrag in den Protokollen erstellt.



**Zeit einstellen**

- Drücken Sie die Test-Taste, um das Zeiteinstellungsmenü zu öffnen.
- Drücken Sie die Abwärtstaste oder die Aufwärtstaste, um den Wert zu verringern oder zu erhöhen.
- Wenn sich der Pfeil an der letzten Position befindet, drücken Sie die Test-Taste, um zu bestätigen, oder drücken Sie die Zurück-Taste, um zurückzugehen oder die Einstellung abzubrechen.
- Für die Zeitänderung wird ein Eintrag in den Protokollen erstellt.

**One Time Zero**

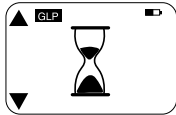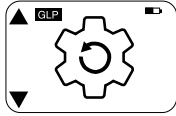Einige Methoden bieten einen One Time Zero an, um den Messvorgang effizienter zu gestalten.

- Drücken Sie die Abwärtstaste oder die Aufwärtstaste, um OTZ im Einstellungsmenü zu wählen.
- Drücken Sie die Test-Taste, um OTZ zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Führen Sie den Nullabgleich wie in der Methode beschrieben durch. Das Gerät speichert diesen Nullabgleich und verwendet ihn für die nächsten Messungen, bis das Gerät ausgeschaltet wird oder ein neuer Nullabgleich durchgeführt wird.
- Ein OTZ-Symbol wird während der Messung auf dem Bildschirm

Funktion	Beschreibung	So führen Sie die Funktion aus
	Timer ein/aus	<p>angezeigt und in den Protokollen als separater Eintrag protokolliert.</p> <p>Hinweis: Sie können den OTZ jederzeit überschreiben, indem Sie die Zurück-Taste drücken und einen neuen Nullabgleich durchführen.</p>
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Abwärtstaste oder die Aufwärtstaste, um zum Menü Werkseinstellung zu navigieren. • Drücken Sie die Test-Taste, um die Werkseinstellungen auszuwählen. • Drücken Sie erneut die Test-Taste, um den Vorgang zu bestätigen, oder drücken Sie die Zurück-Taste, um das Zurücksetzen abubrechen. • In den Protokollen wird ein Eintrag mit Zeitstempel erstellt. <p>Hinweis: Ein Zurücksetzen löscht Benutzermethoden, Benutzerkalibrierung und alle gespeicherten Ergebnisse.</p>

Funktion**Beschreibung****So führen Sie die Funktion aus**

Achtung: Bitte übertragen Sie alle Ergebnisse, bevor Sie das Gerät zurücksetzen.



Reagenztyp auswählen

Die Auswahl des Reagenztyps ermöglicht es Ihnen, nur ausgewählte Methoden im Home-Menü anzuzeigen zu lassen und Methoden anderer Reagenztypen auszublenden.

- Drücken Sie die Abwärtstaste oder die Aufwärtstaste, um zum Menü für die Auswahl des Reagenztyps zu navigieren.
- Drücken Sie die Test-Taste, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Abwärtstaste oder die Aufwärtstaste, um zu anderen Optionen zu navigieren, oder drücken Sie die Test-Taste, um den gewünschten Reagenztyp auszuwählen.

DE

4.5 Übertragung von Daten

Sie können alle oder ausgewählte Daten entweder an die App oder die PC-Software übertragen.

Bitte wählen Sie das Protokollsymbol im Einstellungsmenü, um sich die gespeicherten Ergebnisse anzeigen zu lassen.

Das MD 50 bietet zwei Möglichkeiten, Daten zu übertragen:

1. Datenübertragung über USB-Kabel
2. Datenübertragung über NFC

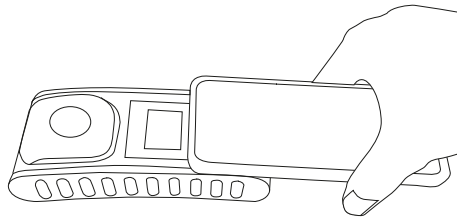
4.5.1 Datenübertragung über USB Kabel

- Für die Datenübertragung per USB-Kabel ist die Lovibond® Data Expert Software erforderlich, die kostenlos auf der Lovibond-Website zum Download bereitsteht.
- Bitte installieren Sie die Software auf Ihrem PC und befolgen Sie die Anweisungen der Software zur Datenübertragung.
- Sobald das Gerät angeschlossen ist, wird das USB-Symbol in der Statusleiste angezeigt.
- Gehen Sie in das Menü Logs, wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, und wählen Sie bestimmte oder alle Ergebnisse für die Übertragung über USB aus.

Hinweis: Es ist keine Aktion am Photometer erforderlich, um die Datenübertragung zu starten.

4.5.2 Datenübertragung über NFC

- Um Messergebnisse über NFC zu übertragen, gehen Sie in das Menü Logs, wie in Kapitel 4.3.1 beschrieben, und wählen Sie bestimmte oder alle Ergebnisse für die Übertragung über NFC aus.
- Drücken und halten Sie die Test-Taste für 3 Sekunden, um die Ergebnisse zum NFC-Tag hinzuzufügen.
- Öffnen Sie die AquaLX-App und bringen Sie das Smartgerät in die Nähe des Geräts, um die Ergebnisse zu übertragen (wie auf dem Bild dargestellt).
- Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.
Hinweis: Wenn Sie zum Einstellungsmenü zurückkehren, werden alle Daten vom NFC-Tag gelöscht.
- Stellen Sie sicher, dass NFC auf dem Smart-Gerät aktiviert ist.



5 Wartung

5.1 Empfohlener Wartungsplan






Aufgabe	Was zu tun ist	Was man nicht macht
Gerät und Messschacht reinigen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinigen Sie den Messschacht mit fusselfreien, feuchten Tüchern (ölfrei) oder Wattestäbchen. 2. Wenn die Gehäuseoberfläche verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenlauge ab. 3. Entfernen Sie eventuelle Chemikalienspritzer so schnell wie möglich. 4. Zur Desinfektion können Sie für kurze Zeit Isopropanol zur Reinigung verwenden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keine Küvette verwenden, die nicht dicht verschlossen ist. 2. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Lösungsmittel enthalten. 3. Keine Chemikalien direkt in den Messschacht sprühen oder gießen.
Sauberes Zubehör	<ol style="list-style-type: none"> 1. Küvetten, Kappen und Rührstäbchen sollten nach jeder Analyse gründlich gereinigt werden, um Interferenzen zu vermeiden. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwenden Sie keine Küvette mit sichtbaren Mängeln, wie z. B. Macken, Kratzer oder Risse. 2. Verwenden Sie keine Küvetten, die von außen nicht vollständig trocken sind.
Austausch der Batterie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum lagern, um ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden. 2. Verwenden Sie nur nicht wiederaufladbare Batterien. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keine nicht spezifizierte Batterietypen verwenden.
Lagerung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lagern Sie das Gerät und das Zubehör unter den angegebenen Umgebungsbedingungen. 	

**Warnung!**

Ein unsachgemäßer Umgang mit bestimmten Reagenzien kann Ihre Gesundheit schädigen. Befolgen Sie in jedem Fall die Angaben auf den Sicherheitsetiketten der Verpackung, die Sicherheitshinweise der Packungsbeilage und das verfügbare Sicherheitsdatenblatt. Dort festgelegte Schutzmaßnahmen müssen genau befolgt werden.

6 Fehlerbehebung

6.1 Fehlermeldungen und was zu tun ist

Display	Mögliche Ursache	Maßnahme
	Messbereich überschritten - Der Messwert liegt außerhalb des Bereichs.	Die Probe verdünnen.
	Trübungen in der Probe. Zu viel Lichteinfall auf dem Detektor.	Die Probe filtrieren. Die Dichtung des Küvettendeckels prüfen.
	Messbereich unterschritten - Der Messwert liegt unter der Nachweisgrenze der Methode.	Vergewissern Sie sich, dass die Dosierung der Reagenzien und die Reaktionszeiten den Anweisungen der Methode entsprechen. Prüfen Sie die Probe, um sicherzustellen, dass sie eine ausreichend hohe Konzentration des zu messenden Parameters aufweist.
	Zu wenig Lichteinfall auf dem Detektor.	Die Messkammer reinigen, um Staubpartikel zu entfernen, die den Lichteinfall behindern.
	Kalkulationsfehler	
Gerät schaltet sofort ab	Batterie zu schwach	Batterie austauschen.
		

7 Zubehör & Ersatzteile

7.1 Zubehörliste

250 mL Flasche, AF 631	375072
Bürste, 11 cm Länge	380230
Festpreis-Servicepaket für MD50	19802710
Kunststofftrichter mit Griff	471007
Küvettendichtring für Rundküvetten 24 mm, 12er Set	197626
Küvettenständer für 6 Rundküvetten Ø 24 mm	418951
Messbecher, 100 ml	384801
Mischzylinder mit Stopfen notwendiges Zubehör zu Bestimmung von Molybdän LR mit MD 100 (276140)	19802650
Plastikrührstab, 10 cm Länge	364109
Plastikrührstab, 10 cm Länge, 10er Set	364130
Plastikrührstab, 13 cm Länge	364100
Plastikrührstab, 13 cm Länge, 10er Set	364120
Probensammler mit 250 mL Flasche und Deckel, AF 631	170500
Referenzstandardkit Chlor 0,2 und 1,0 mg/l (MD50)	275620
Referenzstandardkit Chlor 0,5 und 2,0 mg/l (MD50)	275621
Referenzstandardkit Chlor 1,0 und 4,0 mg/l (MD50)	275622
Reinigungstuch	197635
Rundküvette mit Deckel Ø 24 mm, Höhe 48 mm, 10 ml, 5er Set	197629
Rundküvette mit Deckel Ø 24 mm, Höhe 48 mm, 10 ml, 12er Set	197620
Serviceplan - 3 Jahre für MD50	19802810
USB-C-Kabel 1 m, USB-C auf A	19820-081
Verifikationsstandard-Kit MD50	215700
Werkskalibrierzertifikat ISO 9001 für MD50	999756
Werkskalibrierzertifikat ISO 9001 für Methode CI M100 (MD50)	999720
Werkskalibrierzertifikat ISO 9001 für Methode CI M110 (MD50)	999721

DE

8 Spezifikationen

Optik	LED, Spektrometersensor, Interferenzfilter (nur ausgewählte Varianten)
Lichtquelle	LED
Wellenlänge	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Photometerischer Bereich	0 - 3 Abs
Photometerische Genauigkeit	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
geeignete Küvetten	<ul style="list-style-type: none"> • Rundküvetten 13 mm • Rundküvetten 16 mm • Rundküvetten 24 mm
Display	Hintergrundbeleuchtetes LCD
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
Datenübertragungsformat	.csv
Bedienung	Folientastatur
Auto – OFF	Ja
Programmierbarkeit	ja mit PC Software
Justierung	Werkskalibrierung- und Anwenderjustierung - Rückkehr zur Werkskalibrierung jederzeit möglich
Updates	Firmware und Methoden update
interner Speicher	interner Ringspeicher für 100 Datensätze
Batterielebensdauer	ca. 5000 Messungen (ohne Hintergrundbeleuchtung)
Tragbarkeit	Portable
Verschmutzungsgrad	2
Maximale Höhe über Normalhöhennull	3500
Umgebungsbedingungen	5 - 50 °C bei einer relativen Feuchte von 30 - 95 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP 67
Konformität	CE

Sprachen Bedienungsanleitung	<ul style="list-style-type: none">• Chinesisch• Deutsch• Englisch• Französisch• Italienisch• Niederländisch• Portugiesisch• Russisch• Spanisch• Türkisch
---------------------------------	---

Abmessungen	155 x 76 x 45 mm
Gewicht	247 g

**Vorsicht!**

Technische Änderungen vorbehalten!
Um eine maximale Genauigkeit der Testergebnisse zu gewährleisten, verwenden Sie immer die vom Gerätehersteller gelieferten Reagenzsysteme.

9 Appendix

9.1 Hinweis zu Copyright und Warenzeichen

iOS® ist eine eingetragene Marke von Cisco, Inc. und lizenziert an Apple, Inc.
iTunes Store® ist eine Marke von Apple, Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

Android™ und Google Play™ sind Marken von Google, Inc.

Excel® ist eine Marke der Microsoft Corp. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

DE

Contenido

Photometer Series

1 Introducción	55
1.1 Información general	55
1.1.1 Leer las instrucciones antes de usar	55
1.1.2 Finalidad del producto	55
1.1.3 Uso autorizado	55
1.1.4 Requisitos para un uso seguro	55
1.1.5 Conserve las instrucciones	56
1.1.6 Cualificación del usuario	56
1.1.7 Manipulación de productos químicos peligrosos	56
1.1.8 Instrucciones de eliminación	56
1.2 Lista de todos los símbolos utilizados en el documento	56
2 Resumen del producto	58
2.1 Guía de símbolos	58
2.3 Características	58
2.4 Descripción del producto	58
2.4.1 Vista del instrumento	59
2.4.2 Descripción de las teclas e interruptores	59
2.4.3 Descripción de la interfaz	60
3 Puesta en funcionamiento	61
3.1 Condiciones de funcionamiento	61
3.2 Contenido de la entrega	61
3.3 Colocación y sustitución de las pilas	62
4 Operación	63
4.1 Primera puesta en marcha	63
4.2 Principios generales de funcionamiento	63
4.3 Lista de elementos de control y su función	64
4.3.1 Lista de elementos de control y su función	64
4.5 Transferencia de datos	69
4.5.1 Transferencia de datos por USB	70
4.5.2 Transferencia de datos a través de NFC	70
5 Mantenimiento	71
5.1 Programa de mantenimiento recomendado	71
6 Resolución de problemas	73
6.1 Mensajes de error y qué hacer	73
7 Accesorios y piezas de repuesto	74
7.1 Lista de accesorios	74
8 Especificaciones	75

9 Apéndice	77
9.1 Aviso de derechos de autor y marcas comerciales	77

ES

1 Introducción

1.1 Información general

1.1.1 Leer las instrucciones antes de usar

Este manual proporciona información importante sobre el funcionamiento seguro del producto. Lea atentamente este manual y familiarícese con el producto antes de utilizarlo.

1.1.2 Finalidad del producto

Los fotómetros Lovibond están diseñados para medir diferentes parámetros en muestras acuosas en una variedad de aplicaciones como, por ejemplo, agua potable, aguas residuales, agua de procesos industriales, agua de piscinas y ciencia e investigación.

Los fotómetros Lovibond son adecuados para ser utilizados en el laboratorio como instrumentos de mesa y en el campo como instrumentos portátiles. Para su portabilidad, los instrumentos se entregan en robustas cajas de transporte con los accesorios necesarios.

El rendimiento de los instrumentos puede verse afectado por la exposición a luz y temperatura extremas, por lo que los instrumentos deben utilizarse siempre en las condiciones ambientales recomendadas.

1.1.3 Uso autorizado

La responsabilidad del fabricante y la garantía sobre daños en el instrumento quedan anuladas en caso de realizar un uso impropio del mismo, ignorar las instrucciones de este manual, el uso del instrumento por parte de personal no cualificado o modificaciones no autorizadas del instrumento.

El fabricante no es responsable por los costes o daños que pueda recibir un tercero o un usuario debido al uso de este producto, especialmente en casos de uso impropio o de defectos en la conexión del mismo.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por errores de imprenta.

1.1.4 Requisitos para un uso seguro

Tenga en cuenta los siguientes puntos para un uso seguro:

- Si el equipo se utiliza de una manera no especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse afectada.
- El producto sólo puede utilizarse de acuerdo con el uso autorizado especificado anteriormente.
- El producto sólo puede ser alimentado por las fuentes de energía mencionadas en este manual de instrucciones.
- El producto sólo puede utilizarse en las condiciones ambientales mencionadas en este manual de instrucciones.
- El producto no debe abrirse ni modificarse.

El producto no debe utilizarse si:

- está visiblemente dañado (por ejemplo, después de ser transportado)
- se ha almacenado en condiciones adversas durante un largo periodo de tiempo (condiciones de almacenamiento, véase el capítulo "Especificaciones")

1.1.5 Conserve las instrucciones

El manual debe guardarse cerca del producto para que siempre pueda encontrar la información que necesita.

1.1.6 Cualificación del usuario

El personal de servicio debe ser capaz de comprender y aplicar correctamente las etiquetas de seguridad y las instrucciones de seguridad que figuran en los envases y los insertos de los productos.

El usuario debe ser capaz y entender este manual para familiarizarse con el manejo y garantizar un uso seguro.

1.1.7 Manipulación de productos químicos peligrosos

Pueden existir riesgos químicos y/o biológicos cuando se utiliza este producto. Respete todas las leyes, reglamentos y protocolos vigentes cuando utilice este producto.

Para el desarrollo de los productos, Lovibond presta mucha atención a la seguridad. Algunos riesgos derivados de sustancias peligrosas no pueden evitarse. Si se utilizan pruebas o soluciones de producción propia, la responsabilidad relativa a los riesgos causados por dichas pruebas o soluciones recae en el usuario (responsabilidad personal).

1.1.8 Instrucciones de eliminación

Elimine las baterías y el equipo eléctrico en una instalación adecuada de acuerdo con la legislación local.

Es ilegal eliminar las pilas con la basura doméstica.

En la Unión Europea, al final de la vida útil del aparato, las pilas se eliminan en un punto de recogida especializado en reciclaje.



Los instrumentos marcados con este símbolo no deben eliminarse con la basura doméstica normal.

1.2 Lista de todos los símbolos utilizados en el documento

Los siguientes símbolos se utilizan en este manual para indicar las secciones que requieren una atención especial:



¡Peligro!

Existe un peligro que provocará la muerte o lesiones graves si no se evita.

**¡Atención!**

La manipulación incorrecta de ciertos reactivos puede dañar su salud. En cualquier caso, siga la información de las etiquetas de seguridad del envase, las instrucciones de seguridad del prospecto y la hoja de datos de seguridad disponible. Las medidas de protección allí especificadas deben seguirse con exactitud.

**¡Precaución!**

Existe un peligro que puede provocar lesiones leves o moderadas.

**¡Nota!**

Deben observarse las informaciones importantes o las instrucciones especiales.

2 Resumen del producto

2.1 Guía de símbolos

Las etiquetas colocadas en el producto deben respetarse estrictamente para evitar daños personales o al producto. Consulte este documento "Guía de símbolos" para obtener información sobre la naturaleza del peligro o del riesgo antes de emprender cualquier acción cuando dicha etiqueta esté presente.



Para usuarios profesionales de la Unión Europea:

Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos (AEE), póngase en contacto con su distribuidor o proveedor para obtener más información.

Para la eliminación en países fuera de la Unión Europea:

Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea (UE). Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor y pregunte por el método correcto de eliminación.

2.3 Características

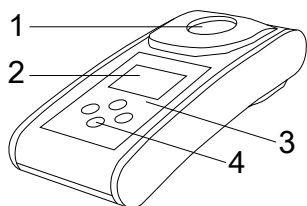
Los fotómetros Lovibond MD50 y MD150 proporcionan un alto nivel de precisión y eficiencia con una interfaz de usuario fácil de usar.

- Diseño robusto, a prueba de agua y polvo.
- Sistema óptico innovador para proporcionar una mayor precisión.
- Retroiluminación multicolor.
- Actualizable para incluir los métodos más recientes.
- Interfaz de usuario no lingual con iconos y símbolos de uso global.
- Capacidad de memoria de hasta 100 conjuntos de datos.
- Transferencia inalámbrica de datos mediante NFC a la aplicación AquaLX.
- Transferencia de datos por cable USB al PC.
- Software de PC para importar un método de usuario y actualizar el instrumento.

2.4 Descripción del producto

Los MD50 y MD150 de Lovibond son series de fotómetros monoparamétricos y multiparamétricos diseñados especialmente para clientes que desean medir parámetros específicos en aplicaciones de agua de piscinas, agua potable, agua industrial o aguas residuales. Con LED estables de alta calidad y guías de luz montadas para lograr suficiente luz en el detector, los instrumentos proporcionan una alta precisión en los resultados de medición y eficiencia operativa. El diseño compacto de los modelos MD50 y MD150 los convierte en instrumentos portátiles perfectos para su uso sobre el terreno. Los instrumentos Lovibond, con la ayuda de reactivos y patrones de ensayo de producción local, proporcionan una solución completa para satisfacer los requisitos de la industria de análisis de aguas.

2.4.1 Vista del instrumento



Lado frontal

1 - Compartimento de medición





2 - Pantalla

3 - Nombre del modelo

4 - Botón de encendido



ES

2.4.2 Descripción de las teclas e interruptores

Tecla	Función
	Tecla abajo Enciende o apaga el instrumento se utiliza para desplazarse hacia abajo
	Tecla Test Mide la muestra Selecciona o confirma una acción
	Tecla Atrás Vuelve al menú anterior Enciende o apaga la retroiluminación
	Tecla arriba Desplaza las listas hacia arriba Entra en el menú de configuración


2.4.3 Descripción de la interfaz

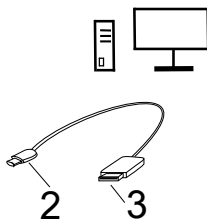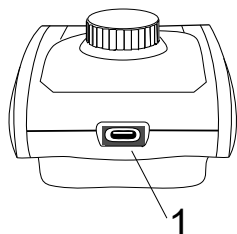1. Puerto USB-C para transferencia de datos, actualizaciones e importación de métodos mediante software de PC.



1. Puerto USB-C (resistente al agua)
2. USB-C
3. USB-A

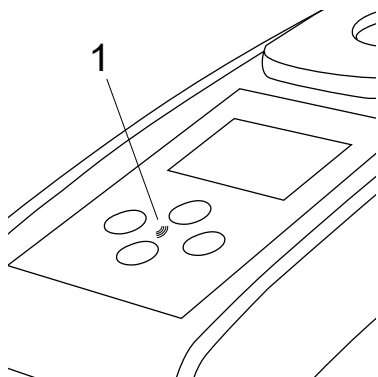2. NFC para la transferencia inalámbrica de datos a dispositivos inteligentes a través de App.



1. Campo NFC

3 Puesta en funcionamiento

3.1 Condiciones de funcionamiento

El instrumento puede utilizarse en cualquier entorno interior o exterior que se considere seguro para que el operador realice el análisis. no obstante, se recomienda no utilizar el instrumento a plena luz del sol para evitar errores causados por la luz parásita. Este entorno incluye un rango de temperatura de 5 a 40 grados C con una humedad sin condensación de hasta el 90%. Las grandes diferencias de temperatura entre el instrumento y el entorno pueden provocar errores, por ejemplo, debido a la formación de condensación en la zona de la lente o en la cubeta.

ES

3.2 Contenido de la entrega

Instrumento

2 pilas (AA)

3 cubetas de muestra 24 mm Ø

3 Varillas agitadoras de plástico 10 cm

Cepillo de limpieza 11 cm

Destornillador

Jeringa 10 mL

Cable USB

Instrucciones

Manual de Métodos (Código QR)

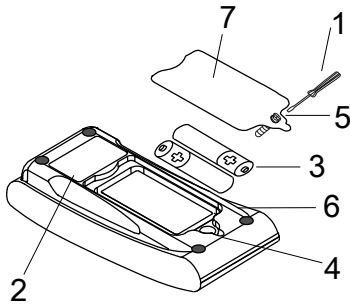
Certificado de conformidad

Folleto de la garantía

Estuche con inserción

Reactivos para método

3.3 Colocación y sustitución de las pilas



- 1 - Destornillador
- 2 - Parte posterior del instrumento
- 3 - Baterías
- 4 - Muesca
- 5 - Tornillo
- 6 - Junta de sellado
- 7 - Tapa de baterías

1. Conecte el instrumento.
2. Si es necesario, retire la cubeta de la cámara de muestras.
3. Coloque el instrumento boca abajo sobre una superficie limpia y plana.
4. Desenrosque los tornillos (5) de la tapa del compartimento de las pilas (7).
5. Levante la tapa del compartimento de las pilas (7) por la muesca (4).
6. Retire las baterías viejas (3).
7. Coloque 2 baterías nuevas. ¡Asegurar la polaridad correcta!
8. Cierre la tapa del compartimento de las pilas (7). Compruebe la junta de sellado (6) de la muesca para asegurarse de que está bien apretado.
9. Apriete los tornillos (5) con cuidado.



¡Precaución!

Para garantizar la estanqueidad del instrumento:

- la junta de sellado debe estar en posición
- la tapa del compartimento de las pilas debe estar cerrada con todos los tornillos



¡Precaución!

Deseche las baterías usadas de acuerdo con todas las regulaciones federales, estatales y locales.

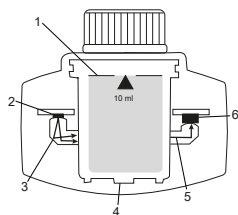
4 Operación

4.1 Primera puesta en marcha

- Coloque las pilas como se describe en el capítulo 3.3.
- Encienda el instrumento pulsando la tecla abajo.
- En primer lugar se muestra el logotipo de la empresa en el aparato.
- La versión de firmware del instrumento se mostrará en pantalla durante unos instantes.
- Ajuste la fecha y la hora siguiendo el procedimiento descrito en 4.3.1.
- Elija el tipo de reactivo para visualizar sólo los métodos que desee. Para más detalles, siga el procedimiento descrito en 4.3.1.
- Por último, se muestra una lista de métodos, que es la pantalla de inicio de la unidad.

Nota: La retroiluminación del instrumento se encenderá por defecto, para apagar la retroiluminación, por favor pulse la tecla Back durante 3 segundos.

4.2 Principios generales de funcionamiento









1. Cubeta de muestra
2. Fuente de luz
3. Guía de luz
4. Cámara de muestras
5. Haz luminoso
6. Sensor espectrométrico + detector



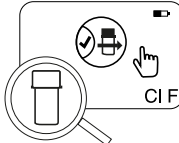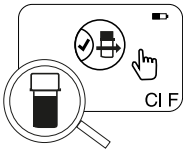El fotómetro dispone de métodos preprogramados derivados de procedimientos analíticos estándar. Para garantizar un análisis simplificado y sin errores, en estos métodos se programan las curvas de calibración necesarias con reactivos, tiempos de reacción y secuencias. La configuración óptica del fotómetro consta de una fuente de luz, filtros de interferencia (variantes específicas) y un sensor espectrométrico. Los fotómetros Lovibond utilizan LED como fuente de luz, que son muy eficientes desde el punto de vista energético y tienen una vida útil tan larga como la del propio fotómetro. El sensor espectrométrico de alta calidad se utiliza para recoger y medir la cantidad de luz transmitida a través de la muestra y la transfiere al microprocesador, que calcula digitalmente la concentración y muestra los resultados en las unidades respectivas.

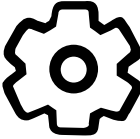

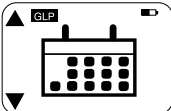
4.3 Lista de elementos de control y su función

4.3.1 Lista de elementos de control y su función

Función	Descripción	Cómo ejecutar la función
	Encender/Apagar el instrumento	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla abajo para encender el Instrumento. • Mantenga pulsada la tecla abajo para apagar el instrumento.
	Luz de fondo	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenga pulsada la tecla de retroiluminación durante 3 segundos para encender o apagar la retroiluminación.
	Modo de medición	<ul style="list-style-type: none"> • En la pantalla aparecerá el último método utilizado. • Navegue por la lista de métodos y seleccione el método deseado. • Pulse la tecla Test para seleccionar el método.
	Volver a la vista anterior	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior.
	Realizar Zero	<ul style="list-style-type: none"> • Llene el vial de 24 mm con 10 ml de muestra, o utilice un vial de 16 mm de blanco de reactivo cuando sea necesario. • Nota: Cada método tiene diferentes requisitos de blanco, por favor siga el procedimiento de los métodos para blanquear correctamente el instrumento. Descargue la descripción del método escaneando el código QR de la última página. • Cerrar la cubeta. • Colocar la cubeta de prueba en el compartimento de medición. Preste atención a la posición. • Pulse la tecla Test para realizar el blanco. • En caso de cuenta atrás, la medición tendrá lugar

Función	Descripción	Cómo ejecutar la función
		<p>automáticamente una vez finalizada la cuenta atrás.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La cuenta atrás puede saltarse pulsando de nuevo el botón de prueba, pero se recomienda encarecidamente seguir el procedimiento. • Después de la medición, el símbolo de la cubeta vacía cambia a una cubeta llena (parte inferior izquierda de la pantalla). <p>Nota: Puede desactivar los temporizadores para todos los métodos desde los ajustes.</p> <p>Atención: No se puede garantizar la precisión de las pruebas si no se siguen los procedimientos del método.</p>
	<p>Realizar la prueba</p>	<p>Prepare el vial de muestra siguiendo el procedimiento descrito en la descripción del método. Descargue la descripción del método escaneando el código QR de la última página.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla Test para realizar la prueba. • Algunos métodos tienen temporizadores integrados antes o después de pulsar la tecla Test. El instrumento realizará la medición una vez finalizada la cuenta atrás. • El usuario puede saltarse la cuenta atrás pulsando de nuevo la tecla Test, aunque se recomienda encarecidamente seguir el procedimiento del método. <p>Nota: Puede desactivar los temporizadores para todos los métodos desde los ajustes.</p> <p>Atención: No se puede garantizar la precisión de las pruebas si no se siguen los procedimientos del método.</p>
<p>$\text{Cl}_2 \text{ F} + \text{Cl}_2 \text{ T} =$ mg/L $\text{Cl}_2 \text{ comb}$</p>	<p>Métodos concatenados</p>	<p>Algunos métodos están vinculados entre sí para calcular la concentración de parámetros específicos.</p> <p>En este caso, el resultado del primer método parcial no se visualiza y el</p>

Función	Descripción	Cómo ejecutar la función
mg/L Cl ₂ F ⇌ mg/L Br ₂	Cambiar la forma de citación	<p>aparato continúa con el segundo método parcial.</p> <p>Una vez finalizado el procedimiento, pulse el tecla abajo o arriba para cambiar entre el resultado final calculado y el resultado del método parcial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El resultado se muestra en forma de cita por defecto. • Pulse el tecla arriba o abajo para cambiar la forma de citación. • La nueva forma de citación elegida es guardada por el instrumento como predeterminada y mostrará los resultados en esta forma de citación a menos que se restablezca a la predeterminada.
	Calibración de usuario	<ul style="list-style-type: none"> • Para la calibración del usuario, seleccione una prueba con un patrón de concentración conocida en lugar de una muestra de agua y llévela a cabo. • Mantenga pulsada la tecla Test durante 3 segundos cuando se muestren los resultados. • El instrumento pasa al modo de calibración. • Pulse la tecla Arriba o Abajo para aumentar o disminuir el valor visualizado hasta que coincida con el valor objetivo. • Pulse la tecla Test para aceptar el valor ajustado. Puede cancelar la calibración en cualquier momento pulsando la tecla trasera. • Se creará una entrada de registro con el número de método. "Calib" y factor de calibración con fecha y hora.
	Medición de la absorbancia	<p>La medición de la absorbancia seguirá el mismo procedimiento que los métodos de concentración. Desplácese por la lista de métodos para seleccionar el método de absorbancia. Los métodos de absorbancia para cada longitud de onda disponible se mostrarán en la lista.</p>

Función	Descripción	Cómo ejecutar la función
	Menú de configuración	<ul style="list-style-type: none"> • En el menú principal, mantenga pulsada la tecla arriba durante 3 segundos para acceder al menú de configuración. • Desplácese hacia arriba y hacia abajo para ver las diferentes opciones de configuración.
	Menú registros	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando aparezca el símbolo, pulse la tecla Test para acceder a los registros. • El instrumento muestra una lista de todos los resultados/protocolos guardados. • Pulse la tecla Arriba o Abajo para desplazarse por los resultados de la lista. • Todos los resultados y protocolos están preseleccionados por defecto para la transferencia. • Pulse la tecla Test para seleccionar/deseleccionar resultados individuales. • Mantenga pulsada la tecla Test durante 3 segundos para seleccionar/deseleccionar todos los resultados. • Mantenga pulsada la tecla Arriba durante 3 segundos para transferir resultados a través de NFC. • Pulsa la tecla Atrás para volver al menú anterior.
	Ajuste de la fecha	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla Test para abrir el menú de ajuste de fechas. • Pulse Arriba o Abajo la tecla para cambiar de formato. • Pulse la tecla Test para confirmar el formato. • Pulse Arriba o Abajo la tecla para ajustar la fecha. • Cuando la flecha esté en el último dígito, pulse la tecla Test para confirmar o pulse la tecla Atrás para volver a la posición anterior. La fecha está ajustada y el instrumento vuelve al menú de configuración.

Función

Descripción

Cómo ejecutar la función



Ajuste de la hora

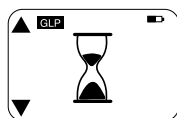
- Se creará una entrada de protocolo en los registros para el cambio de fecha..
- Pulse la tecla Test para abrir el menú de ajuste de la hora.
- Pulse el botón Abajo o Arriba para disminuir o aumentar el valor.
- Cuando la flecha esté en la última posición, pulse el botón Test para confirmar o pulse el botón Atrás para retroceder o cancelar el ajuste.
- Se creará una entrada de protocolo en los registros para el cambio de hora.





One Time Zero

- Algunos métodos ofrecen un One Time Zero para que el proceso de medición sea más eficiente.
- Pulse el botón abajo o el botón arriba para seleccionar OTZ en el menú de ajustes.
 - Pulse la tecla Test para activar o desactivar OTZ.
 - Realice el cero como se describe en el método, el instrumento guarda este cero y lo utiliza para las siguientes mediciones a menos que se apague el instrumento o se realice un nuevo cero.
 - Aparecerá un icono OTZ en la pantalla durante la medición y se protocolizará en los registros como una entrada independiente.

Nota: Siempre puede sobrescribir el OTZ pulsando la tecla Atrás y realizando un nuevo cero.

Temporizadores on/
off

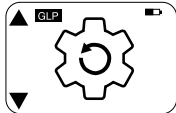- Pulse la tecla Arriba o Abajo para desplazarse hasta el icono Temporizadores del menú de configuración.
- Puede desactivar los temporizadores integrados para todos los métodos a través de este ajuste.
- Pulse el botón de prueba para activar/desactivar el temporizador.

Función	Descripción	Cómo ejecutar la función
	Reinicio de fábrica	<ul style="list-style-type: none"> • Para ello se crea una entrada con la marca de tiempo en los registros. <p>Atención: Se recomienda seguir los temporizadores integrados en los procedimientos de los métodos para obtener resultados precisos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón Abajo o Arriba para navegar hasta el menú Ajustes de fábrica. • Pulse la tecla Test para seleccionar los ajustes de fábrica. • Pulse de nuevo el botón Test para confirmar el proceso o pulse el botón Atrás para cancelar el restablecimiento. • Se crea una entrada con una marca de tiempo en los registros. <p>Nota: Un reinicio borra los métodos de usuario, la calibración de usuario y todos los resultados guardados.</p> <p>Atención: Transfiera todos los resultados antes de restablecer el instrumento.</p>
	Seleccionar tipo de reactivo	<p>La selección del tipo de reactivo permite mostrar sólo los métodos seleccionados en el menú Inicio y ocultar los métodos de otros tipos de reactivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón abajo o arriba para navegar hasta el menú de selección del tipo de reactivo. • Pulse el botón Test para acceder al menú. • Pulse el botón Abajo o Arriba para navegar a otras opciones o pulse el botón Test para seleccionar el tipo de reactivo deseado.

4.5 Transferencia de datos

Puede transferir todos los datos o los seleccionados a la aplicación o al software para PC.

Seleccione el icono de registro en el menú de ajustes para ver los resultados guardados.

El MD 50 ofrece dos opciones para transferir datos:

1. Transferencia de datos mediante cable USB
2. Transferencia de datos a través de NFC

4.5.1 Transferencia de datos por USB

- La transferencia de datos mediante cable USB requiere el Lovibond® Data Expert software, que puede descargarse gratuitamente de la página web de Lovibond.
- Instale el software en su PC y siga las instrucciones del software sobre cómo transferir datos.
- Una vez conectado, el instrumento mostrará el símbolo USB en la barra de estado.
- Vaya al menú Registros tal y como se describe en el capítulo 4.3.1 y seleccione resultados específicos o todos los resultados para transferirlos vía USB.

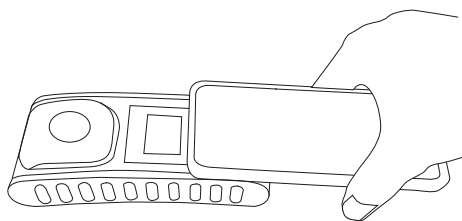
Nota: No se requerirá ninguna acción en el fotómetro para iniciar el proceso de transferencia de datos.

4.5.2 Transferencia de datos a través de NFC

- Para transferir resultados de medición a través de NFC, vaya al menú Registros tal y como se describe en el capítulo 4.3.1 y seleccione resultados específicos o todos los resultados para transferirlos vía NFC.
- Mantenga pulsada la tecla ARRIBA para guardar los resultados en la etiqueta NFC.
- Abra la aplicación AquaLX y acerque el smartphone al instrumento para transferir los resultados (como se muestra en la imagen).
- Pulse el tecla Atrás para volver al menú de configuración.

Nota: Cuando vuelva al menú de configuración, se borrarán todos los datos de la etiqueta NFC.

- Asegúrese de que NFC está activado en el dispositivo inteligente.



5 Mantenimiento

5.1 Programa de mantenimiento recomendado






Tarea	Qué hacer	Qué no se debe hacer
Limpiar el instrumento y la cámara de medición	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie la cámara de medición con paños húmedos que no suelten pelusa (sin aceite) o bastoncillos de algodón. 2. Si la superficie de la carcasa está sucia, límpiela con un paño suave y agua jabonosa suave. 3. Elimine las salpicaduras de productos químicos lo antes posible. 4. Para la desinfección, puede utilizar isopropanol para limpiar durante un breve periodo de tiempo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No utilice una cubeta que no esté herméticamente cerrada. 2. No utilice productos de limpieza que contengan disolventes. 3. No pulverice ni vierta productos químicos directamente en la cámara de muestras.
Limpiar los accesorios	<ol style="list-style-type: none"> 1. Los cubetas, tapones y varillas agitadoras deben limpiarse a fondo después de cada análisis para evitar interferencias. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No utilice una cubeta con defectos visibles, por ejemplo, desperfectos, arañazos o grietas. 2. No utilice cubetas que no estén completamente secas en su exterior.
Sustitución de las pilas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retire las pilas cuando guarde el instrumento durante un largo período de tiempo para evitar fugas. 2. Utilice siempre pilas no recargables. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No utilice tipos de pilas no especificados.
Almacenamiento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Almacene el instrumento y los accesorios en las condiciones ambientales especificadas. 	

**¡Atención!**

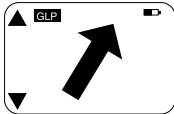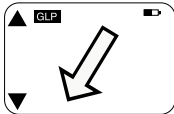La manipulación incorrecta de ciertos reactivos puede dañar su salud. En cualquier caso, siga la información de las etiquetas de seguridad del envase, las instrucciones de seguridad del prospecto y la hoja de datos de seguridad disponible. Las medidas de protección allí especificadas deben seguirse con exactitud.

6 Resolución de problemas

6.1 Mensajes de error y qué hacer

Visualización	Posible motivo	Qué hay que hacer
	<p>Sobre rango - La lectura está sobrepasando el rango.</p> <p>La muestra de agua está demasiado turbia.</p>	<p>Diluir la muestra.</p> <p>Filtre la muestra de agua.</p>
	<p>Demasiada luz en el detector.</p> <p>Por debajo del rango - La lectura está por debajo del límite de detección del método.</p>	<p>Compruebe el sellado del tapón de la cubeta.</p> <p>Asegúrese de que la dosificación de los reactivos y los tiempos de reacción se han realizado de acuerdo con las instrucciones del método. Compruebe que la muestra tiene una concentración suficientemente alta del parámetro que se va a medir.</p>
	<p>Luz insuficiente en el detector.</p>	<p>Limpie la cámara de medición para eliminar cualquier partícula de polvo que bloquee la luz.</p>
	<p>Error de cálculo.</p>	
<p>Instrumento apagado inmediatamente</p>	<p>Batería baja</p> 	<p>Sustituya las pilas.</p>

7 Accesorios y piezas de repuesto

7.1 Lista de accesorios

Anillo de obturación para cubeta redonda 24 mm, juego de 12	197626
Cable USB-C de 1 m, USB-C a A	19820-081
Cepillo, 11 cm longitud	380230
Certificado de calibración de fábrica ISO 9001 para el MD50	999756
Certificado de calibración de fábrica ISO 9001 para el método CI M100 (MD50)	999720
Certificado de calibración de fábrica ISO 9001 para el método CI M110 (MD50)	999721
Cilindro de mezcla con tapón, accesorio necesario para la determinación de molibdeno LR con MD 100 (276140)	19802650
Cubeta redonda con tapa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, juego de 5	197629
Cubeta redonda con tapa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, juego de 12	197620
Dispositivo de toma de muestras con frasco de 250 mL y tapa, AF 631	170500
Embudo de plástico con asa	471007
Frasco de 250 mL, AF 631	375072
Kit de estándares de referencia cloro 0,2 y 1,0 mg/l (MD50)	275620
Kit de estándares de referencia cloro 0,5 y 2,0 mg/l (MD50)	275621
Kit de estándares de referencia cloro 1,0 y 4,0 mg/l (MD50)	275622
Kit de estándares de verificación MD50	215700
Paño de limpieza	197635
Paquete de servicios a precio fijo para MD50	19802710
Plan de mantenimiento - 3 años para MD50	19802810
Soporte para cubetas para 6 cubetas redondas Ø 24 mm	418951
Varilla agitadora de plástico, 10 cm longitud	364109
Varilla agitadora de plástico, 10 cm longitud, juego de 10	364130
Varilla agitadora de plástico, 13 cm longitud	364100
Varilla agitadora de plástico, 13 cm longitud, juego de 10	364120
Vaso medidor, 100 ml	384801

8 Especificaciones

Óptica	LED, sensor espectrómetro, filtro de interferencias (sólo variantes seleccionadas)
Fuente luminosa	LED
Longitud de onda	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Rango fotométrico	0 - 3 Abs
Precisión fotométrica	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
Cubetas adecuadas	<ul style="list-style-type: none"> • Cubetas redondas 13 mm • Cubetas redondas 16 mm • Cubetas redondas 24 mm
Display	LCD con retroiluminación
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
Formato transmisión de datos	.csv
Manejo	Teclado de membrana
Auto – OFF	Sí
Programabilidad	sí con software para PC
Calibración	Ajuste de fábrica y por el usuario - posibilidad de volver al ajuste de fábrica en cualquier momento
Actualizaciones	Actualización de firmware y métodos
Almacenamiento interno	Memoria anular interna para 100 registros de datos
Vida de la batería	aprox. 5000 mediciones (sin retroiluminación)
Portabilidad	Portable
Grado de contaminación	2
Altitud máxima sobre el nivel del mar	3500
Condiciones ambientales	5 - 50 °C a una humedad relativa del 30 - 95 % (sin condensación)
Clase de protección	IP 67
Conformidad	CE

Idiomas Manual de usuario completo	<ul style="list-style-type: none">• Alemán• Chino• Español• Francés• Holandés• Inglés• Italiano• Portugués• Ruso• Turco
------------------------------------	--

Medidas	155 x 76 x 45 mm
---------	------------------

Peso	247 g
------	-------

**¡Precaución!**

Sujeto a modificaciones técnicas.
Para garantizar la máxima precisión de los resultados de las pruebas, utilice siempre los sistemas de reactivos suministrados por el fabricante del instrumento.

9 Apéndice

9.1 Aviso de derechos de autor y marcas comerciales

IOS® es una marca registrada de Cisco Systems, Inc. y es usado por Apple, Inc. bajo licencia.

iTunes Store® es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.

Android™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google, Inc.

Excel® es una marca comercial de Microsoft Corp., registrada en los Estados Unidos y otros países.

ES

Table des matières

Photometer Series

1 Introduction	80
1.1 Informations générales	80
1.1.1 Lire les instructions avant l'utilisation	80
1.1.2 Objet du produit	80
1.1.3 Utilisation autorisée	80
1.1.4 Exigences pour une utilisation sûre	80
1.1.5 Gardez les instructions	81
1.1.6 Qualification des utilisateurs	81
1.1.7 Manipulation de produits chimiques dangereux	81
1.1.8 Instructions pour la disposition du produit	81
1.2 Liste de tous les caractères utilisés dans le document	81
2 Aperçu du produit	83
2.1 Guide des symboles	83
2.3 Fonctionnalités	83
2.4 Description du produit	83
2.4.1 Vue des instruments	84
2.4.2 Description des touches et des interrupteurs	84
2.4.3 Description de l'interface	85
3 Mise en service	86
3.1 Environnement opérationnel	86
3.2 Contenu de la livraison	86
3.3 Insertion et remplacement des piles	87
4 Opération	88
4.1 Premier démarrage	88
4.2 Principes généraux de fonctionnement	88
4.3 Liste des éléments de contrôle et leur fonction	89
4.3.1 Liste des éléments de contrôle et leur fonction	89
4.5 Transfert de données	95
4.5.1 Transfert de données via USB	95
4.5.2 Transfert de données via NFC	96
5 Maintenance	97
5.1 Programme d'entretien recommandé	97
6 Dépannage	99
6.1 Messages d'erreur et mesures à prendre	99
7 Accessoires et pièces de rechange	100
7.1 Liste des accessoires	100
8 Spécifications	101

9 Appendice	103
9.1 Avis sur les droits d'auteur et les marques de commerce	103

1 Introduction

1.1 Informations générales

1.1.1 Lire les instructions avant l'utilisation

Ce manuel fournit des informations importantes sur un fonctionnement adéquat du produit en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce manuel et vous familiariser avec le produit avant de l'utiliser.

FR

1.1.2 Objet du produit

Les photomètres Lovibond sont conçus pour mesurer différents paramètres dans des échantillons aqueux dans une variété d'applications telles que l'eau potable, les eaux usées, l'eau de traitement industriel, l'eau de piscine et la recherche scientifique. Les photomètres Lovibond peuvent être utilisés en laboratoire comme instruments de paillasse ou sur le terrain comme instruments portables. Pour la portabilité, les instruments sont livrés dans des malles de transport robustes avec les accessoires nécessaires.

Les performances des instruments peuvent être affectées par une exposition à une lumière et une température extrêmes. C'est pourquoi les instruments doivent toujours être utilisés dans les conditions environnementales recommandées.

1.1.3 Utilisation autorisée

La responsabilité et la garantie du fabricant pour les dommages sont annulées en cas d'utilisation inappropriée, de non-respect de ce manuel, d'utilisation par du personnel non qualifié ou de modifications non autorisées du produit.

Le fabricant n'est pas responsable des coûts ou des dommages causés par l'utilisateur ou des tiers en raison de l'utilisation de ce produit, en particulier en cas d'utilisation inappropriée du produit ou de mauvaise utilisation, de défauts de connexion du produit. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.

1.1.4 Exigences pour une utilisation sûre

Notez les points suivants pour une utilisation sûre :

- Si l'appareil est utilisé d'une façon qui n'est pas spécifiée par le fabricant, la protection assurée par l'appareil peut être compromise.
- Le produit ne doit être utilisé que conformément à l'utilisation autorisée spécifiée ci-dessus.
- Le produit ne doit être alimenté qu'uniquement par les sources d'alimentation mentionnées dans ce manuel d'utilisation.
- Le produit ne doit être utilisé que dans les conditions environnementales mentionnées dans ce manuel d'utilisation.
- Le produit ne doit pas être ouvert ou modifié.

Le produit ne doit pas être utilisé si :

- il est visiblement endommagé (par exemple, après avoir été transporté)
- il a été stocké dans des conditions défavorables pendant une longue période (conditions de stockage, voir chapitre "Spécifications")

1.1.5 Gardez les instructions

Le manuel doit être conservé à proximité du produit afin que vous puissiez toujours trouver les informations dont vous avez besoin.

1.1.6 Qualification des utilisateurs

Le personnel d'exploitation doit être capable de comprendre et d'appliquer correctement les étiquettes et les consignes de sécurité figurant sur les emballages et les notices des produits.

L'utilisateur doit être capable, apte à lire et comprendre ce manuel afin de se familiariser avec la manipulation et d'assurer une utilisation sûre.

1.1.7 Manipulation de produits chimiques dangereux

Des risques chimiques et/ou biologiques peuvent exister là où ce produit est utilisé. Respectez toutes les lois, réglementations et protocoles en vigueur lors de l'utilisation de ce produit.

Pour le développement de ses produits, Lovibond accorde une attention particulière à la sécurité. Certains risques liés à des substances dangereuses ne peuvent être évités. En cas d'utilisation de tests ou de solutions produits par l'entreprise elle-même, la responsabilité de tout risque causé par ces tests ou solutions incombe à l'utilisateur (responsabilité personnelle).

1.1.8 Instructions pour la disposition du produit

Mettez les batteries et l'équipement électrique au rebut dans une installation appropriée, conformément à la législation locale.

Il est illégal de jeter les piles avec les déchets ménagers.

Au sein de l'Union européenne, à la fin de la vie de l'appareil, les piles sont éliminées dans un point de collecte de recyclage spécialisé.



Les instruments marqués de ce symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques normaux.

1.2 Liste de tous les caractères utilisés dans le document

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour indiquer les sections qui nécessitent une attention particulière :



Danger!

Il existe un danger qui entraînera la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité !

**Avertissement !**

La manipulation incorrecte de certains réactifs peut nuire à votre santé. Dans tous les cas, suivez les informations figurant sur les étiquettes de sécurité de l'emballage, les consignes de sécurité de la notice et la fiche de données de sécurité disponible. Les mesures de protection qui y sont spécifiées doivent être suivies à la lettre.

**Attention!**

Il existe un danger qui peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

**Remarque !**

Des informations importantes ou des instructions spéciales doivent être respectées.

2 Aperçu du produit

2.1 Guide des symboles

Les étiquettes apposées sur le produit doivent être strictement respectées pour éviter toute blessure ou tout dommage au produit. Reportez-vous à ce chapitre pour obtenir des informations sur la nature du danger ou du risque avant d'entreprendre toute action en présence d'une telle étiquette.



Pour les utilisateurs professionnels de l'Union européenne :

Si vous souhaitez mettre au rebut des équipements électriques et électroniques (EEE), veuillez contacter votre revendeur ou votre fournisseur pour plus d'informations.

Pour la mise au rebut dans les pays hors de l'Union européenne :

Ce symbole est uniquement valable dans l'Union européenne (UE). Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur et demander la méthode d'élimination appropriée.

FR

2.3 Fonctionnalités

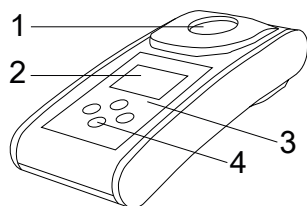
Les photomètres Lovibond MD50 et MD150 offrent un haut niveau de précision et d'efficacité avec une interface conviviale.

- Conception robuste, étanche à l'eau et à la poussière
- Système optique innovant pour une plus grande précision
- Rétro-éclairage multicolore
- Il peut être mis à jour pour inclure les méthodes les plus récentes.
- Interface utilisateur non linguistique avec des icônes et des symboles pour une utilisation globale.
- Capacité de mémoire jusqu'à 100 ensembles de données
- Transfert de données sans fil via NFC vers AquaLX App
- Transfert de données par câble USB vers un PC
- Logiciel PC pour importer une méthode utilisateur et mettre à jour l'instrument

2.4 Description du produit

Les MD50 et MD150 de Lovibond sont des séries de photomètres simples et multiparamètres conçus spécialement pour les clients qui souhaitent mesurer des paramètres spécifiques dans les applications d'eau de piscine, d'eau potable, d'eau industrielle ou d'eaux usées. Avec des LED stables de haute qualité et des guides de lumière montés pour obtenir une lumière suffisante sur le détecteur, les instruments offrent une grande précision dans les résultats de mesure et une efficacité opérationnelle. La conception compacte des MD50 et MD150 en fait des instruments portables parfaits sur le terrain. Les instruments Lovibond, avec l'aide des réactifs et des normes de test produits localement, fournissent une solution complète pour répondre aux exigences de l'industrie de l'analyse de l'eau.

2.4.1 Vue des instruments



Vue frontale

1 - Chambre de mesure.





2 - Afficher

3 - Numéro de modèle

4 - Bouton d'alimentation



FR

2.4.2 Description des touches et des interrupteurs

Touche	Fonction
	Touche bas Permet d'allumer ou d'éteindre l'instrument utilisée pour le défilement vers le bas
	Touche Test Mesure l'échantillon Sélection ou confirmation d'une action
	Touche Retour Revenir au menu précédent Allume ou éteint le rétroéclairage
	Touche haut Fait défiler les listes vers le haut Accéder au menu des réglages

2.4.3 Description de l'interface

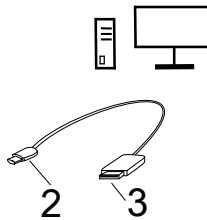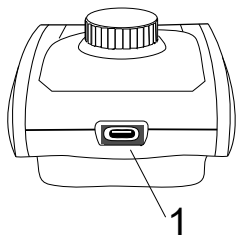
1. Port USB-C pour le transfert de données, les mises à jour et l'importation de méthodes via un logiciel PC.



1. Port USB-C (étanche)
2. USB-C
3. USB-A

FR

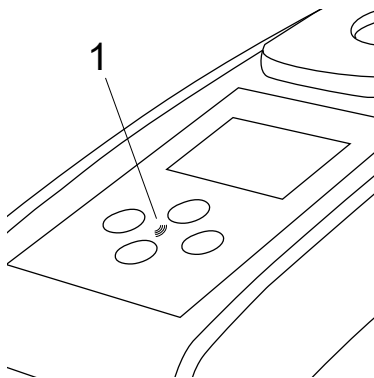2. NFC pour le transfert de données sans fil vers des appareils intelligents via l'application.



1. Champ NFC

3 Mise en service

3.1 Environnement opérationnel

L'instrument peut être utilisé dans n'importe quel environnement intérieur ou extérieur jugé sûr pour qu'un opérateur puisse effectuer l'analyse. Cependant, il est recommandé de ne pas utiliser l'instrument en plein soleil pour éviter les erreurs causées par la lumière parasite. Cet environnement comprend une plage de température de 5 à 40 degrés C avec une humidité sans condensation jusqu'à 90 %. De grandes différences de température entre l'instrument et l'environnement peuvent entraîner des erreurs - par exemple, en raison de la formation de condensation dans la zone de la lentille ou sur la cuvette.

FR

3.2 Contenu de la livraison

Instrument

2 piles (AA)

3 cuvettes d'échantillon 24 mm Ø

3 Tiges d'agitation en plastique 10 cm

Tournevis

Brosse 11 cm

Seringue de dosage 10 mL

Câble USB

Mode d'emploi

Méthods manuel (QR-Code)

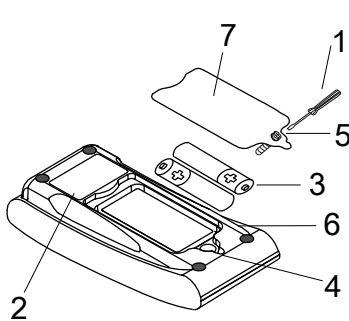
Déclaration de conformité

Déclaration de garantie

Coffret avec des inserts

Réactifs chaque méthode

3.3 Insertion et remplacement des piles



- 1 - Tournevis
- 2 - dos de l'instrument
- 3 - piles
- 4 - Encoche
- 5 - Vis
- 6 - Joint d'étanchéité
- 7 - Couverture compartiment à piles

FR

1. Mettre l'appareil à l'arrêt.
2. Le cas échéant, sortir la cuvette de la chambre de mesure.
3. Poser alors l'appareil sur une surface propre en orientant sa face frontale vers le bas.
4. Dévisser les une vis (5) à l'arrière de l'appareil et ouvrir le compartiment à piles(7).
5. Soulever le couvercle du compartiment à piles (7) au niveau de l'encoche (4) et le soulever.
6. Retirer les piles usagées (3).
7. Placer 2 nouvelles piles.
Respecter impérativement la polarité!
8. Fermez le couvercle du compartiment à piles (7).
Vérifiez que le joint d'étanchéité (6) de l'encoche est bien serré.
9. Poser les vis (A) et les serrer la main.



Attention!

Pour garantir l'étanchéité de l'instrument :

- l'anneau d'étanchéité doit être en place
- le couvercle du compartiment des piles doit être fixé avec toutes les vis.



Attention!

Mettez au rebut les piles usagées conformément à la réglementation en vigueur.

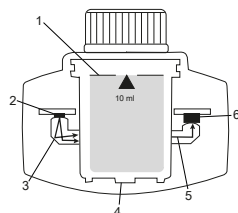
4 Opération

4.1 Premier démarrage

- Insérez les piles comme décrit au chapitre 3.3.
- Mettez l'instrument sous tension en appuyant sur la Touche bas.
- Le logo de l'entreprise s'affiche d'abord sur l'appareil.
- La version du micrologiciel de l'instrument s'affiche à l'écran pendant quelques instants.
- Régler la date et l'heure en suivant la procédure décrite au point 4.3.1.
- Choisir le type de réactif pour afficher uniquement les méthodes souhaitées. Pour plus de détails, veuillez suivre la procédure décrite au point 4.3.1.
- Enfin, une liste de méthodes s'affiche, représentant l'écran de démarrage de l'appareil.

Remarque : Le rétroéclairage de l'instrument s'allume par défaut. Pour éteindre le rétroéclairage, appuyez sur la touche Back pendant 3 secondes.

4.2 Principes généraux de fonctionnement



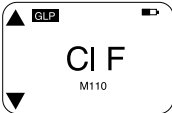

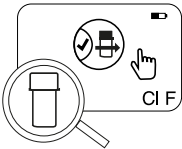



1. Cuvette avec échantillon
2. Source lumineuse
3. Guide de lumière
4. Chambre à échantillon
5. Faisceau lumineux
6. Capteur spectrométrique + détecteur


Le photomètre dispose de méthodes préprogrammées qui sont dérivées de procédures analytiques standard. Pour garantir une analyse simplifiée et sans erreur, les courbes d'étalonnage nécessaires avec les réactifs, les temps de réaction et les séquences sont tous programmés dans ces méthodes. Le montage optique du photomètre se compose d'une source lumineuse, de filtres d'interférence (variantes spécifiques) et d'un capteur spectrométrique. Les photomètres Lovibond utilisent des diodes électroluminescentes (DEL) comme source lumineuse, qui sont très efficaces sur le plan énergétique et ont une durée de vie aussi longue que celle du photomètre lui-même. Le capteur spectrométrique de haute qualité est utilisé pour collecter et mesurer la quantité de lumière transmise à travers l'échantillon et la transfère au microprocesseur qui calcule numériquement la concentration et affiche les résultats dans les unités respectives.




4.3 Liste des éléments de contrôle et leur fonction




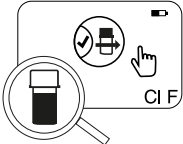4.3.1 Liste des éléments de contrôle et leur fonction



Fonction	Description de la fonction	Comment exécuter la fonction
	Mise sous tension/ hors tension de l'instrument	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche bas pour mettre l'instrument sous tension. Appuyez sur la touche bas et maintenez-la enfoncée pour éteindre l'instrument.
	Rétroéclairage	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche Back pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le rétroéclairage.
	Mode de mesure	<ul style="list-style-type: none"> La dernière méthode utilisée est affichée à l'écran. Naviguez dans la liste des méthodes et sélectionnez la méthode souhaitée. Appuyez sur la touche Test pour sélectionner la méthode.
	Retour à la vue précédente	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur la touche Retour pour revenir à l'écran précédent.
	Effectuer le zéro	<ul style="list-style-type: none"> Remplir la cuvette de 24 mm avec 10 ml d'échantillon, ou utiliser la cuvette de 16 mm pour le blanc de réactif si nécessaire. Note : Chaque méthode a des exigences différentes en matière de blanc, veuillez suivre la procédure des méthodes pour effectuer correctement le blanc de l'instrument. Veuillez télécharger la description de la méthode en scannant le code QR sur la dernière page. Fermer la cuvette. Placer la fiole à échantillon dans la chambre à échantillon. Attention au positionnement ! Appuyer sur la touche Test pour réaliser le blanc.


Fonction	Description de la fonction	Comment exécuter la fonction
		<ul style="list-style-type: none"> • En cas de compte à rebours, la mesure s'effectue automatiquement à la fin du compte à rebours. • Il est possible d'ignorer le compte à rebours en appuyant à nouveau sur le bouton test, mais il est fortement recommandé de suivre la procédure. • Après la mesure, le symbole de la cuvette vide passe à celui de la cuvette pleine (en bas à gauche de l'écran). <p>Remarque : vous pouvez désactiver les minuterics pour toutes les méthodes à partir des paramètres.</p> <p>Attention : La précision des tests ne peut être garantie si les procédures de la méthode ne sont pas respectées.</p>
	Effectuer le test	<p>Préparer la cuvette d'échantillon en suivant la procédure décrite dans la description de la méthode. Veuillez télécharger la description de la méthode en scannant le code QR sur la dernière page.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur la touche Test pour effectuer le test. • Certaines méthodes comportent des minuterics intégrées avant ou après avoir appuyé sur la touche Test. L'instrument effectue la mesure une fois le compte à rebours terminé. • L'utilisateur peut sauter le compte à rebours en appuyant à nouveau sur la touche Test, mais il est fortement recommandé de suivre la procédure de la méthode. <p>Remarque : vous pouvez désactiver les minuterics pour toutes les méthodes à partir des paramètres.</p> <p>Attention : La précision des tests ne peut être garantie si les procédures ne sont pas respectées.</p>
Cl ₂ F + Cl ₂ T = mg/L Cl ₂ comb	Méthodes concaténées	Certaines méthodes sont liées entre elles pour calculer la concentration de paramètres spécifiques.

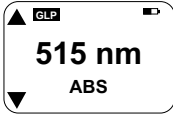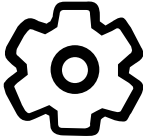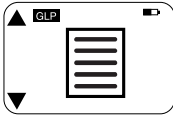Fonction	Description de la fonction	Comment exécuter la fonction
mg/L Cl ₂ F \rightleftharpoons mg/L Br ₂	Modifier le formulaire de citation	<p>Dans ce cas, le résultat de la première méthode partielle ne s'affiche pas et l'appareil passe à la deuxième méthode partielle. Lorsque l'exécution est terminée, appuyez sur la touche Bas ou Haut pour basculer entre le résultat final calculé et le résultat de la méthode partielle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le résultat est affiché sous la forme d'une citation par défaut. • Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour changer la forme de citation. • La nouvelle forme de citation choisie est enregistrée par l'instrument comme valeur par défaut et les résultats seront affichés dans cette forme de citation à moins que la valeur par défaut ne soit rétablie.
	Étalonnage de l'utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> • Pour l'étalonnage utilisateur, choisissez et effectuez un test avec un étalon de concentration connue au lieu d'un échantillon d'eau. • Maintenez la touche Test enfoncée pendant 3 secondes lorsque les résultats sont affichés. • L'appareil passe en mode d'étalonnage. • Utilisez les touches de déplacement vers le bas ou vers le haut pour diminuer ou augmenter la valeur affichée jusqu'à ce qu'elle corresponde à la valeur cible. • Appuyer sur la touche Test pour accepter la valeur ajustée. Vous pouvez annuler l'étalonnage à tout moment en appuyant sur la touche de retour. • Une entrée dans le journal sera créée avec le numéro de la méthode. "Calib" et le facteur d'étalonnage avec la date et l'heure.

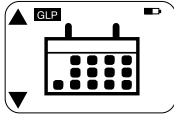Fonction	Description de la fonction	Comment exécuter la fonction
	Mesure de l'absorbance	La mesure de l'absorbance suit la même procédure que les méthodes de concentration. Faites défiler la liste des méthodes pour sélectionner la méthode d'absorption. Les méthodes d'absorbance pour chaque longueur d'onde disponible sont affichées dans la liste.
	Menu des réglage	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le menu d'accueil, appuyez sur la touche haut et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au menu des réglages. • Faites défiler vers le haut et vers le bas pour afficher les différentes options de réglage.
	Consulter les protocoles	<ul style="list-style-type: none"> • Lorsque le symbole s'affiche, appuyez sur la touche Test pour entrer dans les journaux. • L'appareil affiche la liste de tous les résultats/protocoles enregistrés. • Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour faire défiler les résultats dans la liste. • Tous les résultats et protocoles sont présélectionnés par défaut pour le transfert. • Appuyez sur la touche Test pour sélectionner/désélectionner les résultats individuels à transférer. • Appuyez sur la touche Test et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner/désélectionner. • Appuyez sur la touche Haut et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour transférer les résultats via NFC. • Appuyez sur la touche Retour pour revenir au menu précédent.

Fonction	Description de la fonction	Comment exécuter la fonction
	Réglage de la date	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche Test pour ouvrir le menu de réglage de la date. • Appuyez sur la touche Haut ou On / Off pour passer d'un format à l'autre. • Appuyez sur la touche Test pour confirmer le format. • Appuyez sur la touche Haut ou Marche/Arrêt pour régler la date. • Lorsque la flèche se trouve sur le dernier chiffre, appuyez sur la touche Test pour confirmer ou appuyez sur la touche Retour pour revenir à la position précédente. La date est réglée et l'appareil revient au menu des réglages. • Une entrée de protocole sera créée dans les journaux pour le changement de date.
	Réglage de l'heure	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche Test pour ouvrir le menu de réglage de l'heure. • Appuyez sur la touche Bas ou sur la touche Haut pour diminuer ou augmenter la valeur. • Lorsque la flèche se trouve sur la dernière position, appuyez sur la touche Test pour confirmer ou sur la touche Retour pour revenir en arrière ou annuler le réglage. • Une entrée de protocole sera créée dans les journaux pour le changement d'heure.
	One Time Zero	<p>Certaines méthodes proposent un zéro en un temps pour rendre le processus de mesure plus efficace.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche Bas ou Haut pour sélectionner OTZ dans le menu de configuration. • Appuyez sur la touche Test pour activer ou désactiver OTZ. • L'instrument enregistre ce zéro et l'utilise pour les mesures suivantes, à moins que l'instrument ne soit éteint ou qu'un nouveau zéro ne soit effectué.

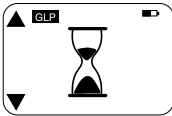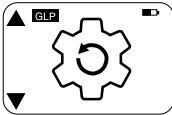Fonction	Description de la fonction	Comment exécuter la fonction
	Activation/désactivation des minuteries	<ul style="list-style-type: none"> • Une icône OTZ s'affiche à l'écran pendant la mesure et est consignée dans les journaux sous forme d'entrée distincte. <p>Remarque : il est toujours possible d'écraser OTZ en appuyant sur la touche retour et en effectuant un nouveau zéro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour faire défiler jusqu'à l'icône Minuterie dans le menu des réglages. • Ce paramètre permet de désactiver les minuterie intégrées pour toutes les méthodes. • Appuyez sur la touche Test pour activer/désactiver la minuterie. • Une entrée avec l'horodatage est créée dans les journaux à cet effet. <p>Attention : Il est recommandé de suivre les minuterie intégrées dans les procédures des méthodes pour obtenir des résultats précis.</p>
	Réinitialisation d'usine	<ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche Bas ou Haut pour naviguer jusqu'au menu Réglages d'usine. • Appuyez sur la touche Test pour sélectionner les paramètres d'usine. • Appuyez à nouveau sur la touche Test pour confirmer l'opération ou appuyez sur la touche Retour pour annuler la réinitialisation. • Une entrée horodatée est créée dans les journaux. <p>Remarque : Une réinitialisation efface les méthodes utilisateur, l'étalonnage utilisateur et tous les résultats enregistrés.</p>

Fonction	Description de la fonction	Comment exécuter la fonction
	Sélection du type de réactif	<p>Attention : Veuillez transférer tous les résultats avant de réinitialiser l'instrument.</p> <p>La sélection du type de réactif vous permet de n'afficher que les méthodes sélectionnées dans le menu d'accueil et de masquer les méthodes d'autres types de réactifs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyez sur la touche Bas ou Haut pour naviguer jusqu'au menu de sélection du type de réactif. • Appuyez sur la touche Test pour accéder au menu. • Appuyez sur la touche Bas ou Haut pour naviguer vers d'autres options ou appuyez sur la touche Test pour sélectionner le type de réactif souhaité.

FR

4.5 Transfert de données

Vous pouvez transférer toutes les données ou les données sélectionnées soit vers l'application, soit vers le logiciel PC.

Veuillez sélectionner l'icône de protocole dans le menu de configuration pour afficher les résultats enregistrés.

Le MD 50 offre deux options pour transférer les données :

1. Transfert de données via le câble USB
2. Transfert de données via NFC

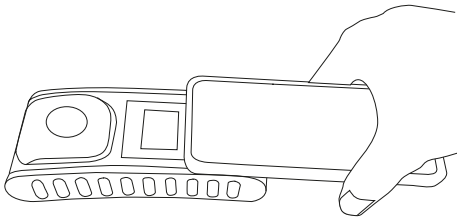
4.5.1 Transfert de données via USB

- Le transfert de données par câble USB nécessite le Lovibond® Data Expert logiciel qui peut être téléchargé gratuitement sur le site web de Lovibond.
- Veuillez installer le logiciel sur votre PC et suivre les instructions du logiciel sur la façon de transférer les données.
- Une fois connecté, l'instrument affichera le symbole USB sur la barre d'état.
- Aller dans le menu Logs comme décrit au chapitre 4.3.1 et sélectionner des résultats spécifiques ou tous les résultats à transférer via USB.

Note : Aucune action n'est requise sur le photomètre pour initier le processus de transfert de données.

4.5.2 Transfert de données via NFC

- Pour transférer des résultats de mesure via NFC, aller dans le menu Logs comme décrit au chapitre 4.3.1 et sélectionner des résultats spécifiques ou tous les résultats à transférer via NFC.
 - Appuyez sur la touche UP et maintenez-la enfoncée pour enregistrer les résultats dans la balise NFC.
 - Ouvrez l'application AqualX et approchez l'appareil intelligent de l'instrument pour transférer les résultats (comme indiqué sur l'image).
 - Appuyez sur la touche Retour pour revenir au menu de configuration.
- Remarque** : Si vous revenez au menu de configuration, toutes les données du tag NFC seront effacées.
- Assurez-vous que la fonction NFC est activée sur l'appareil intelligent.



5 Maintenance

5.1 Programme d'entretien recommandé







Tâche	Ce qu'il faut faire	Ce qu'il ne faut pas faire
Nettoyer l'instrument et la chambre de mesure	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nettoyez la chambre de mesure à l'aide de chiffons non pelucheux et humides (sans huile) ou de cotons-tiges. 2. Si la surface du boîtier est sale, essuyez-la avec un chiffon doux et de l'eau légèrement savonneuse. 3. Éliminez toute éclaboussure de produits chimiques dès que possible. 4. Pour la désinfection, vous pouvez utiliser de l'isopropanol pour un nettoyage de courte durée. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne pas utiliser de cuvette qui n'est pas fermée hermétiquement. 2. Ne pas utiliser de produits de nettoyage contenant des solvants. 3. Ne pas vaporiser ou verser de produits chimiques directement dans la chambre de mesure.
Nettoyer les accessoires	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les cuvettes, les bouchons et les barreaux d'agitation doivent être soigneusement nettoyés après chaque analyse afin d'éviter toute interférence. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne pas utiliser de cuvette présentant des défauts visibles, tels que des défauts, des rayures ou des fissures. 2. Ne pas utiliser de cuvette qui ne soit pas complètement sèche à l'extérieur.
Remplacement des piles	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirer les piles lorsque l'instrument est stocké pendant une période prolongée afin d'éviter les fuites de piles. 2. Utilisez toujours des piles non rechargeables. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ne pas utiliser de type de pile non spécifié.
Stockage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stocker l'instrument et les accessoires dans les conditions ambiantes spécifiées. 	

**Avertissement !**

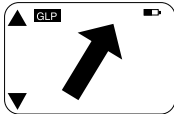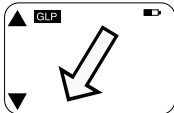La manipulation incorrecte de certains réactifs peut nuire à votre santé. Dans tous les cas, suivez les informations figurant sur les étiquettes de sécurité de l'emballage, les consignes de sécurité de la notice et la fiche de données de sécurité disponible. Les mesures de protection qui y sont spécifiées doivent être suivies à la lettre.

6 Dépannage

6.1 Messages d'erreur et mesures à prendre

Affichage	Origine possible	Que faire ?
	Dépassement de l'intervalle - La lecture dépasse l'intervalle. Turbidités dans l'échantillon.	Diluez l'échantillon. Filtrer l'échantillon.
	Trop de lumière sur le détecteur.	Vérifiez le joint du bouchon de la cuvette.
	En dessous de la plage - La lecture est inférieure à la limite de détection de la méthode.	Assurez-vous que le dosage des réactifs et les temps de réaction sont conformes aux instructions de la méthode. Contrôlez l'échantillon pour vous assurer qu'il présente une concentration suffisamment élevée du paramètre à mesurer.
	Lumière insuffisante sur le détecteur.	Nettoyez la chambre de mesure pour éliminer les éventuelles particules de poussière qui bloquent la lumière.
	Erreur de calcul.	
L'instrument s'éteint immédiatement	Pile faibley 	Remplacez les piles.

7 Accessoires et pièces de rechange

7.1 Liste des accessoires

Agitateur en plastique, longueur 10 cm	364109
Agitateur en plastique, longueur 10 cm, lot de 10	364130
Agitateur en plastique, longueur 13 cm	364100
Agitateur en plastique, longueur 13 cm, lot de 10	364120
Bécher gradué, 100 ml	384801
Brosse, longueur 11 cm	380230
Câble USB-C 1 m, USB-C vers A	19820-081
Certificat d'étalonnage ISO 9001 pour la MD50	999756
Certificat d'étalonnage ISO 9001 pour la méthode CI M100 (MD50)	999720
Certificat d'étalonnage ISO 9001 pour la méthode CI M110 (MD50)	999721
Chiffon de nettoyage	197635
Cuve ronde avec couvercle Ø 24 mm, hauteur 48 mm, 10 ml, lot de 5	197629
Cuve ronde avec couvercle Ø 24 mm, hauteur 48 mm, 10 ml, lot de 12	197620
Entonnoir en plastique avec anse	471007
Flacon de 250 mL, AF 631	375072
Forfait de services pour MD50	19802710
Joint pour cuves rondes 24 mm, lot de 12	197626
Kit d'étalons de référence Chlore 0,2 et 1,0 mg/l (MD50)	275620
Kit d'étalons de référence Chlore 0,5 et 2,0 mg/l (MD50)	275621
Kit d'étalons de référence Chlore 1,0 et 4,0 mg/l (MD50)	275622
Kit étalons de contrôle MD50	215700
Plan de service - 3 ans pour le MD50	19802810
Porte-cuves pour 6 cuves rondes Ø 24 mm	418951
Récipient collecteur d'échantillons pour flacon de 250 mL et couvercle, AF 631	170500
Tube gradué à bouchon, accessoires nécessaires à déterminer le molybdène LR avec MD 100 (276140)	19802650

8 Spécifications

Optique	LED, capteur spectrométrique, filtre interférentiel (variantes sélectionnées uniquement)
Source lumineuse	LED
Longueurs d'onde	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Plage photométrique	0 - 3 Abs
Précision photométrique	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
Flacons adaptés	<ul style="list-style-type: none"> • Cuvettes rondes 13 mm • Cuvettes rondes 16 mm • Cuvettes rondes 24 mm
Display	Écran LED éclairé
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
Format de transfert des données	.csv
Fonctionnement	Clavier à membrane
Auto – OFF	oui
Programmabilité	oui avec logiciel PC
Étalonnage	Ajustement de la fabrication et de l'utilisateur - retour à l'ajustement de la fabrication possible à tout moment
Mises à jour	Mise à jour du firmware et des méthodes
Stockage interne	mémoire circulaire interne pour 100 enregistrements
Durée de vie batterie	env. 5000 mesures (sans rétro-éclairage)
Portabilité	Portable
Degré de pollution	2
Altitude maximale au-dessus du niveau de la mer	3500
Conditions environnementales	5 - 50 °C avec une humidité relative de 30 - 95 % (sans condensation)

Classe de protection	IP 67
Conformité	CE
Langues Manuel d'utilisateur complet	<ul style="list-style-type: none">• Allemand• Anglais• Chinois• Espagnol• Français• Italien• Néerlandais• Portugais• Russe• Turc
Dimensions	155 x 76 x 45 mm
Poids	247 g

**Attention!**

Sous réserve de modifications techniques !
Pour garantir une précision maximale des résultats des tests, utilisez toujours les systèmes de réactifs fournis par le fabricant de l'instrument.

9 Appendice

9.1 Avis sur les droits d'auteur et les marques de commerce

iOS® est une marque enregistrée de Cisco, Inc. et est utilisée sous licence par Apple. iTunes Store® est une marques de commerce de Apple, Inc., enregistré aux États-Unis et autres pays.

Android et Google Play™ sont des marques enregistrée de Google

Excel® est une marques de commerce de Microsoft Corp., enregistré aux États-Unis et autres pays.

Índice

Photometer Series

1 Introdução	106
1.1 Informações gerais	106
1.1.1 Leia as instruções antes de usar	106
1.1.2 Finalidade do Produto	106
1.1.3 Uso autorizado	106
1.1.4 Requisitos para uma utilização segura	106
1.1.5 Manual de instruções	107
1.1.6 Qualificação do usuário	107
1.1.7 Manuseio de produtos químicos perigosos	107
1.1.8 Observações para o descarte	107
1.2 Lista de todos os símbolos utilizados no documento	107
2 Resumo do produto	109
2.1 Guia de símbolos	109
2.3 Características	109
2.4 Descrição do produto	109
2.4.1 Vista do instrumento	110
2.4.2 Descrição das teclas e interruptores	110
2.4.3 Descrição da interface	111
3 Comissionamento	112
3.1 Ambiente operacional	112
3.2 Conteúdo da entrega	112
3.3 Instalação ou Substituição das Pilhas/ Baterias	113
4 Operação	114
4.1 Comissionamento inicial	114
4.2 Princípios gerais de funcionamento	114
4.3 Elementos de controle	115
4.3.1 Lista de elementos de controle e suas funções	115
4.5 Transferência de dados	121
4.5.1 Transferência de dados via USB	121
4.5.2 Transferência de dados via NFC	121
5 Manutenção	123
5.1 Rotina de manutenção recomendada	123
6 Resolução de problemas	125
6.1 Mensagens de erro e o que fazer	125
7 Acessórios e peças de substituição	126
7.1 Lista de Acessórios	126
8 Especificações	127

9 Apêndice	129
9.1 Aviso de Direitos Autorais e Marca Registrada	129

1 Introdução

1.1 Informações gerais

1.1.1 Leia as instruções antes de usar

Este manual fornece informações importantes sobre o uso seguro do produto. Leia atentamente este manual e familiarize-se com o produto antes de utilizá-lo.

1.1.2 Finalidade do Produto

Os fotômetros Lovibond são concebidos para medir diferentes parâmetros em amostras aquosas numa variedade de aplicações tais como, por exemplo, água potável, águas residuais, água de processamento industrial, água de piscinas, ciência e pesquisa. Os fotômetros Lovibond são adequados para serem utilizados em ambientes de laboratório como bancada, bem como no campo como instrumento portátil. Para melhor portabilidade os instrumentos são entregues em maletas de transporte robustas com os acessórios necessários.

O desempenho dos instrumentos pode ser afetado pela exposição à luz e temperatura extremas, razão pela qual os instrumentos devem ser sempre utilizados nas condições ambientais recomendadas.

1.1.3 Uso autorizado

A responsabilidade e garantia do fabricante por danos é anulada com o uso inadequado, não cumprimento deste manual, utilização por pessoal não qualificado, ou alterações não autorizadas no produto.

O fabricante não é responsável por custos ou danos que possam surgir por parte do usuário ou de terceiros devido à utilização deste produto, especialmente em casos de uso indevido, mau uso ou falhas relacionadas ao produto.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por erros de impressão.

1.1.4 Requisitos para uma utilização segura

Note os seguintes pontos para uma utilização segura:

- Se o equipamento for utilizado de uma forma não especificada pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada.
- O produto só pode ser utilizado de acordo com a utilização autorizada especificada acima.
- O produto só pode ser utilizado com energia elétrica fornecida pelas fontes de energia mencionadas neste manual de instruções.
- O produto só pode ser utilizado sob as condições ambientais mencionadas neste manual de instruções.
- O produto não deve ser aberto ou modificado.

O produto não deve ser utilizado se:

- estiver visivelmente danificado (por exemplo, após ter sido transportado)
- foi armazenado em condições adversas durante um longo período de tempo (condições de armazenamento, ver capítulo "Especificações")

1.1.5 Manual de instruções

O manual deve ser mantido próximo do produto para que seja sempre possível encontrar a informação necessária.

1.1.6 Qualificação do usuário

O usuário deve ser capaz de compreender e implementar corretamente os rótulos de segurança e as instruções de segurança nas embalagens e folhetos dos produtos. O usuário deve ser capaz e hábil para ler e compreender este manual, a fim de familiarizar-se com o seu manuseio e de garantir uma utilização segura.

1.1.7 Manuseio de produtos químicos perigosos

Para o desenvolvimento de seus produtos, a Lovibond presta muita atenção à segurança. Porém, alguns perigos decorrentes de substâncias perigosas podem não ser evitáveis. Se forem utilizados testes ou soluções produzidas pelo usuário, a responsabilidade por quaisquer riscos causados por esses testes ou soluções recai sobre o usuário (responsabilidade pessoal).

1.1.8 Observações para o descarte

Eliminar baterias e equipamentos elétricos de forma adequada, de acordo com a legislação local.

É ilegal eliminar as pilhas juntamente com resíduos domésticos.

Dentro da União Europeia, no final da vida do dispositivo, as baterias são eliminadas num ponto especializado de coleta para reciclagem.



Os instrumentos marcados com este símbolo não devem ser eliminados nos resíduos domésticos normais.

1.2 Lista de todos os símbolos utilizados no documento

Os seguintes símbolos são utilizados neste manual para indicar as seções que requerem atenção especial:



Perigo!

Indica um perigo que poderá resultar em morte ou ferimentos graves se não for evitado!



Advertência.

O manuseio inadequado de certos reagentes pode prejudicar a sua saúde. Em qualquer caso, seguir as informações das etiquetas de segurança da embalagem, as instruções de segurança no manual da embalagem e a ficha de dados de segurança disponível. Deve-se seguir exatamente as medidas de proteção ali especificadas.



Cuidado!

Existe um perigo que poderá resultar em lesões menores ou moderadas.



Nota!

Devem ser observadas informações importantes ou instruções especiais.

2 Resumo do produto

2.1 Guia de símbolos

As etiquetas fixadas ao produto devem ser rigorosamente observados para evitar danos pessoais ou danos ao produto. Consultar este capítulo para informação sobre a natureza do perigo ou risco antes de tomar qualquer ação onde tal etiqueta esteja presente.



Para usuários profissionais na União Europeia:

Se desejar descartar esse equipamento eletroeletrônico (EEE), entre em contato com o seu revendedor ou fornecedor para mais informações.

Para descarte em países fora da União Europeia:

Este símbolo só é válido na União Europeia (UE). Se desejar descartar este produto em outra região, entre em contato com as autoridades locais, ou revendedor, e solicite o método correto de descarte.

PT

2.3 Características

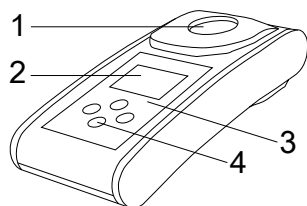
Os fotômetros Lovibond MD50 e MD150 proporcionam um elevado nível de precisão e eficiência com uma interface de fácil utilização.

- Desenho robusto, à prova de água e pó.
- Sistema óptico inovador para proporcionar maior precisão.
- Luz de fundo multicolorida.
- Atualizável para incluir os métodos mais recentes.
- IU não lingual com ícones e símbolos para uso global.
- Capacidade de memória até 100 conjuntos de dados.
- Transferência de dados sem fios via NFC para aplicação AquaLX.
- Transferência de dados com fios através de um cabo USB para o PC.
- Software para PC para importar um método de utilizador e actualizar o instrumento.

2.4 Descrição do produto

Os MD50 e MD150 da Lovibond são séries de fotômetros simples e multiparâmetros concebidos especialmente para clientes que pretendam medir parâmetros específicos em aplicações de água de piscinas, água potável, água industrial ou águas residuais. Com LEDs estáveis de alta qualidade e guias de luz montadas para conseguir um detector de luz suficiente, os instrumentos proporcionam uma alta precisão nos resultados de medição e eficiência operacional. O design compacto do MD50 e do MD150 torna-os instrumentos de mão perfeitos, ideais para o uso em campo. Os instrumentos Lovibond, com a ajuda de reagentes prontos para o uso e normas de teste, fornecem uma solução completa para satisfazer os requisitos da indústria de análises de água.

2.4.1 Vista do instrumento



Frontal

1 - Câmara de medição





2 - Tela

3 - Modelo

4 - Botão de ligar/desligar



PT

2.4.2 Descrição das teclas e interruptores

Chave	Função
	Tecla para baixo Liga ou desliga o instrumento Utilizada para deslocamento para baixo
	Tecla de teste Medir amostra Selecionar ou confirmar uma ação
	Tecla Voltar Volta ao menu anterior Liga ou desliga a retroiluminação
	Tecla para cima Percorrer as opções para cima Acessar o menu de definições

2.4.3 Descrição da interface

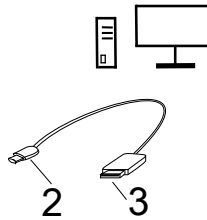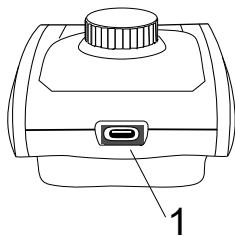
1. Porta USB-C para transferência de dados, atualizações e importação de métodos através de software para PC.



1. Porta USB-C (à prova de água)
2. USB-C
3. USB-A

PT

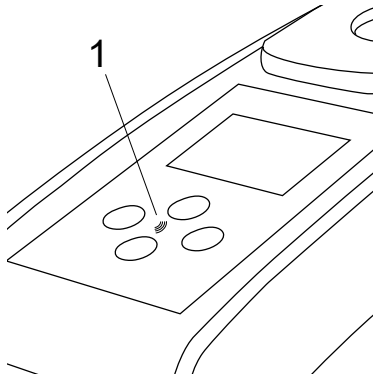2. NFC para transferência de dados sem fios para dispositivos inteligentes via App.



1. Campo NFC

3 Comissionamento

3.1 Ambiente operacional

O instrumento pode ser utilizado em qualquer ambiente interior ou exterior que seja considerado seguro para um operador efectuar a análise. no entanto, recomenda-se não utilizar o instrumento sob luz solar intensa para evitar erros causados por luz difusa. este ambiente inclui uma gama de temperaturas de 5 a 40 graus C com uma humidade sem condensação até 90%. Grandes diferenças de temperatura entre o instrumento e o ambiente podem levar a erros - por exemplo, devido à formação de condensação na área da lente ou na cuvette.

PT

3.2 Conteúdo da entrega

Instrumento

2 Pilhas (AA)

3 Cubetas de amostra 24 mm Ø

3 Varas de agitação, plástico 10 cm

Escova de limpeza 11 cm

Chave de fenda

Cabo USB

Seringa 10 mL

Manual de instruções

Métodos manual (Código QR)

Certificado de Conformidade

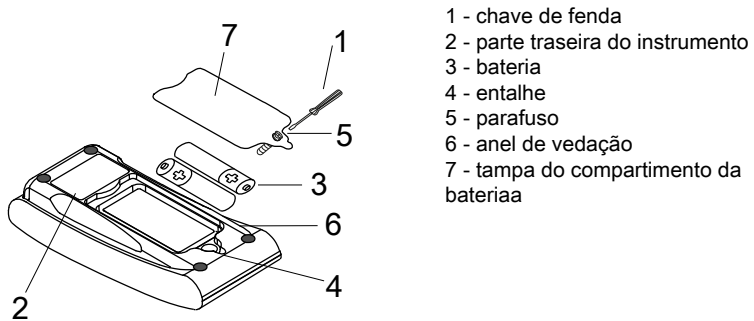
Informações de Garantia

Caixa de cartão

Maleta de transporte

Reagentes para método

3.3 Instalação ou Substituição das Pilhas/ Baterias



- 1 - chave de fenda
- 2 - parte traseira do instrumento
- 3 - bateria
- 4 - entalhe
- 5 - parafuso
- 6 - anel de vedação
- 7 - tampa do compartimento da bateria

PT

1. Desligue o instrumento.
2. Se necessário, retirar o frasco da câmara da amostra.
3. Colocar o instrumento de cabeça para baixo sobre uma superfície limpa e uniforme.
4. Desaparafusar os um parafuso (5) da tampa do compartimento da bateria (7).
5. Levantar a tampa do compartimento da bateria (7) pelo entalhe (4).
6. Remover as pilhas usadas (3).
7. Colocar 2 pilhas novas. Assegurar a polaridade correta!
8. Feche a tampa do compartimento das pilhas (7). Verificar o anel de vedação (6) do entalhe para verificar se está apertado.
9. Apertar os parafusos (5) com cuidado.

**Cuidado!**

Para garantir que o instrumento seja à prova de água:

- o anel de vedação deve estar presente
- a tampa do compartimento de pilhas deve ser fixada com todos os parafusos

**Cuidado!**

Eliminar baterias usadas em conformidade com todos os regulamentos federais, estaduais e locais.

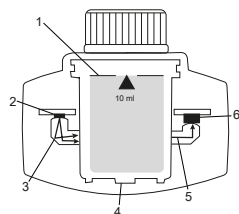
4 Operação

4.1 Comissionamento inicial

- Inserir as baterias como descrito no capítulo 3.3.
- Ligar o instrumento pressionando a tecla para baixo.
- O logotipo da empresa será exibido no instrumento.
- A versão de firmware do instrumento será apresentada na tela durante um curto intervalo de tempo.
- Definir a data e a hora seguindo o procedimento descrito em 4.3.1.
- Selecionar o tipo de reagente para apresentar apenas os métodos desejados. Para mais detalhes, siga o procedimento descrito em 4.3.1
- Finalmente, é mostrada uma lista de métodos, que é a tela inicial do instrumento.

Nota: A luz de fundo do instrumento liga-se por predefinição. Para desligar a luz de fundo, prima a tecla Back (Voltar) durante 3 segundos.

4.2 Princípios gerais de funcionamento



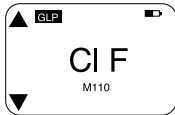

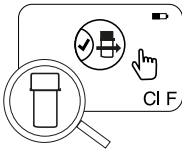



1. Cubeta de amostra
2. Fonte de luz
3. Guia de luz
4. Câmara de medição
5. Feixe de luz
6. Sensor fotométrico + detector


O fotômetro dispõe de métodos pré-programados, derivados de procedimentos analíticos padrão. Para garantir análises simplificadas e isentas de erros, as curvas de calibração necessárias para os reagentes, tempos de reação e sequências estão todas programadas nestes métodos. A configuração óptica do fotômetro é constituída por uma fonte de luz, filtros de interferência (variantes específicas) e um sensor fotométrico.. Os fotômetros Lovibond utilizam LEDs como fonte de luz, que são altamente eficientes do ponto de vista energético e têm uma longa vida útil, tão longa como a vida útil do próprio fotômetro. Um sensor fotométrico de alta qualidade é utilizado para recolher e medir a quantidade de luz transmitida através da amostra e transfere-a para o microprocessador, que calcula digitalmente a concentração e apresenta os resultados nas respectivas unidades.





4.3 Elementos de controlo



4.3.1 Lista de elementos de controle e suas funções

Função	Descrição	Como executar a função
	Ligar/desligar o instrumento	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar a tecla para baixo para ligar o instrumento. • Pressionar e manter pressionada a tecla para baixo para desligar o instrumento.
	Luz de fundo	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar e manter pressionada a tecla de retorno durante 3 segundos para ligar ou desligar a retro iluminação.
	Modo de medição	<ul style="list-style-type: none"> • O último método utilizado é apresentado na tela. • Navegue pela lista de métodos e seleccione o método desejado. • Pressione a tecla Teste para seleccionar o método.
	Voltar à vista anterior	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar a tecla Voltar para retornar à tela anterior.
	Ajustar o zero	<ul style="list-style-type: none"> • Encher a cubeta de 24 mm com 10 ml de amostra ou, se necessário, utilizar uma cubete de 16 mm para o branco do reagente. Nota: Cada método tem requisitos de branco diferentes; siga o procedimento do método para limpar corretamente o instrumento. Descarregue a descrição do método através da leitura do código QR na última página. • Fechar a cubeta. • Colocar a cubeta de amostra no compartimento de medição. Prestar atenção ao posicionamento! • Pressionar a tecla Test para limpar o instrumento.

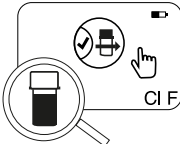Função	Descrição	Como executar a função
		<ul style="list-style-type: none"> • No caso de contagens decrescentes, a medição é realizada automaticamente após o fim da contagem decrescente. • A contagem decrescente pode ser ignorada ao pressionar novamente o botão de teste, mas recomenda-se enfaticamente que o procedimento seja seguido. • Após a medição, o símbolo da cubeta vazia muda para uma cubeta cheia (canto inferior esquerdo da tela). <p>Nota: É possível desativar os temporizadores para todos os métodos a partir das definições.</p> <p>Atenção: A exatidão dos testes não pode ser garantida se os procedimentos do método não forem seguidos.</p>
	Efetuar o teste	<p>Preparar o frasco de amostra de acordo com o procedimento descrito na descrição do método. Descarregue a descrição do método através da leitura do código QR na última página.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressionar a tecla Test para efetuar o teste. • Alguns métodos têm temporizadores integrados antes ou depois de pressionar a tecla Test. O instrumento efetua a medição quando a contagem decrescente termina. • O utilizador pode saltar a contagem decrescente ao pressionar novamente a tecla Test, mas recomenda-se enfaticamente que se siga o procedimento do método. <p>Nota: É possível desativar os temporizadores para todos os métodos a partir das definições.</p> <p>Atenção: A exatidão dos testes não pode ser garantida se os procedimentos do método não forem seguidos.</p>

Função	Descrição	Como executar a função
Cl ₂ F + Cl ₂ T = mg/L Cl ₂ comb	Métodos concatenados	<p>Alguns métodos estão ligados entre si para calcular a concentração de parâmetros específicos. Neste caso, o resultado do primeiro método parcial não é apresentado e o aparelho continua com o segundo método parcial.</p> <p>Quando o procedimento estiver concluído, prima o tecla para baixo ou para cima para alternar entre o resultado final calculado e o resultado do método parcial.</p>
mg/L Cl ₂ F ⇌ mg/L Br ₂	Alterar a forma de citação	<ul style="list-style-type: none"> • O resultado é apresentado na forma de citação predefinida. • Pressione a tecla para cima ou para baixo para mudar a forma de citação. • A nova forma de citação escolhida é guardada pelo instrumento como predefinição e apresentará os resultados nessa forma de citação, exceto se a a predefinição for reposta.
	Calibração do usuário	<ul style="list-style-type: none"> • Para a calibração do usuário, selecionar um método com um padrão de concentração conhecida, em vez de uma amostra de água, e realizá-lo. • Manter pressionada a tecla Test durante 3 segundos enquanto os resultados são apresentados na tela. • O aparelho entra no modo de calibração. • Pressionar a tecla "Para cima" ou "Para baixo" para aumentar/diminuir o valor apresentado para corresponder ao valor desejado. • Pressionar a tecla Test para aceitar o valor ajustado. É possível cancelar a calibração a qualquer momento, pressionando a tecla de retorno. • Será criada uma entrada de registo com o número do método. "Calib" e o fator de calibração com registo de data e hora.

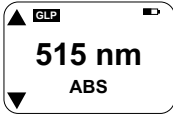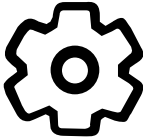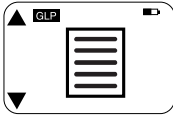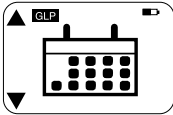
Função	Descrição	Como executar a função
	Medição da absorvância	A medição da absorvância segue o mesmo procedimento que os métodos de concentração. Percorrer a lista de métodos para seleccionar o método de absorvância. Os métodos de absorvância, para cada comprimento de onda disponível, são apresentados na lista de métodos.
	Menu de definições	<ul style="list-style-type: none"> • No menu inicial, pressionar e manter pressionada a tecla para cima durante 3 segundos para acessar o menu de definições. • Deslocar-se para cima e para baixo para ver as diferentes opções de configuração.
	Ver protocolos	<ul style="list-style-type: none"> • Quando o símbolo for apresentado, pressionar a tecla Test para entrar nos registos. • O aparelho apresenta a lista de todos os resultados/protocolos guardados. • Pressione a tecla “Para cima” ou “Para Baixo” para percorrer os resultados na lista. • Por padrão, todos os resultados e protocolos estarão pré-selecionados para transferência. • Pressionar a tecla Test para seleccionar/desmarcar resultados individuais. • Pressionar e manter pressionada a tecla Test durante 3 segundos para seleccionar desmarcar todos os resultados. • Pressionar e manter pressionada a tecla “Para cima” durante 3 segundos para transferir os resultados através de NFC. • Pressionar a tecla “Voltar” para retornar ao menu anterior.
	Definição da data	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar a tecla Test para abrir o menu de definição de datas. • Pressionar a tecla “Para cima” ou “Para Baixo” para alternar entre os formatos. • Pressionar a tecla Test para confirmar o formato.

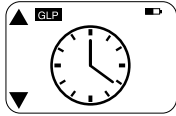Função	Descrição	Como executar a função
	Definição da hora	<ul style="list-style-type: none"> • Pressionar a tecla “Para cima” ou “Para Baixo” para ajustar a data. • Quando a seta estiver sobre o último dígito, pressionar a tecla Test para confirmar ou pressionar a tecla Voltar para retornar à posição anterior. A data estará definida e o instrumento retornará ao menu de definições. • Será criada uma entrada de protocolo nos registos para a alteração da data.
	One Time Zero	<p>Alguns métodos oferecem um Zero Único para tornar o processo de medição mais eficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão “Para baixo” ou o botão “Para cima” para selecionar OTZ no menu de definições. • Pressionar a tecla Test para ativar ou desativar a OTZ. • Efetuar o zero como descrito no método, o instrumento guardará este zero e o utilizará para as medições seguintes, a menos que o instrumento seja desligado ou que seja efetuado um novo ajuste de zero. • Um ícone OTZ será apresentado Na tela durante a medição e será protocolado nos registos como uma entrada separada. <p>Nota: É sempre possível substituir o OTZ pressionando a tecla de</p>

Função

Descrição

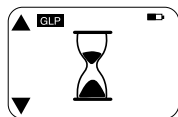Como executar a função




Ligar/desligar temporizadores

retrocesso e efetuando um novo ajuste de zero.

- Pressione a tecla “Para cima” ou “Para Baixo” para se deslocar para o ícone Temporizadores no menu de definições.
- É possível desativar os temporizadores integrados para todos os métodos através desta definição.
- Pressione o botão “Test” para ativar/ desativar o temporizador.
- Para isso, é criada uma entrada com o registro da hora.

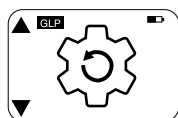Atenção: Recomenda-se que os temporizadores integrados nos procedimentos dos métodos sejam seguidos para a obtenção de resultados precisos.



Restauração de fábrica

- Pressione o botão “Para baixo” ou o botão “Para cima” para navegar até ao menu “Definições de fábrica”.
- Pressione o botão “Test” para selecionar as definições de fábrica.
- Pressione novamente o botão “Test” para confirmar o processo ou pressione o botão “Back” para cancelar a restauração.
- É criada uma entrada com um Registro de data/hora.

Nota: Uma restauração de fábrica elimina os métodos do usuário, a calibração do usuário e todos os resultados guardados.

Atenção: Transferir todos os resultados antes de restaurar o instrumento.



Selecionar o tipo de reagente

A seleção do tipo de reagente permite apresentar apenas os métodos adequados no menu inicial e ocultar os métodos de outros tipos de reagentes.

- Pressione o botão “Para baixo” ou o botão “Para cima” para navegar para o menu de seleção do tipo de reagente.

Função	Descrição	Como executar a função
		<ul style="list-style-type: none"> • Pressione o botão “Test” para acessar o menu. • Pressione o botão “Para baixo” ou o botão “Para cima” para navegar para outras opções ou pressione o botão “Test” para selecionar o tipo de reagente desejado.

4.5 Transferência de dados

Pode transferir todos os dados ou os dados seleccionados para a aplicação ou para o software do PC.

Selecione o ícone de registo no menu de definições para visualizar os resultados guardados.

MD 50 fornece duas opções para transferir dados:

1. Transferência de dados via cabo USB
2. Transferência de dados via NFC

4.5.1 Transferência de dados via USB

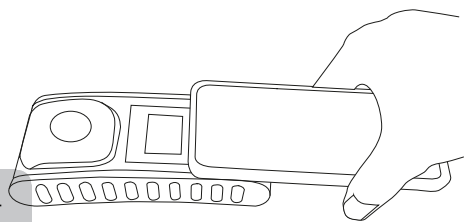
- A transferência de dados através do cabo USB requer o Lovibond® Data Expert software, que pode ser descarregado gratuitamente a partir do sítio Web da Lovibond.
- Por favor, instale o software no seu PC e siga as instruções do software sobre como transferir dados.
- Uma vez ligado, o instrumento mostrará o símbolo USB na barra de estado.
- Aceder ao menu Registos, conforme descrito no capítulo 4.3.1, e seleccionar um resultado específico ou todos os resultados a transferir por USB.

Nota: Não é necessária qualquer ação no fotómetro para iniciar o processo de transferência de dados.

4.5.2 Transferência de dados via NFC

- Para transferir resultados de medições através de NFC, aceder ao menu Registos, conforme descrito no capítulo 4.3.1, e seleccionar um resultado específico ou todos os resultados a transferir por NFC.
 - Prima e mantenha premida a tecla UP para guardar os resultados na etiqueta NFC.
 - Abra a aplicação AqualX e aproxime o dispositivo inteligente do instrumento para transferir os resultados (como mostra a imagem).
 - Premir o tecla de retrocesso para regressar ao menu de definições.
- Nota:** Quando regressa ao menu de definições, todos os dados são eliminados da etiqueta NFC.
- Certifique-se de que o NFC está activado no dispositivo inteligente.

PT



5 Manutenção

5.1 Rotina de manutenção recomendada






Tarefa	O que fazer	O que não fazer
Instrumento e câmara de medição limpos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpar a câmara de medição utilizando panos húmidos (sem óleo), sem fiapos, ou cotonetes. 2. Se a superfície da carcaça estiver suja, limpá-la com um pano macio com água e sabão suave. 3. Remover quaisquer salpicos de produtos químicos o mais rapidamente possível. 4. Para a desinfecção, pode-se utilizar isopropanol para limpeza por um curto intervalo de tempo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não utilizar uma cubeta que não esteja bem fechada. 2. Não utilize produtos de limpeza que contenham solventes. 3. Não pulverizar ou colocar produtos químicos diretamente no compartimento de amostras.
Acessórios limpos	<ol style="list-style-type: none"> 1. As cubetas, tampas e varetas de agitação devem ser cuidadosamente limpos após cada análise para evitar interferências. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não utilize uma cubeta com defeitos visíveis, por exemplo, falhas, riscos ou fissuras. 2. Não utilizar cubetas que não estejam com a parte exterior completamente seca.
Substituição das pilhas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remover as pilhas ao armazenar o instrumento por um período de tempo mais longo para evitar o vazamento das pilhas. 2. Utilizar sempre pilhas não recarregáveis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não utilizar tipos de pilhas não especificados.
Armazenamento	<ol style="list-style-type: none"> 1. Armazenar o instrumento e os acessórios nas condições ambientais especificadas. 	

**Advertência.**

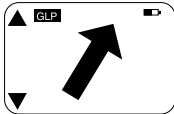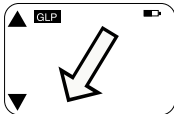O manuseio inadequado de certos reagentes pode prejudicar a sua saúde. Em qualquer caso, seguir as informações das etiquetas de segurança da embalagem, as instruções de segurança no manual da embalagem e a ficha de dados de segurança disponível. Deve-se seguir exatamente as medidas de proteção ali especificadas.

6 Resolução de problemas

6.1 Mensagens de erro e o que fazer

Visor	Causa possível	O que fazer
	Acima do alcance - A leitura está acima da faixa de medição.	Diluir a amostra.
	A amostra está muito turva.	Filtrar a amostra.
	Muita luz no detector.	Verificar o anel de vedação na tampa da cubeta.
	Abaixo da faixa - A leitura está abaixo do limite de detecção do método.	Certifique-se de que a dosagem de reagentes e os tempos de reação estão de acordo com as instruções do método. Verificar a amostra para garantir que tenha uma concentração suficientemente elevada do parâmetro a ser medido.
	Luz insuficiente no detector.	Limpar a câmara de medição para eliminar quaisquer partículas de pó que bloqueiem a luz.
	Erro de cálculo.	
		
Desligar imediatamente o instrumento	Pilhas fracas 	Substituir as pilhas.

7 Acessórios e peças de substituição

7.1 Lista de Acessórios

Anel de vedação da cubeta para cubetas redondas 24 mm, jogo de 12	197626
Cabo USB-C de 1 m, USB-C para A	19820-081
Certificado de calibração de fábrica ISO 9001 para o MD50	999756
Certificado de calibração de fábrica ISO 9001 para o método Cl M100 (MD50)	999720
Certificado de calibração de fábrica ISO 9001 para o método Cl M110 (MD50)	999721
Cilindro misturador com rolha acessório necessário para a determinação do molibdato LR com MD 100 (276140)	19802650
Copo de medição, 100 ml	384801
Cubeta redonda com tampa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, jogo de 5	197629
Cubeta redonda com tampa Ø 24 mm, altura 48 mm, 10 ml, jogo de 12	197620
Escova, 11 cm de comprimento	380230
Frasco amostrador com tampa, 250 mL, AF 631	170500
Frasco de 250 mL, AF 631	375072
Funil de plástico com cabo	471007
Kit Padrão de Referência Cloro 0,2 e 1,0 mg/l (MD50)	275620
Kit Padrão de Referência Cloro 0,5 e 2,0 mg/l (MD50)	275621
Kit Padrão de Referência Cloro 1,0 e 4,0 mg/l (MD50)	275622
Kit padrão de verificação MD50	215700
Pacote de serviços a preço fixo para MD50	19802710
Pano de limpeza	197635
Plano de assistência - 3 anos para MD50	19802810
Suporte de cubetas para 6 cubetas redondas de Ø 24 mm	418951
Vareta de plástico, 10 cm de comprimento	364109
Vareta de plástico, 10 cm de comprimento, jogo de 10	364130
Vareta de plástico, 13 cm de comprimento	364100
Vareta de plástico, 13 cm de comprimento, jogo de 10	364120

PT

8 Especificações

Óptica	LED, sensor do espectrómetro, filtro de interferência (apenas nas variantes seleccionadas)
Fonte de Luz	LED
Comprimento de Onda	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Faixa Fotométrica	0 - 3 Abs
Precisão Fotométrica	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
Cubetas Adequadas	<ul style="list-style-type: none"> • Cubetas Redondas de 13 mm • Cubetas Redondas de 16 mm • Cubetas Redondas de 24 mm
Display	LCD com iluminação de fundo
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
Formato de transferência de dados	.csv
Operação	Teclado de membrana
Auto – OFF	Sim
Programabilidade	sim com software para PC
Calibração	Regulação de fábrica e do utilizador - é possível regressar à regulação de fábrica em qualquer altura
Atualizações	Atualização do firmware e dos métodos
Armazenamento Interno	Memória interna em anel para 100 registos de dados
Tempo de Vida da Bateria	aprox. 5000 medições (sem retroiluminação)
Portabilidade	Portable
Grau de poluição	2
Altitude máxima acima do nível do mar	3500
Condições Ambientais	5 - 50 °C a uma humidade relativa de 30 - 95 % (sem condensação)
Grau de Proteção	IP 67
Conformidade	CE

Idiomas do Manual Completo do Usuário	<ul style="list-style-type: none">• Alemão• Chinês• Espanhol• Francês• Holandês• Inglês• Italiano• Português• Russo• Turco
---------------------------------------	---

PT

Dimensões	155 x 76 x 45 mm
Peso	247 g

**Cuidado!**

Sujeito a modificações técnicas!
Para assegurar a máxima precisão dos resultados das medições, utilizar sempre os acessórios e os reagentes fornecidos pelo fabricante do instrumento.

9 Apêndice

9.1 Aviso de Direitos Autorais e Marca Registrada

iOS® é uma marca registrada da Cisco, Inc. e é utilizada pela Apple, Inc. sob licença. iTunes Store® é uma marca comercial da Apple, Inc., registrada nos Estados Unidos e outros países.

Android™ e Google Play™ são marcas da Google, Inc.

Excel® é uma marca comercial da Microsoft Corp., registrada nos Estados Unidos e outros países.

Indice

Photometer Series

1 Introduzione	132
1.1 Informazioni generali	132
1.1.1 Leggere le istruzioni prima dell'uso	132
1.1.2 Scopo del prodotto	132
1.1.3 Uso autorizzato	132
1.1.4 Requisiti per un uso sicuro	132
1.1.5 Mantenere le istruzioni	133
1.1.6 Qualificazione dell'utente	133
1.1.7 Manipolazione di prodotti chimici pericolosi	133
1.1.8 Istruzioni per lo smaltimento	133
1.2 Elenco di tutti i simboli usati nel documento	133
2 Panoramica del prodotto	135
2.1 Guida ai simboli	135
2.3 Caratteristiche	135
2.4 Descrizione del prodotto	135
2.4.1 Vista dello strumento	136
2.4.2 Description of the keys and switches	136
2.4.3 Descrizione dell'interfaccia	137
3 Commissioning	138
3.1 Ambiente operativo	138
3.2 Contenuto della consegna	138
3.3 Inserimento e sostituzione delle batterie	139
4 Operazione	140
4.1 Primo avvio	140
4.2 Principi generali di funzionamento	140
4.3 Elenco degli elementi di controllo e della loro funzione	141
4.3.1 Elenco degli elementi di controllo e della loro funzione	141
4.5 Trasferimento dei dati	146
4.5.1 Trasferimento dati via USB	147
4.5.2 Trasferimento dei dati tramite NFC	147
5 Manutenzione	148
5.1 Ricomincia il programma di manutenzione	148
6 Risoluzione dei problemi	149
6.1 Messaggi di errore e cosa fare	149
7 Accessori e parti di ricambio	150
7.1 Elenco degli accessori	150
8 Specifiche	151

9 Appendice	153
9.1 Avviso di copyright e marchio commerciale	153

1 Introduzione

1.1 Informazioni generali

1.1.1 Leggere le istruzioni prima dell'uso

Questo manuale fornisce informazioni importanti sul funzionamento sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale e di familiarizzare con il prodotto prima dell'uso.

IT

1.1.2 Scopo del prodotto

I fotometri Lovibond sono progettati per misurare diversi parametri in campioni acquosi in una varietà di applicazioni come ad esempio l'acqua potabile, le acque reflue, l'acqua di lavorazione industriale, l'acqua della piscina e la scienza e la ricerca.

I fotometri Lovibond sono adatti ad essere utilizzati in laboratorio come strumenti da banco e sul campo come strumenti portatili. Per la portabilità gli strumenti sono consegnati in robuste valigette con gli accessori necessari.

Le prestazioni degli strumenti possono essere influenzate dall'esposizione a luce e temperatura estreme, ecco perché gli strumenti dovrebbero essere sempre utilizzati nelle condizioni ambientali raccomandate.

1.1.3 Uso autorizzato

La responsabilità del produttore e la garanzia per i danni sono annullate in caso di uso improprio, mancata osservanza del presente manuale, uso da parte di personale non qualificato o modifiche non autorizzate al prodotto.

Il produttore non è responsabile per costi o danni che sorgono dall'utente o da terzi a causa dell'uso di questo prodotto, specialmente in caso di uso improprio del prodotto o di uso improprio o di difetti nel collegamento del prodotto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per errori di stampa.

1.1.4 Requisiti per un uso sicuro

Osservare i seguenti punti per un uso sicuro:

- Se l'attrezzatura viene utilizzata in un modo non specificato dal produttore, la protezione fornita dall'attrezzatura può essere compromessa.
- Il prodotto può essere utilizzato solo in base all'uso autorizzato specificato sopra.
- Il prodotto può essere alimentato solo dalle fonti di energia menzionate in queste istruzioni per l'uso.
- Il prodotto può essere utilizzato solo nelle condizioni ambientali menzionate in queste istruzioni per l'uso.
- Il prodotto non deve essere aperto o modificato.

Il prodotto non deve essere utilizzato se:

- è visibilmente danneggiato (ad esempio dopo il trasporto)
- è stato conservato per un lungo periodo di tempo in condizioni avverse (condizioni di conservazione, vedi capitolo "Specifiche")

1.1.5 Mantenere le istruzioni

Il manuale deve essere tenuto nelle vicinanze del prodotto in modo da poter sempre trovare le informazioni necessarie.

1.1.6 Qualificazione dell'utente

Il personale operativo deve essere in grado di comprendere e applicare correttamente le etichette di sicurezza e le istruzioni di sicurezza sulle confezioni e sugli inserti dei prodotti.

L'utente deve essere capace e in grado di leggere e comprendere questo manuale per familiarizzare con la manipolazione e garantire un uso sicuro.

1.1.7 Manipolazione di prodotti chimici pericolosi

Pericoli chimici e/o biologici possono esistere dove viene usato questo prodotto. Rispettare tutte le leggi, i regolamenti e i protocolli in vigore quando si utilizza questo prodotto.

Nello sviluppo dei prodotti, Lovibond presta molta attenzione alla sicurezza. Alcuni pericoli derivanti da sostanze pericolose non possono essere evitati. Se si utilizzano test o soluzioni autoprodotte, la responsabilità di eventuali rischi causati da tali test o soluzioni è dell'utente (responsabilità personale).

1.1.8 Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le batterie e le apparecchiature elettriche in una struttura adeguata in conformità con la legislazione locale.

È illegale smaltire le batterie con i rifiuti domestici.

All'interno dell'Unione Europea, alla fine della vita del dispositivo, le batterie vengono smaltite in un punto di raccolta specializzato nel riciclaggio.



Gli strumenti contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti nei normali rifiuti domestici.

1.2 Elenco di tutti i simboli usati nel documento

I seguenti simboli sono usati in questo manuale per indicare sezioni che richiedono un'attenzione speciale:



Pericolo!

C'è un pericolo che causerà la morte o lesioni gravi se non viene evitato!

**Attenzione!**

La manipolazione impropria di alcuni reagenti può danneggiare la tua salute. In ogni caso, seguite le informazioni sulle etichette di sicurezza sulla confezione, le istruzioni di sicurezza nel foglietto illustrativo e la scheda di sicurezza disponibile. Le misure di protezione ivi specificate devono essere seguite esattamente.

**Attenzione!**

Esiste un pericolo che può provocare lesioni lievi o moderate.

**Nota!**

Informazioni importanti o istruzioni speciali devono essere osservate.

2 Panoramica del prodotto

2.1 Guida ai simboli

Le etichette applicate al prodotto devono essere rigorosamente osservate per evitare lesioni personali o danni al prodotto. Fare riferimento a questo capitolo per informazioni sulla natura del pericolo o del rischio prima di intraprendere qualsiasi azione in presenza di tale etichetta.



Per gli utenti professionali dell'Unione Europea:

Se volete disfarvi di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), contattate il vostro rivenditore o fornitore per ulteriori informazioni.

Per lo smaltimento in paesi al di fuori dell'Unione Europea:

Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea (UE). Se desiderate disfarvi di questo prodotto, contattate le autorità locali o il vostro rivenditore e chiedete il metodo corretto di smaltimento.

IT

2.3 Caratteristiche

I fotometri Lovibond MD50 e MD150 offrono un elevato livello di precisione ed efficienza con un'interfaccia di facile utilizzo.

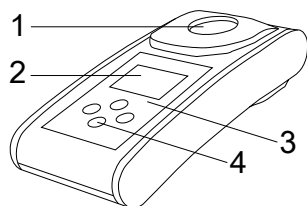
- Design robusto, resistente all'acqua e alla polvere
- Sistema ottico innovativo per una maggiore precisione
- Retroilluminazione multicolore
- Aggiornabile per includere i metodi più recenti.
- Interfaccia utente non linguistica con icone e simboli per un uso globale
- Capacità di memoria fino a 100 set di dati
- Trasferimento dati wireless tramite NFC all'app AquaLX
- Trasferimento dati via cavo al PC tramite cavo USB.
- Software per PC per importare un metodo utente e aggiornare lo strumento

2.4 Descrizione del prodotto

MD50 e MD150 di Lovibond sono una serie di fotometri singoli e multiparametrici progettati appositamente per i clienti che desiderano misurare parametri specifici in applicazioni di acqua di piscina, acqua potabile, acqua industriale o acque reflue.

Grazie ai LED stabili di alta qualità e alle guide luminose montate per ottenere una luce sufficiente sul rilevatore, gli strumenti garantiscono un'elevata precisione dei risultati di misura e un'elevata efficienza operativa. Il design compatto di MD50 e MD150 li rende strumenti palmari perfetti per l'impiego sul campo. Gli strumenti Lovibond, con l'aiuto di reagenti e standard di prova prodotti localmente, forniscono una soluzione completa per soddisfare le esigenze del settore dell'analisi delle acque.

2.4.1 Vista dello strumento



Lato anteriore

1 - Pozzetto di misurazione

2 - Display

3 - Numero di modello

4 - Pulsante di accensione



IT

2.4.2 Description of the keys and switches

Tasto	Funzione
	Tasto giù Accende o spegne lo strumento utilizzato per scorrere verso il basso
	Tasto Test Misura il campione Seleziona o conferma un'azione
	Tasto Indietro Torna al menu precedente Accende o spegne la retroilluminazione
	Tasto su Scorre gli elenchi verso l'alto Entra nel menu delle impostazioni

2.4.3 Descrizione dell'interfaccia

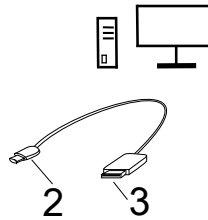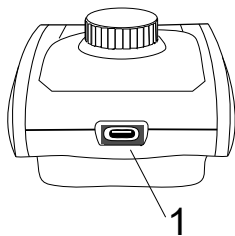
1. Porta USB-C per il trasferimento dei dati, gli aggiornamenti e l'importazione dei metodi tramite software per PC.



1. Porta USB-C (impermeabile)
2. USB-C
3. USB-A

IT

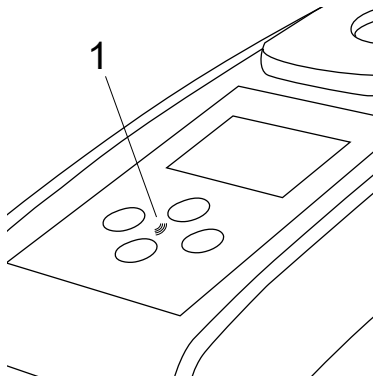2. NFC per il trasferimento wireless dei dati ai dispositivi smart tramite app.



1. Campo NFC

3 Commissioning

3.1 Ambiente operativo

Lo strumento può essere utilizzato in qualsiasi ambiente interno o esterno che sia considerato sicuro per un operatore per eseguire l'analisi. tuttavia si raccomanda di non utilizzare lo strumento in piena luce solare per evitare errori causati dalla luce parassita. Questo ambiente comprende un intervallo di temperatura da 5 a 40 gradi C con un'umidità senza condensa fino al 90%. Grandi differenze di temperatura tra lo strumento e l'ambiente possono portare a errori - ad esempio a causa della formazione di condensa nella zona della lente o sulla cuvetta.

IT

3.2 Contenuto della consegna

Strumento

2 batterie (AA)

3 Celle campione 24 mm Ø

3 bacchette di plastica per l'agitazione da 10 cm

Spazzola 11 cm

Cacciavite

Siringa dosatrice 10 mL

Cavo USB

Istruzioni d'uso

Manuale dei metodi (Codice QR)

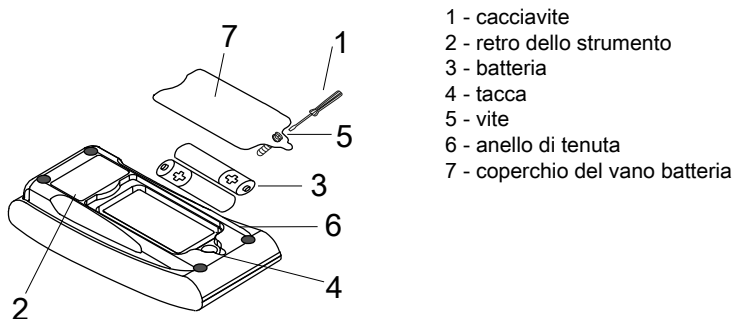
Certificato di conformità

Libretto di garanzia

Custodia con inserto

Reagenti per metodo

3.3 Inserimento e sostituzione delle batterie



1. Spegnerlo lo strumento.
2. Se necessario rimuovere la fiala dalla camera del campione.
3. Posizionare lo strumento capovolto su una superficie pulita e piana.
4. Svitare le una viti (5) del coperchio del vano batteria (7).
5. Sollevare il coperchio del vano batteria (7) in corrispondenza della tacca (4).
6. Rimuovere le vecchie batterie (3).
7. Inserisci 2 batterie nuove. Assicurandoti della corretta polarità!
8. Chiudere il coperchio del vano batteria (7). Controllare l'anello di tenuta (6) della tacca per assicurarsi che sia ben serrato.
9. Avvitare accuratamente le viti (5).



Attenzione!

Per garantire l'impermeabilità dello strumento:

- l'anello di tenuta deve essere in posizione
- il coperchio del vano batterie deve essere fissato con tutte le viti



Attenzione!

Smaltire le batterie usate in conformità con tutte le normative federali, statali e locali.

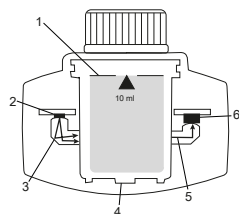
4 Operazione

4.1 Primo avvio

- Inserire le batterie come descritto nel capitolo 3.3.
- Accendere lo strumento premendo il tasto giù.
- Per prima cosa viene visualizzato il logo dell'azienda sullo schermo.
- La versione del firmware dello strumento viene visualizzata sullo schermo per un breve periodo.
- Impostare la data e l'ora seguendo la procedura descritta in 4.3.1.
- Scegliere il tipo di reagente per visualizzare solo i metodi desiderati. Per maggiori dettagli, seguire la procedura descritta in 4.3.1.
- Infine, viene visualizzato un elenco di metodi, che è la schermata di avvio dell'unità.

Nota: La retroilluminazione dello strumento si accende per impostazione predefinita; per spegnerla, premere il tasto Indietro per 3 secondi.

4.2 Principi generali di funzionamento



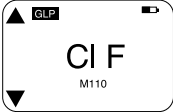

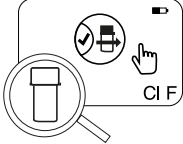



1. Cuvetta per campioni
2. Sorgente di luce
3. Guida di luce
4. Camera del campione
5. Raggio di luce
6. Sensore spettrometrico + rivelatore




Il fotometro dispone di metodi pre-programmati derivati da procedure analitiche standard. Per garantire un'analisi semplificata e priva di errori, le curve di calibrazione necessarie con i reagenti, i tempi di reazione e le sequenze sono tutti programmati in questi metodi. La configurazione ottica del fotometro consiste in una sorgente luminosa, filtri di interferenza (varianti specifiche) e un sensore spettrometrico. I fotometri Lovibond utilizzano come sorgente luminosa i LED, che sono altamente efficienti dal punto di vista energetico e hanno una lunga durata, pari a quella del fotometro stesso. Il sensore spettrometrico di alta qualità viene utilizzato per raccogliere e misurare la quantità di luce trasmessa attraverso il campione e la trasferisce al microprocessore che calcola digitalmente la concentrazione e visualizza i risultati nelle rispettive unità.



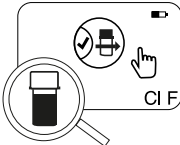
4.3 Elenco degli elementi di controllo e della loro funzione



4.3.1 Elenco degli elementi di controllo e della loro funzione



Funzione	Descrizione	Come eseguire la funzione
	Accensione/ spegnimento dello strumento	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto giù per accendere lo strumento. • Tenere premuto il tasto giù per spegnere lo strumento.
	Retroilluminazione	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere premuto il tasto Indietro per 3 secondi per accendere o spegnere la retroilluminazione.
	Modalità di misurazione	<ul style="list-style-type: none"> • Sul display viene visualizzato l'ultimo metodo utilizzato. • Scorrere l'elenco dei metodi e selezionare il metodo desiderato. • Premere il tasto Test per selezionare il metodo.
	Torna alla vista precedente	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto Indietro per tornare alla schermata precedente.
	Eseguire lo zero	<ul style="list-style-type: none"> • Riempire la cuvetta da 24 mm con 10 ml di campione o, se necessario, utilizzare una cuvetta da 16 mm per il bianco reagente. Nota: ogni metodo ha requisiti diversi per il bianco; seguire la procedura del metodo per eseguire correttamente il bianco dello strumento. Scaricate la descrizione del metodo scansionando il codice QR sull'ultima pagina. • Chiudere la fiala. • Posizionare la fiala del campione nella camera di campionamento. Prestare attenzione al posizionamento! • Premere il tasto Test per eseguire il blanking dello strumento. • In caso di conto alla rovescia, la misurazione avviene

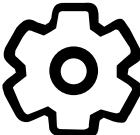Funzione	Descrizione	Come eseguire la funzione
		<p>automaticamente al termine del conto alla rovescia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il conto alla rovescia può essere saltato premendo di nuovo il pulsante di prova, ma si consiglia vivamente di seguire la procedura. • Dopo la misurazione, il simbolo della cuvetta vuota cambia in quello della cuvetta piena (in basso a sinistra del display). <p>Nota: è possibile disattivare i timer per tutti i metodi dalle impostazioni. Attenzione: L'accuratezza dei test non può essere garantita se non si seguono le procedure dei metodi.</p>
	Esecuzione del test	<p>Preparare la fiala di campione seguendo la procedura descritta nella descrizione del metodo. Scaricate la descrizione del metodo scansionando il codice QR sull'ultima pagina.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto Test per eseguire il test. • Alcuni metodi dispongono di timer integrati prima o dopo la pressione del tasto Test. Lo strumento eseguirà la misurazione al termine del conto alla rovescia. • L'utente può saltare il conto alla rovescia premendo nuovamente il tasto Test, ma si raccomanda di seguire la procedura del metodo. <p>Nota: è possibile disattivare i timer per tutti i metodi dalle impostazioni. Attenzione: L'accuratezza dei test non può essere garantita se non si seguono le procedure del metodo.</p>
$\text{Cl}_2 \text{ F} + \text{Cl}_2 \text{ T} =$ $\text{mg/L Cl}_2 \text{ comb}$	Metodi concatenati	<p>Alcuni metodi sono concatenati per calcolare la concentrazione di parametri specifici.</p> <p>In questo caso, il risultato del primo metodo parziale non viene visualizzato e il dispositivo prosegue con il secondo metodo parziale. Al termine della procedura, premere il pulsante verso il basso o verso l'alto per passare dal risultato finale calcolato al risultato del metodo parziale.</p>

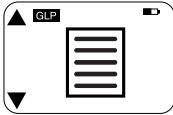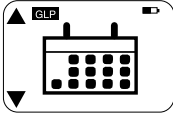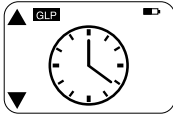Funzione	Descrizione	Come eseguire la funzione
mg/L Cl ₂ F ⇌ mg/L Br ₂	Change citation form	<ul style="list-style-type: none"> • Il risultato viene visualizzato nella forma di citazione predefinita. • Premere il pulsante su o giù per cambiare la forma della citazione. • La nuova forma di citazione scelta viene salvata dallo strumento come predefinita e mostrerà i risultati in questa forma di citazione, a meno che non venga ripristinata.
	Calibrazione utente	<ul style="list-style-type: none"> • Per la calibrazione utente, selezionare un test con uno standard di concentrazione nota invece di un campione d'acqua ed eseguirlo. • Tenere premuto il tasto Test per 3 secondi quando vengono visualizzati i risultati. • Lo strumento entra in modalità di calibrazione. • Premere i tasti Su o Giù per aumentare/diminuire il valore visualizzato in modo che corrisponda al valore target. • Premere il tasto Test per accettare il valore regolato. È possibile annullare la calibrazione in qualsiasi momento premendo il tasto posteriore. • Verrà creata una voce di registro con il numero del metodo. "Calib" e fattore di calibrazione con data e ora.
	Misura dell'assorbanza	<p>La misurazione dell'assorbanza segue la stessa procedura dei metodi di concentrazione. Scorrere l'elenco dei metodi per selezionare il metodo di assorbanza. I metodi di assorbanza per ogni lunghezza d'onda disponibile saranno visualizzati nell'elenco.</p>
	Menu impostazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Nel menu iniziale, tenere premuto il tasto su per 3 secondi per accedere al menu delle impostazioni. • Scorrere verso l'alto e verso il basso per visualizzare le diverse opzioni di impostazione.

Funzione	Descrizione	Come eseguire la funzione
	Visualizza protocolli	<ul style="list-style-type: none"> • Quando viene visualizzato il simbolo, premere il tasto Test per accedere ai registri. • Lo strumento visualizza l'elenco di tutti i risultati/protocolli salvati. • Premere i tasti Su o Giù per scorrere i risultati nell'elenco. • Tutti i risultati e i protocolli sono preselezionati di default per il trasferimento.. • Premere il tasto Test per selezionare/deselezionare i singoli risultati. • Tenere premuto il tasto Test per 3 secondi per selezionare/deselezionare tutti i risultati. • Tenere premuto il tasto Su per 3 secondi per trasferire i risultati tramite NFC. • Premere il tasto Indietro per tornare al menu precedente.
	Impostazione della data	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto Test per aprire il menu di impostazione della data. • Premere il tasto su o giù per scorrere il formato. • Premere il tasto Test per confermare il formato. • Premere il tasto su o giù per regolare la data. • Quando la freccia si trova sull'ultima cifra, premere il tasto Test per confermare o premere il Tasto posteriore per tornare alla posizione precedente. La data è impostata e lo strumento torna al menu delle impostazioni. • Per la modifica della data viene creata una voce di protocollo nei registri.
	Impostazione dell'ora	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il tasto Test per aprire il menu di impostazione dell'ora. • Premere il pulsante Giù o Su per diminuire o aumentare il valore. • Quando la freccia si trova nell'ultima posizione, premere il pulsante Test per confermare o premere il pulsante Indietro

Funzione	Descrizione	Come eseguire la funzione
	One Time Zero	<p>per tornare indietro o annullare l'impostazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la modifica dell'ora verrà creata una voce di protocollo nei registri. <p>Alcuni metodi offrono la funzione One Time Zero per rendere più efficiente il processo di misurazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Giù o Su per selezionare OTZ nel menu delle impostazioni. • Premere il tasto Test per attivare o disattivare OTZ. • Eseguire l'azzeramento come descritto nel metodo; lo strumento salva questo azzeramento e lo utilizza per le misure successive, a meno che non si spenga lo strumento o non si esegua un nuovo azzeramento. • Un'icona OTZ verrà visualizzata sullo schermo durante la misurazione e sarà protocollata nei registri come voce separata. <p>Nota: è sempre possibile sovrascrivere l'OTZ premendo il tasto indietro ed eseguendo un nuovo zero.</p>
	Attivazione/ disattivazione dei timer	<ul style="list-style-type: none"> • Premere i tasti Su o Giù per scorrere fino all'icona Timer dal menu delle impostazioni. • Attraverso questa impostazione è possibile disattivare i timer integrati per tutti i metodi. • Premere il pulsante di prova per attivare/disattivare il timer. • Nei registri viene creata una voce con l'indicazione dell'ora. <p>Attenzione: Si raccomanda di seguire i timer integrati nelle</p>

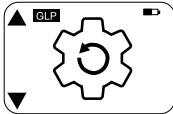Funzione	Descrizione	Come eseguire la funzione
	Reset di fabbrica	<p data-bbox="561 145 885 193">procedure dei metodi per ottenere risultati accurati.</p> <ul data-bbox="561 209 902 528" style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Giù o il pulsante Su per passare al menu Impostazioni di fabbrica. • Premere il pulsante Test per selezionare le impostazioni di fabbrica. • Premere nuovamente il pulsante Test per confermare il processo o premere il pulsante Indietro per annullare il ripristino. • Nei registri viene creata una voce con una data e ora. <p data-bbox="561 555 902 627">Nota: Un reset cancella i metodi utente, la calibrazione utente e tutti i risultati salvati.</p> <p data-bbox="561 632 902 679">Attenzione: Trasferire tutti i risultati prima di resettare lo strumento.</p>
	Selezione del tipo di reagente	<p data-bbox="561 695 913 823">La selezione del tipo di reagente consente di visualizzare solo i metodi selezionati nel menu iniziale e di nascondere i metodi di altri tipi di reagenti.</p> <ul data-bbox="561 828 897 1086" style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Giù o Su per passare al menu di selezione del tipo di reagente. • Premere il pulsante Test per accedere al menu. • Premere il pulsante Giù o Su per spostarsi su altre opzioni o premere il pulsante Test per selezionare il tipo di reagente desiderato.

4.5 Trasferimento dei dati

È possibile trasferire tutti i dati o quelli selezionati all'app o al software per PC. Selezionare l'icona del registro nel menu delle impostazioni per visualizzare i risultati salvati.

L'MD 50 offre due opzioni per il trasferimento dei dati:

1. Trasferimento dati tramite cavo USB
2. Trasferimento dati tramite NFC

4.5.1 Trasferimento dati via USB

- Il trasferimento dei dati tramite cavo USB richiede il Lovibond® Data Expert software, che viene fornito gratuitamente ed è disponibile per il download sul sito web Lovibond.
- Installare il software sul PC e seguire le istruzioni manuale del software per il trasferimento dei dati.
- Una volta collegato, lo strumento mostrerà il simbolo USB sulla barra di stato.
- Accedere al menu Registri come descritto nel capitolo 4.3.1 e selezionare i risultati specifici o tutti i risultati da trasferire via USB.

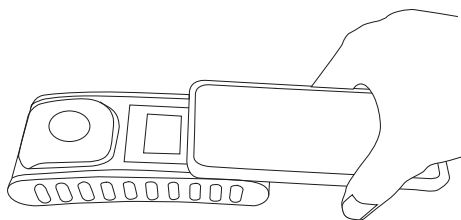
Nota: non è richiesta alcuna azione sul fotometro per avviare il processo di trasferimento dei dati.

4.5.2 Trasferimento dei dati tramite NFC

- Per trasferire i risultati delle misure tramite NFC, accedere al menu Registri come descritto nel capitolo 4.3.1 e selezionare i risultati specifici o tutti i risultati da trasferire via NFC.
- Tenere premuto il tasto UP per salvare i risultati nel tag NFC.
- Aprire l'applicazione AqualX e avvicinare lo smart device allo strumento per trasferire i risultati (come mostrato nell'immagine).
- Il tasto Indietro consente di tornare al menu delle impostazioni.

Nota: Quando si torna al menu delle impostazioni, tutti i dati vengono cancellati dal tag NFC.

- Assicurarsi che l'NFC sia abilitato sullo smart device.



5 Manutenzione

5.1 Ricomincia il programma di manutenzione

Compito	Cosa fare	Cosa non fare
Pulire lo strumento e la camera di misura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulire la camera di misura con panni umidi e privi di lanugine (senza olio) o cotton fioc. 2. Se la superficie dell'alloggiamento è sporca, pulirla con un panno morbido e acqua saponata. 3. Rimuovere il prima possibile eventuali schizzi di sostanze chimiche. 4. Per la disinfezione, è possibile utilizzare isopropanolo per una breve pulizia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non utilizzare cuvette non ermeticamente chiuse. 2. Non utilizzare detergenti contenenti solventi. 3. Non spruzzare o versare sostanze chimiche direttamente nella camera di campionamento.
Pulire gli accessori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuvette, tappi e bacchette di agitazione devono essere puliti accuratamente dopo ogni analisi per evitare interferenze. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non utilizzare cuvette che presentino difetti visibili, ad es. difetti, graffi o crepe. 2. Utilizzare cuvette non completamente asciutte dall'esterno.
Sostituzione della batteria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere le batterie quando si ripone lo strumento per un periodo di tempo prolungato per evitare perdite di batteria. 2. Utilizzare sempre batterie non ricaricabili. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non utilizzare tipi di batteria non specificati.
Conservazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conservare lo strumento e gli accessori alle condizioni ambientali specificate. 	


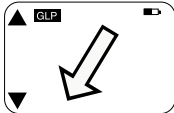





Attenzione!

La manipolazione impropria di alcuni reagenti può danneggiare la tua salute. In ogni caso, seguite le informazioni sulle etichette di sicurezza sulla confezione, le istruzioni di sicurezza nel foglietto illustrativo e la scheda di sicurezza disponibile. Le misure di protezione ivi specificate devono essere seguite esattamente.

6 Risoluzione dei problemi

6.1 Messaggi di errore e cosa fare

Segnalazione	Possibile causa	Cosa fare
	Over range - La lettura supera l'intervallo.	Diluire il campione.
	Torbidità nel campione.	Filtrare il campione.
	Troppo luce sul rivelatore.	Controllare la tenuta del tappo della cuvetta.
	Under range - La lettura è inferiore al limite di rilevazione del metodo.	Assicurarsi che il dosaggio dei reagenti e i tempi di reazione siano conformi alle istruzioni del metodo. Controllare che il campione abbia una concentrazione sufficientemente alta del parametro da misurare.
	Luce insufficiente sul rivelatore.	Pulire la camera di misurazione per eliminare eventuali particelle di polvere che bloccano la luce.
	Errore di calcolo.	
Lo strumento si spegne immediatamente	Batterie scariche. 	Sostituire le batterie.

7 Accessori e parti di ricambio

7.1 Elenco degli accessori

Anello di tenuta per cuvette rotonde 24 mm, set da 12	197626
Asta di agitazione in plastica, lunghezza 10 cm	364109
Asta di agitazione in plastica, lunghezza 13 cm	364100
Asta per agitazione in plastica, lunghezza 10 cm, set da 10	364130
Asta per agitazione in plastica, lunghezza 13 cm, set da 10	364120
Campionatore con flacone da 250 mL e coperchio, AF 631	170500
Cavo USB-C 1 m, da USB-C a A	19820-081
Certificato di calibrazione di fabbrica ISO 9001 per il MD50	999756
Certificato di calibrazione di fabbrica ISO 9001 per il metodo Cl M100 (MD50)	999720
Certificato di calibrazione di fabbrica ISO 9001 per il metodo Cl M110 (MD50)	999721
Cilindro di miscelazione con tappo accessorio necessario per la determinazione del molibdeno LR con MD 100 (276140)	19802650
Cuvetta rotonda con coperchio Ø 24 mm, altezza 48 mm, 10 ml, set da 5	197629
Cuvetta rotonda con coperchio Ø 24 mm, altezza 48 mm, 10 ml, set da 12	197620
Flacone da 250 mL, AF 631	375072
Imbuto in plastica con manico	471007
Kit standard di riferimento Cloro 0,2 e 1,0 mg/l (MD50)	275620
Kit standard di riferimento Cloro 0,5 e 2,0 mg/l (MD50)	275621
Kit standard di riferimento Cloro 1,0 e 4,0 mg/l (MD50)	275622
Kit standard di verifica MD50	215700
Misurino, 100 ml	384801
Pacchetto di servizi a prezzo fisso per MD50	19802710
Panno per la pulizia	197635
Piano di assistenza - 3 anni per MD50	19802810
Spazzola, lunghezza 11 cm	380230
Supporto per 6 cuvette rotonde Ø 24 mm	418951

8 Specifiche

Ottica	LED, sensore spettrometrico, filtro antidisturbo (solo varianti selezionate)
Sorgente luminosa	LED
Lunghezza d'onda	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Campo fotometrico	0 - 3 Abs
Precisione fotometrica	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
Cuvette adeguate	<ul style="list-style-type: none"> • Cuvette cilindriche 13 mm • Cuvette cilindriche 16 mm • Cuvette cilindriche 24 mm
Display	LCD retroilluminato
Interfacce	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
Formato di trasferimento dati	.csv
Funzionamento	Tastiera a membrana
Auto – OFF	Si
Programmabilità	Si, con software per PC
Messa a punto	Regolazione di fabbrica e utente - possibilità di ritorno alla regolazione di fabbrica in qualsiasi momento
Aggiornamenti	Aggiornamento del firmware e dei metodi
Memoria interna	Memoria interna ad anello per 100 record di dati
Durata delle batterie	circa 5000 misure (senza retroilluminazione)
Portabilità	Portable
Grado di inquinamento	2
Altitudine massima sul livello del mare	3500
Condizioni ambientali	5 - 50 °C con un'umidità relativa del 30 - 95 % (senza condensa)
Classe di protezione	IP 67
Conformità	CE

Lingue del manuale operativo	<ul style="list-style-type: none">• Cinese• Francese• Inglese• Italiano• Olandese• Portoghese• Russo• Spagnolo• Tedesco• Turco
------------------------------	---

Dimensioni	155 x 76 x 45 mm
------------	------------------

Peso	247 g
------	-------

**Attenzione!**

Con riserva di modifiche tecniche!
Per garantire la massima precisione dei risultati dei test, utilizzare sempre i sistemi di reagenti forniti dal produttore dello strumento.

9 Appendice

9.1 Avviso di copyright e marchio commerciale

IOS® è un marchio registrato di Cisco, Inc. ed è utilizzato da Apple, Inc. su licenza.

iTunes Store® è un marchio da Apple, Inc., registrato negli Stati Uniti e altri paesi.

Android™ e Google Play™ sono marchi di Google, Inc.

Excel® è un marchio da Microsoft Corp., registrato negli Stati Uniti e altri paesi.

Inhoudsopgave

Photometer Series

1 Inleiding	156
1.1 Algemene informatie	156
1.1.1 Belangrijke opmerking	156
1.1.2 Doel van het product	156
1.1.3 Beoogd gebruik	156
1.1.4 Eisen voor veilig gebruik	156
1.1.5 Instructies bewaren	157
1.1.6 Kwalificatie van de gebruiker	157
1.1.7 Hantering van gevaarlijke chemicaliën	157
1.1.8 Instructies voor afvoer	157
1.2 Lijst van alle in het document gebruikte symbolen	158
2 Product overzicht	159
2.1 Gids voor symbolen	159
2.3 Kenmerken	159
2.4 Beschrijving van het product	159
2.4.1 Aanzicht instrument	160
2.4.2 Beschrijving van de toetsen en schakelaars	160
2.4.3 Interface beschrijving	161
3 Inbedrijfstelling	162
3.1 Gebruiksomgeving	162
3.2 Inhoud van de levering	162
3.3 Plaatsen en vervangen van batterijen	163
4 Bediening	164
4.1 Eerste opstart	164
4.2 Algemene werkingsprincipes	164
4.3 Lijst van bedieningsorganen en hun functie	165
4.3.1 Lijst van bedieningsorganen en hun functie	165
4.5 Gegevensoverdracht	171
4.5.1 Gegevensoverdracht via USB	171
4.5.2 Gegevensoverdracht via NFC	171
5 Onderhoud	172
5.1 Aanbevolen onderhoudsschema	172
6 Probleemoplossing	174
6.1 Foutmeldingen en wat te doen	174
7 Accessoires en vervangingsonderdelen	175
7.1 Lijst van accessoires	175
8 Specificaties	176

9 Aanhangsel	178
9.1 Copyright en handelsmerk kennisgeving	178

1 Inleiding

1.1 Algemene informatie

1.1.1 Belangrijke opmerking

Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de veilige bediening van het product. Lees deze handleiding zorgvuldig door en maak u vertrouwd met het product voordat u het gebruikt.

1.1.2 Doel van het product

Lovibond fotometers zijn ontworpen voor het meten van verschillende parameters in waterige monsters in uiteenlopende toepassingen, zoals drinkwater, afvalwater, industrieel proceswater, zwembadwater en wetenschap & onderzoek. Lovibond fotometers zijn geschikt voor gebruik in het laboratorium als tafelmodel en in het veld als draagbaar instrument. Om de instrumenten draagbaar te houden, worden ze geleverd in robuuste draagkoffers met de vereiste accessoires. De prestaties van de instrumenten kunnen worden beïnvloed door blootstelling aan extreem licht en extreme temperaturen. Daarom moeten de instrumenten altijd worden gebruikt onder de aanbevolen omgevingscondities.

1.1.3 Beoogd gebruik

De aansprakelijkheid en garantie van de fabrikant voor schade vervalt bij oneigenlijk gebruik, het niet volgen van deze handleiding, gebruik door niet-gekwalificeerd personeel of ongeoorloofde wijzigingen aan het product. De fabrikant is niet aansprakelijk voor kosten of schade die ontstaan door de gebruiker of derden als gevolg van het gebruik van dit product, in het bijzonder in gevallen van oneigenlijk gebruik van het product of misbruik of fouten in de aansluiting van het product. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten.

1.1.4 Eisen voor veilig gebruik

Let op de volgende punten voor een veilig gebruik:

- Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet door de fabrikant is aangegeven, kan de door de apparatuur geboden bescherming nadelig worden beïnvloed.
- Het product mag alleen worden gebruikt volgens het hierboven aangegeven toegestane gebruik.
- Het product mag alleen van stroom worden voorzien door de energiebronnen die in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.
- Het product mag alleen worden gebruikt onder de omgevingsvoorwaarden die in deze gebruiksaanwijzing worden genoemd.
- Het product mag niet geopend of gewijzigd worden.

Het product mag niet gebruikt worden indien:

- het zichtbaar beschadigd is (b.v. na transport)
- het gedurende lange tijd onder ongunstige omstandigheden opgeslagen is geweest (opslagcondities, zie hoofdstuk "Specificaties")

1.1.5 Instructies bewaren

De handleiding moet in de buurt van het product worden bewaard, zodat u de informatie die u nodig hebt, altijd kunt vinden.

1.1.6 Kwalificatie van de gebruiker

Het bedienend personeel moet in staat zijn de veiligheidsetiketten en veiligheidsinstructies op de verpakkingen en inlegvellen van de producten te begrijpen en correct toe te passen.

De gebruiker moet in staat zijn deze handleiding te lezen en te begrijpen om zich vertrouwd te maken met de bediening en een veilig gebruik te waarborgen.

1.1.7 Hantering van gevaarlijke chemicaliën

Waar dit product wordt gebruikt, kunnen chemische en/of biologische gevaren bestaan. Houd u aan alle geldende wetten, voorschriften en protocollen bij het gebruik van dit product.

Bij de ontwikkeling van producten besteedt Lovibond veel aandacht aan veiligheid. Sommige gevaren van gevaarlijke stoffen kunnen niet worden vermeden. Bij gebruik van zelf vervaardigde testen of oplossingen ligt de verantwoordelijkheid voor eventuele risico's veroorzaakt door deze testen of oplossingen bij de gebruiker (eigen verantwoordelijkheid).

1.1.8 Instructies voor afvoer

Lever de accu's en de elektrische apparatuur in bij een daarvoor bestemde lokatie in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

Het is illegaal om batterijen bij het huishoudelijk afval te gooien.

Binnen de Europese Unie worden de batterijen aan het einde van de levensduur van het apparaat naar een gespecialiseerd inzamelpunt voor recycling gebracht.



Instrumenten die met dit symbool zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid.

1.2 Lijst van alle in het document gebruikte symbolen

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om aan te geven welke gedeelten speciale aandacht vereisen:



Gevaar!

Er bestaat een gevaar dat de dood of ernstige verwondingen tot gevolg zal hebben als het niet vermeden wordt!



Waarschuwing.

Onjuiste omgang met bepaalde reagentia kan uw gezondheid schaden. Volg in ieder geval de informatie op de veiligheidsetiketten op de verpakking, de veiligheidsinstructies in de bijsluiters en het beschikbare veiligheidsinformatieblad. De daar voorgeschreven beschermingsmaatregelen moeten exact worden opgevolgd.



Let op!

Er bestaat een gevaar dat kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.



Noot!

Belangrijke informatie of speciale instructies moeten in acht worden genomen.

2 Product overzicht

2.1 Gids voor symbolen

Labels die op het product zijn aangebracht moeten strikt worden opgevolgd om persoonlijk letsel of schade aan het product te voorkomen. Raadpleeg dit hoofdstuk voor informatie over de aard van het gevaar of risico voordat u actie onderneemt wanneer een dergelijk label aanwezig is.



Voor professionele gebruikers in de Europese Unie:

Als u elektrische en elektronische apparatuur (EEA) wilt weggoien, neem dan contact op met uw dealer of leverancier voor meer informatie.

Voor verwijdering in landen buiten de Europese Unie:

Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie (EU). Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer en vraag naar de juiste verwijderingsmethode.

NL

2.3 Kenmerken

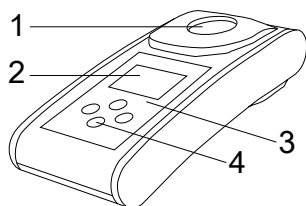
Lovibond MD50 en MD150 fotometers bieden een hoge mate van nauwkeurigheid en efficiëntie met een gebruiksvriendelijke interface.

- Robuust ontwerp, water- en stofdicht.
- Innovatief optisch systeem voor hogere nauwkeurigheid.
- Meerkleurige achtergrondverlichting.
- Kan worden bijgewerkt met de nieuwste methoden.
- Niet-talige UI met pictogrammen en symbolen voor algemeen gebruik.
- Geheugencapaciteit tot 100 gegevenssets.
- Draadloze gegevensoverdracht via NFC naar AquaLX app.
- Bekabelde gegevensoverdracht via USB-kabel naar pc.
- PC-software om een gebruikersmethode te importeren en het instrument bij te werken.

2.4 Beschrijving van het product

De MD50 en MD150 van Lovibond zijn series enkelvoudige en meervoudige fotometers die speciaal zijn ontworpen voor klanten die specifieke parameters willen meten in zwembadwater, drinkwater, industrieel water of afvalwater toepassingen. Met hoogwaardige stabiele LED's en gemonteerde lichtgeleiders om voldoende licht op de detector te krijgen, bieden de instrumenten een hoge nauwkeurigheid in meetresultaten en operationele efficiëntie. Het compacte ontwerp van MD50 en MD150 maakt ze tot perfecte handheld instrumenten die ideaal zijn voor gebruik in het veld. Lovibond instrumenten met behulp van lokaal geproduceerde reagentia en teststandaarden bieden een complete oplossing om aan de eisen in de wateranalyse industrie te voldoen.

2.4.1 Aanzicht instrument



Voorzijde

- 1 - Meetschacht
- 2 - Beeldscherm
- 3 - Modelnummer
- 4 - Aan/uit-knop



NL

2.4.2 Beschrijving van de toetsen en schakelaars

Toets	Functie
	Omlaag toets Schakelt het instrument in of uit gebruikt om naar beneden te scrollen
	Test toets Monster meten Selecteer of bevestig een actie
	Terug toets Terug naar het vorige menu Achtergrondverlichting aan- of uitzetten
	Omhoog toets Lijsten naar boven scrollen Ga naar het instellingenmenu

2.4.3 Interface beschrijving

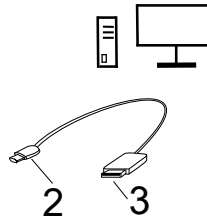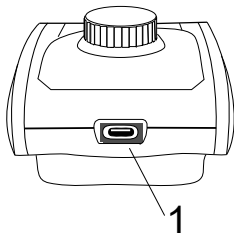
1. USB-C-poort voor gegevensoverdracht, updates en methode-import via pc-software.



1. USB-C Port (waterproof)
2. USB-C
3. USB-A

NL

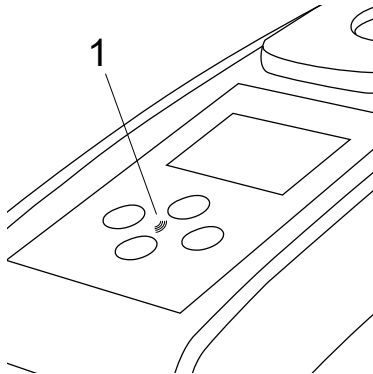2. NFC voor draadloze gegevensoverdracht naar slimme apparaten via App.



1. NFC-veld

3 Inbedrijfstelling

3.1 Gebruiksomgeving

Het instrument kan worden gebruikt in elke binnen- of buitenomgeving die veilig wordt geacht voor een operator om de analyse uit te voeren. Het wordt echter aanbevolen het instrument niet in fel zonlicht te gebruiken om fouten door strooilicht te voorkomen. Deze omgeving omvat een temperatuurbereik van 5 tot 40 °C met een niet-condenserende luchtvochtigheid tot 90%. Grote temperatuurverschillen tussen het instrument en de omgeving kunnen tot fouten leiden - bijvoorbeeld door condensvorming in het gebied van de lens of op het cuvet.

NL

3.2 Inhoud van de levering

Instrument

2 Batterijen (AA)

3 meetcuvet 24 mm Ø

3 Plastic roerstaven 10 cm

Borstel 11 cm

Schroevendraaier

Stuur 10 mL

USB kabel

Gebruiksaanwijzing

Handboek 'Methoden' (QR code)

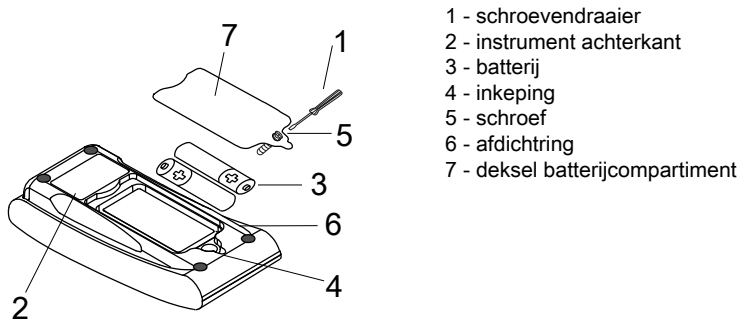
CE conformiteitsverklaring

Garantieboekje

Koffer met inzetstuk

Reagentia voor methode

3.3 Plaatsen en vervangen van batterijen



1. Schakel het instrument uit.
2. Verwijder indien nodig de flacon uit de monsterkamer.
3. Plaats het instrument ondersteboven op een schone en vlakke ondergrond.
4. Draai de ene schroef (5) van het deksel van het batterijcompartiment (7) los.
5. Til het deksel van het batterijcompartiment (7) op aan de inkeping (4).
6. Verwijder de oude batterijen (3).
7. Plaats 2 nieuwe batterijen. Let op de juiste polariteit!
8. Sluit het deksel van het batterijvak (7). Controleer of de afdichtring (6) van de uitsparing goed vastzit.
9. Draai de schroef (5) voorzichtig vast.



Let op!

Om ervoor te zorgen dat het instrument waterdicht is:

- moet de afdichtingsring op zijn plaats zitten
- moet het deksel van het batterijcompartiment met alle schroeven zijn vastgezet



Let op!

Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met alle federale, staats- en plaatselijke voorschriften.

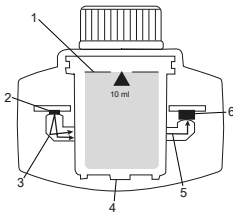
4 Bediening

4.1 Eerste opstart

- Plaats de batterijen zoals beschreven in hoofdstuk 3.3.
- Schakel het instrument in door op de Omlaag toets te drukken.
- Het bedrijfslogo verschijnt eerst op het apparaat.
- De firmwareversie van het instrument wordt even op het scherm weergegeven.
- Stel datum en tijd in door de procedure beschreven in 4.3.1 te volgen.
- Kies het type reagens om alleen de gewenste methoden weer te geven. Volg de procedure beschreven in 4.3.1 voor meer details.
- Tenslotte wordt een methodelijst weergegeven, het opstartscherm van de unit.

Opmerking: Om de achtergrondverlichting uit te schakelen, drukt u 3 seconden op de toets Terug.

4.2 Algemene werkingsprincipes



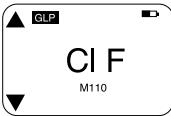

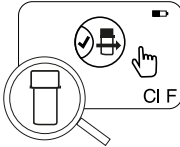


1. Monstercuvette
2. Lichtbron
3. Lichtgeleider
4. Monster kamer
5. Lichtstraal
6. Spectrometrische sensor + detector



De fotometer heeft voorgeprogrammeerde methoden die zijn afgeleid van standaard analytische procedures. Om een vereenvoudigde en foutloze analyse te garanderen, zijn alle benodigde kalibratiecurves met reagentia, reactietijden en sequenties in deze methoden geprogrammeerd. De optische opstelling van een fotometer bestaat uit een lichtbron, interferentiefilters (specifieke varianten) en een spectrometrische sensor. Lovibond fotometers gebruiken LED's als lichtbron die zeer energiezuinig zijn en een lange levensduur hebben, zodat ze net zo lang meegaan als de fotometer zelf. Een spectrometrische sensor van hoge kwaliteit verzamelt en meet de hoeveelheid licht die door het monster wordt doorgelaten en geeft dit door aan de microprocessor die digitaal de concentratie berekent en de resultaten weergeeft in de betreffende eenheden.

4.3 Lijst van bedieningsorganen en hun functie

4.3.1 Lijst van bedieningsorganen en hun functie

Functie	Beschrijving	Hoe de functie uitvoeren
	Instrument in-/uitschakelen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de Omlaag-toets om het instrument in te schakelen. • Houd de Omlaag-toets ingedrukt om het instrument uit te schakelen.
	Achtergrondverlichting	<ul style="list-style-type: none"> • Houd de back-toets 3 seconden ingedrukt om de achtergrondverlichting in of uit te schakelen.
	Meetmethode	<ul style="list-style-type: none"> • De laatst gebruikte methode wordt weergegeven op het scherm. • Navigeer door de methodenlijst en selecteer de gewenste methode. • Druk op de toets Test om de methode te selecteren.
	Terug naar vorige weergave	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de Terug-toets om terug te gaan naar het vorige scherm.
	Nulstelling uitvoeren	<ul style="list-style-type: none"> • Vul het 24 mm flesje met 10 ml monster, of gebruik indien nodig een 16 mm blanco reagensflesje. Opmerking: Elke methode heeft verschillende blanco-vereisten, volg de methodeprocedure om het instrument correct te blanceren. Download de methodebeschrijving door de QR-code op de laatste pagina te scannen. • Sluit de flacon. • Plaats de monsterfles in de monsterkamer. Let op de plaatsing! • Druk op de Testtoets om het instrument te blanceren. • Bij aftellen vindt de meting automatisch plaats nadat het aftellen is afgelopen.


Functie	Beschrijving	Hoe de functie uitvoeren
	Test uitvoeren	<ul style="list-style-type: none"> • Het aftellen kan worden overgeslagen door nogmaals op de testknop te drukken. • Na de meting verandert het lege cuvet-symbool in een volle cuvet (linksonder op het scherm). <p>Opmerking: Je kunt timers voor alle methoden uitschakelen via de instellingen.</p> <p>Let op: De nauwkeurigheid van testen kan niet worden gegarandeerd als de methodeprocedures niet worden gevolgd.</p>
$\text{Cl}_2 \text{ F} + \text{Cl}_2 \text{ T} = \text{mg/L Cl}_2 \text{ comb}$	Aaneengeschakelde methoden	<p>Bereid het monsterflesje voor volgens de procedure in de methodebeschrijving. Download de methodebeschrijving door de QR-code op de laatste pagina te scannen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de Testtoets om de test uit te voeren. • Sommige methoden hebben geïntegreerde timers voor of na het indrukken van de Testtoets. Het instrument voert de meting uit zodra het aftellen is voltooid. • De gebruiker kan het aftellen overslaan door nogmaals op Test te drukken, maar het wordt sterk aangeraden om de methodeprocedure te volgen. <p>Opmerking: Je kunt timers voor alle methoden uitschakelen via de instellingen.</p> <p>Let op: De nauwkeurigheid van testen kan niet worden gegarandeerd als de methodeprocedures niet worden gevolgd.</p>
		<p>Sommige methoden zijn aan elkaar gekoppeld om de concentratie van specifieke parameters te berekenen. In dit geval wordt het resultaat van de eerste deelmethode niet weergegeven en gaat het apparaat verder met de tweede deelmethode. Wanneer de procedure is voltooid, druk je op de omhoog- of omlaagknop om te wisselen tussen het berekende eindresultaat en het resultaat van de deelmethode.</p>

Functie	Beschrijving	Hoe de functie uitvoeren
mg/L Cl ₂ F ⇌ mg/L Br ₂	Citatieformulier wijzigen	<ul style="list-style-type: none"> • Het resultaat wordt weergegeven in de standaard citatievorm. • Druk op de omhoog- of omlaagknop om de citatievorm te wijzigen. • De nieuw gekozen citatievorm wordt door het instrument opgeslagen als standaard en toont resultaten in deze citatievorm tenzij deze wordt teruggezet naar de standaard.
	Gebruikerskalibratie	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de gebruikerskalibratie selecteert u een test met een standaard van bekende concentratie in plaats van een watermonster en voert u deze uit. • Houd Test gedurende 3 seconden ingedrukt wanneer de resultaten worden weergegeven. • Het instrument gaat naar de kalibratiemodus. • Druk op de omhoog- of omlaagtoets om de weergegeven waarde te verhogen/verlagen zodat deze overeenkomt met de doelwaarde. • Druk op de Test toets om de aangepaste waarde te accepteren. Je kunt de kalibratie op elk moment annuleren door op de terug toets te drukken. • Er wordt een logboekvermelding gemaakt met methode nummer. "Calib" en kalibratiefactor met datum- en tijdstempel.
	Absorptiemeting	<p>Absorptiemeting volgt dezelfde procedure als concentratiemethoden. Scroll door de methodenlijst om de absorptiemethode te selecteren. Absorbantiemethoden voor elke beschikbare golflengte worden in de lijst weergegeven.</p>

Functie

Beschrijving

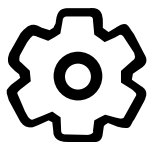Hoe de functie uitvoeren




Instellingenmenu

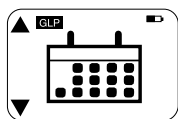- Houd in het hoofdmenu de omhoog-toets 3 seconden ingedrukt om het instellingenmenu te openen.
- Scroll omhoog en omlaag om de verschillende instellingsopties te bekijken.



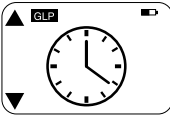

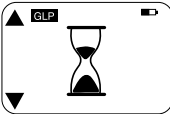
Logboeken weergeven

- Wanneer het symbool wordt weergegeven, drukt u op Test om de logboeken te openen.
- Het instrument toont een lijst met alle opgeslagen resultaten/ protocollen.
- Druk op de omhoog- of omlaag-toets om door de resultaten in de lijst te bladeren.
- Alle resultaten en protocollen zijn standaard voorgeselecteerd voor overdracht.
- Druk op de Testtoets om individuele resultaten te selecteren/deselecteren.
- Houd Test gedurende 3 seconden ingedrukt om alle resultaten te selecteren / deselecteren.
- Houd de Omhoog toets 3 seconden ingedrukt om resultaten over te dragen via NFC.
- Druk op de Terug toets om terug te gaan naar het vorige menu.



Datum instellen

- Druk op de Testtoets om het menu Datuminstelling te openen.
- Druk op de Omhoog of Omlaag toets om door het formaat te bladeren.
- Druk op de Test toets om het formaat te bevestigen.
- Druk op de Omhoog of Omlaag toets om de datum aan te passen.
- Wanneer de pijl op het laatste cijfer staat, druk op de Test toets om te bevestigen of druk op de Terug toets om terug te keren naar de vorige positie. De datum is ingesteld en het instrument keert terug naar het instellingenmenu.

Functie	Beschrijving	Hoe de functie uitvoeren
	Tijd instellen	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt een protocolinvoer gemaakt in het logboek voor de datumwijziging. • Druk op de Test toets om het tijdstelmenu te openen. • Druk op de knop Omlaag of de knop Omhoog om de waarde te verlagen of te verhogen. • Wanneer de pijl op de laatste positie staat, druk je op de Testknop om te bevestigen of druk je op de Terugknop om terug te gaan of de instelling te annuleren. • Er wordt een protocol aangemaakt in het logboek voor het wijzigen van de tijd.
	One Time Zero	<p>Sommige methoden bieden een One Time Zero om het meetproces efficiënter te maken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de omlaag- of omhoogknop om OTZ te selecteren in het instellingenmenu. • Druk op de Test toets om OTZ in of uit te schakelen. • Voer nulstelling uit zoals beschreven in de methode, het instrument slaat deze nulstelling op en gebruikt deze voor volgende metingen tenzij het instrument wordt uitgeschakeld of een nieuwe nulstelling wordt uitgevoerd. • Een OTZ-pictogram wordt weergegeven op het scherm tijdens de meting en wordt geprotocolleerd in de logboeken als een afzonderlijk item. <p>Opmerking: Je kunt OTZ altijd overschrijven door op de terug-toets te drukken en een nieuwe nulstelling uit te voeren.</p>
	Timers aan/uit	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de Omhoog of Omlaag toets om naar het Timers icoon te gaan in het instellingenmenu. • Via deze instelling kunt u de geïntegreerde timers voor alle methoden uitschakelen.

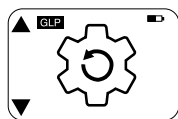
Functie

Beschrijving

Hoe de functie uitvoeren

- Druk op de testknop om de timer te activeren/deactiveren.
- Hiervoor wordt een item met tijdstempel aangemaakt in de logboeken.

Let op: Het wordt aanbevolen om geïntegreerde timers te volgen in methodes om nauwkeurige resultaten te verkrijgen.



Fabrieksreset

- Druk op de knop Omlaag of de knop Omhoog om naar het menu Fabrieksinstellingen te gaan.
- Druk op de Testknop om de fabrieksinstellingen te selecteren.
- Druk nogmaals op de Testknop om het proces te bevestigen of druk op de Terugknop om de reset te annuleren.
- Er wordt een item met een tijdstempel aangemaakt in de logboeken.

Opmerking: Een reset verwijdert gebruikersmethoden, gebruikerskalibratie en alle opgeslagen resultaten.

Let op: Zet alle resultaten over voordat je het instrument reset.



Reagentype selecteren

Door het type reagens te selecteren, kunt u alleen de geselecteerde methoden in het startmenu weergeven en methoden van andere typen reagentia verbergen.

- Druk op de omlaag- of omhoogknop om naar het menu voor het selecteren van het type reagens te gaan.
- Druk op de Testknop om het menu te openen.
- Druk op de omlaag- of omhoogknop om naar andere opties te navigeren of druk op de Testknop om het gewenste type reagens te selecteren.

4.5 Gegevensoverdracht

Je kunt alle of geselecteerde gegevens overbrengen naar de app of de pc-software. Selecteer het logpictogram in het instellingenmenu om de opgeslagen resultaten weer te geven.

De MD50 biedt twee opties voor gegevensoverdracht:

1. Gegevensoverdracht via USB-kabel
2. Gegevensoverdracht via NFC

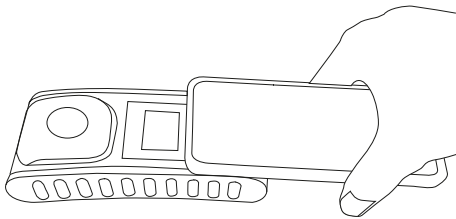
4.5.1 Gegevensoverdracht via USB

- Voor gegevensoverdracht via USB-kabel is de Lovibond® Data Expert software vereist, die gratis kan worden gedownload van de Lovibond-website.
- Installeer de software op uw pc en volg de instructies in de software voor de gegevensoverdracht.
- Eenmaal aangesloten zal het instrument het USB-symbool op de statusbalk tonen.
- Ga naar het Logs menu zoals beschreven in hoofdstuk 4.3.1 en selecteer specifieke of alle resultaten die via USB moeten worden overgebracht.

Opmerking: Er is geen actie vereist op de fotometer om het gegevensoverdrachtproces te starten.

4.5.2 Gegevensoverdracht via NFC

- Om meetresultaten via NFC over te dragen, ga naar het Logs menu zoals beschreven in hoofdstuk 4.3.1 en selecteer specifieke of alle resultaten die via NFC moeten worden overgebracht.
 - Houd de UP-toets ingedrukt om de resultaten op te slaan in de NFC-tag.
 - Open de AqualX app en breng het slimme apparaat dicht bij het instrument om de resultaten over te dragen (zoals in de afbeelding).
 - Druk op de terugknop om terug te keren naar het instellingenmenu.
- Opmerking:** Wanneer u terugkeert naar het instellingenmenu, worden alle gegevens van de NFC-tag verwijderd.
- Zorg ervoor dat NFC is ingeschakeld op het slimme apparaat.



5 Onderhoud

5.1 Aanbevolen onderhoudsschema



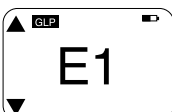

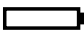
Taak	Wat te doen	Wat niet te doen
Reinig instrument en meetkamer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinig de meetkamer met pluisvrije, vochtige doeken (zonder olie) of wattenstaafjes. 2. Als het oppervlak van de behuizing vuil is, veeg het dan af met een zachte doek en een mild zeepsopje. 3. Verwijder spatten van chemicaliën zo snel mogelijk. 4. Voor desinfectie kunt u voor korte tijd isopropanol gebruiken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik geen cuvet die niet goed afgesloten is. 2. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten. 3. Spuit of giet geen chemicaliën rechtstreeks in de monsterkamer.
Accessoires reinigen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cuvets, doppen en roerstaven moeten na elke analyse grondig worden gereinigd om interferentie te voorkomen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik geen cuvet met zichtbare defecten, zoals gebreken, krassen of barsten. 2. Gebruik flacons die niet volledig droog zijn van buitenaf.
Batterij vervangen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder de batterijen wanneer u het instrument voor langere tijd opbergt om batterijlekkage te voorkomen. 2. Gebruik altijd niet-oplaadbare batterijen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gebruik geen niet-gespecificeerde batterijtypes.
Opslag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bewaar het instrument en de accessoires onder de aangegeven omgevingscondities. 	

**Waarschuwing.**

Onjuiste omgang met bepaalde reagentia kan uw gezondheid schaden. Volg in ieder geval de informatie op de veiligheidsetiketten op de verpakking, de veiligheidsinstructies in de bijsluiters en het beschikbare veiligheidsinformatieblad. De daar voorgeschreven beschermingsmaatregelen moeten exact worden opgevolgd.

6 Probleemoplossing

6.1 Foutmeldingen en wat te doen

Weergave	Mogelijke oorzaken	Wat te doen
	<p>Over het bereik - De aflezing overschrijdt het bereik.</p>	<p>Verdun het monster.</p>
	<p>Watermonster is te troebel.</p>	<p>Filtreer het watermonster.</p>
	<p>Te veel licht op de detector.</p>	<p>Controleer de afdichting van de kuvettendop.</p>
	<p>Onder bereik - De aflezing ligt onder de detectiegrens van de methode.</p>	<p>Controleer of de dosering van de reagentia en de reactietijden in overeenstemming zijn met de instructies van de methode. Controleer het monster om er zeker van te zijn dat het een voldoende hoge concentratie heeft van de te meten parameter.</p>
	<p>Onvoldoende licht op de detector.</p>	<p>Reinig de meetkamer om eventuele stofdeeltjes te verwijderen die het licht blokkeren.</p>
	<p>Rekenfout.</p>	
	<p>Het instrument schakelde zichzelf onmiddellijk uit.</p>	<p>Batterijen bijna leeg.</p>
		

7 Accessoires en vervangingsonderdelen

7.1 Lijst van accessoires

250 mL flesje, AF 631	375072
Borstel, 11 cm lang	380230
Cuvetafdichting voor ronde cuvetten 24 mm, 12 set	197626
Cuvethouder voor 6 ronde cuvetten \varnothing 24 mm	418951
Fabriekskalibratiecertificaat ISO 9001 voor MD50	999756
Fabriekskalibratiecertificaat ISO 9001 voor methode CI M100 (MD50)	999720
Fabriekskalibratiecertificaat ISO 9001 voor methode CI M110 (MD50)	999721
Kunststof roerstaaf, 10 cm lang, set van 10	364130
Kunststof roerstaaf, 13 cm lang, set van 10	364120
Kunststof roerstaafje, 10 cm lang	364109
Kunststof roerstaafje, 13 cm lang	364100
Kunststof trechter met handvat	471007
Maatbeker, 100 ml	384801
Mengcilinder met stop noodzakelijk voor het bepalen van molybdeen LR met MD 100 (276140)	19802650
Monsterverzamelaar met 250 mL fles en deksel, AF 631	170500
Referentiestandaardkit Chloor 0,2 en 1,0 mg/l (MD50)	275620
Referentiestandaardkit Chloor 0,5 en 2,0 mg/l (MD50)	275621
Referentiestandaardkit Chloor 1,0 en 4,0 mg/l (MD50)	275622
Reinigingsdoek	197635
Ronde cuvetten met deksel \varnothing 24 mm, hoogte 48 mm, 10 ml, set van 5	197629
Ronde cuvetten met deksel \varnothing 24 mm, hoogte 48 mm, 10 ml, set van 12	197620
Servicepakket met vaste prijs voor MD50	19802710
Service plan - 3 jaar voor MD50	19802810
USB-C cable 1 m, USB-C to A	19820-081
Verificatiestandaardkit MD50	215700

NL

8 Specificaties

Optiek	LED, spectrometersensor, interferentiefilter (alleen geselecteerde varianten)
Lichtbron	LED
Wellenlänge	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Fotometrisch bereik	0 - 3 Abs
Fotometrische nauwkeurigheid	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
Geschikte cuvetten	<ul style="list-style-type: none"> • Ronde cuvetten 13 mm • Ronde cuvetten 16 mm • Ronde cuvetten 24 mm
Display	Lcd met achtergrondverlichting
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
Data transfer formaat	.csv
Bediening	Folietoetsenbord
Auto – OFF	Ja
Programmeerbaarheid	ja met pc-software
IJking	Fabrieks- en gebruikersafstelling - terugkeer naar fabrieksafstelling op elk moment mogelijk
Updates	Firmware en methoden bijwerken
intern geheugen	Внутренняя кольцевая память на 100 записей данных
Levensduur batterij	ca. 5000 metingen (zonder achtergrondverlichting)
Draagbaarheid	Portable
Mate van vervuiling	2
Maximale hoogte boven zeeniveau	3500
Bedrijfsomstandigheden	5 - 50 °C при относительной влажности 30 - 95 % (без конденсации)
Beschermingsklasse	IP 67
Compliance	CE

Talen gebruiksaanwijzing	<ul style="list-style-type: none">• Chinees• Duits• Engels• Frans• Italiaans• Nederlands• Portugees• Russisch• Spaans• Turks
-----------------------------	---

Afmetingen	155 x 76 x 45 mm
------------	------------------

Gewicht	247 g
---------	-------

**Let op!**

Technische wijzigingen voorbehouden!
Om een maximale nauwkeurigheid van de testresultaten te garanderen, moet u altijd de door de fabrikant van het instrument geleverde reagenssystemen gebruiken.

9 Aanhangsel

9.1 Copyright en handelsmerk kennisgeving

iOS® is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco, Inc. en in licentie gegeven aan Apple, Inc.

iTunes Store® is een handelsmerk van Apple, Inc. en is geregistreerd in de VS en andere landen.

Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

Excel® is een handelsmerk van Microsoft Corp., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

İçindekiler

Photometer Series

1 Giriş	181
1.1 Genel bilgi	181
1.1.1 Kullanmadan önce talimatları okuyun	181
1.1.2 Ürünün Amacı	181
1.1.3 Yetkili kullanım	181
1.1.4 Güvenli kullanım için gereklilikler	181
1.1.5 Talimatları saklayın	181
1.1.6 Kullanıcı yeterliliği	182
1.1.7 Tehlikeli kimyasalların kullanımı	182
1.1.8 İmha Etme	182
1.2 Belgede kullanılan tüm karakterlerin listesi	182
2 Ürüne Genel Bakış	184
2.1 Semboller için rehber	184
2.3 Özellikleri	184
2.4 Ürün Açıklaması	184
2.4.1 Enstrüman görünümü	185
2.4.2 Anahtarların ve anahtarların açıklaması	185
2.4.3 Arayüz açıklaması	186
3 Devreye alma	187
3.1 Çalışma ortamı	187
3.2 Teslimat içeriği	187
3.3 Pilleri Takma ve Değiştirme	187
4 Operasyon	189
4.1 İlk devreye alma	189
4.2 Genel çalışma prensipleri	189
4.3 Kontrol elemanlarının listesi ve işlevleri	190
4.3.1 Kontrol elemanlarının listesi ve işlevleri	190
4.5 Veri aktarımı	195
4.5.1 USB üzerinden veri aktarımı	196
4.5.2 NFC üzerinden veri aktarımı	196
5 Bakım	197
5.1 Yeniden başlatılan bakım programı	197
6 Sorun giderme	198
6.1 Hata mesajları ve yapılması gerekenler	198
7 Aksesuarlar ve Yedek parçalar	199
7.1 Aksesuar Listesi	199
8 Özellikler	200

9 Ekler

202

9.1 Telif Hakkı ve Ticari Marka Bildirimi

202

TR

1 Giriş

1.1 Genel bilgi

1.1.1 Kullanmadan önce talimatları okuyun

Bu kılavuz, ürünün güvenli kullanımı hakkında önemli bilgiler sağlar. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kullanmadan önce ürüne alışı.

1.1.2 Ürünün Amacı

Lovibond Fotometreler, örn. içme suyu, atık su, Endüstriyel işleme suyu, havuz suyu ve bilim ve araştırma gibi uygulamalarda likit numunelerde farklı parametreleri ölçmek için tasarlanmıştır.

Lovibond fotometreler, laboratuvar ortamlarında masaüstü olarak ve sahada taşınabilir cihaz olarak kullanılmaya uygundur. Taşınabilirlik için enstrümanlar, gerekli aksesuarlarla birlikte sağlam taşıma çantalarında teslim edilir.

Enstrümanların performansı aşırı ışık ve sıcaklığa maruz kalmaktan etkilenebilir, bu nedenle enstrümanlar her zaman önerilen çevre koşullarında kullanılmalıdır.

1.1.3 Yetkili kullanım

Hatalı kullanım, bu kılavuza uyulmaması, kalifiye olmayan personel tarafından kullanılması veya üründe yetkisiz değişiklikler yapılması durumunda üreticinin sorumluluğu ve garantisi geçersiz hale gelir.

Üretici firma, bu ürünün kullanımından dolayı, özellikle ürünün yanlış kullanılması veya yanlış kullanım veya ürünün bağlantısındaki hatalarda kullanıcı veya üçüncü şahıslardan kaynaklanan maliyet veya zararlardan sorumlu değildir.

Üretici, baskı hatalarından sorumlu değildir.

1.1.4 Güvenli kullanım için gereklilikler

Güvenli kullanım için aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Ekipman, üretici tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanılırsa, ekipmanın sağladığı koruma bozulabilir.
- Ürün yalnızca yukarıda belirtilen izin verilen kullanıma göre kullanılabilir.
- Ürüne yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen enerji kaynakları ile güç sağlanabilir.
- Ürün yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel koşullar altında kullanılabilir.
- Ürün açılmamalı veya değiştirilmemelidir.

Ürün şu durumlarda kullanılmamalıdır:

- gözle görülür şekilde hasar görmüş (örneğin, nakledildikten sonra)
- olumsuz koşullar altında uzun süre depolanan (saklama koşulları, bkz. Bölüm "Teknik Özellikler")

1.1.5 Talimatları saklayın

Kılavuz, ihtiyacınız olan bilgileri her zaman bulabilmeniz için ürünün yakınında tutulmalıdır.

1.1.6 Kullanıcı yeterliliği

İşletme personeli, ürünlerin paket ve kesici uçlarındaki güvenlik etiketlerini ve güvenlik talimatlarını anlayabilmeli ve doğru bir şekilde uygulayabilmelidir. Kullanıcı, kullanıma aşına olmak ve güvenli kullanım sağlamak için bu kılavuzu okuyabilmeli ve anlayabilmelidir.

1.1.7 Tehlikeli kimyasalların kullanımı

Bu ürünün kullanıldığı yerde kimyasal ve/veya biyolojik tehlikeler olabilir. Bu ürünü kullanırken yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere ve protokollere uyun. Ürünlerin geliştirilmesi için Lovibond güvenliğe çok dikkat eder. Tehlikeli maddelerden kaynaklanan bazı tehlikeler önlenmez. Kendi kendine üretilen testler veya solüsyonlar kullanılırsa, bu testlerin veya solüsyonların neden olduğu risklerle ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir (kişisel sorumluluk).

1.1.8 İmha Etme

Pilleri ve elektrikli aletleri yerel yasal düzenlemelere uygun olarak uygun bir tesise atın. Pillerin evsel atıklarla birlikte atılması yasa dışıdır. Avrupa Birliği içinde, piller cihazın ömrünün sonunda özel bir geri dönüşüm toplama noktasına atılır.



Bu sembolle işaretlenmiş aletler normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

1.2 Belgede kullanılan tüm karakterlerin listesi

Bu kılavuzda, özel dikkat gerektiren bölümleri tanımlamak için aşağıdaki semboller kullanılır:



Tehlike!

Önlenmezse ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açan bir tehlike vardır!



Uyan!

Bazı reaktiflerin yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verebilir. Her durumda, ambalaj üzerindeki güvenlik etiketleri, paket broşüründeki güvenlik talimatları ve mevcut güvenlik veri sayfası hakkındaki bilgileri izleyin. Orada ortaya konan koruyucu önlemlere kesinlikle uyulmalıdır.



Dikkat!

Küçük veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek bir tehlike mevcuttur.



Not!

Önemli bilgilere veya özel talimatlara uyulmalıdır.

2 Ürüne Genel Bakış

2.1 Semboller için rehber

Kişisel yaralanmaları veya ürüne zarar vermemek için ürüne yapıştırılan etiketlere kesinlikle uyulmalıdır. Bu tür bir etiketin mevcut olduğu durumlarda herhangi bir işlem yapmadan önce tehlike veya riskin doğası hakkında bilgi için bu bölüme bakın.



Avrupa Birliği'ndeki profesyonel kullanıcılar için:

Elektrikli ve elektronik ekipmanı (EEE) atmak isterseniz, daha fazla bilgi için lütfen satıcınız veya tedarikçinizle iletişime geçin.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde bertaraf için:

Bu sembol yalnızca Avrupa Birliği'nde (EU) geçerlidir. Bu ürünü atmak istiyorsanız, lütfen yerel yetkililerle veya bayinizle iletişime geçin ve doğru imha yöntemini öğrenin.

2.3 Özellikleri

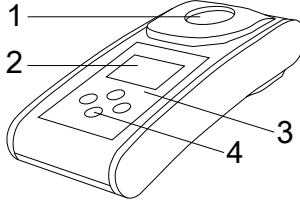
Lovibond MD50 ve MD150 fotometreler, kullanıcı dostu arayüzü ile yüksek düzeyde doğruluk ve verimlilik sağlar.

- Sağlam tasarım, Su ve Toz geçirmez.
- Daha yüksek doğruluk sağlamak için yenilikçi optik sistem.
- Çok renkli arka ışık.
- En son yöntemleri içerecek şekilde güncellenebilir.
- Küresel kullanım için simgeler ve semboller içeren dil dışı kullanıcı arayüzü.
- Hafıza kapasitesi 100 veri setine kadar.
- NFC aracılığıyla AqualX Uygulamasına kablosuz veri aktarımı.
- USB Kablosu ile PC'ye kablolu veri aktarımı.
- Bir kullanıcı yöntemini içe aktarmak ve cihazı güncellemek için PC yazılımı.

2.4 Ürün Açıklaması

Lovibond'un MD50 serisi, Havuz suyu, içme suyu, endüstriyel su veya atık su uygulamalarında belirli parametreleri ölçmek isteyen müşteriler için özel olarak tasarlanmış tek parametrelili fotometrelerdir. Dedektör üzerinde yeterli ışık elde etmek için yüksek kaliteli sabit LED ve monte edilmiş ışık kılavuzları ile cihazlar, ölçüm sonuçlarında yüksek doğruluk ve operasyonel verimlilik sağlar. MD50'nin Kompakt tasarımı, onu sahada ideal mükemmel bir el tipi cihaz haline getirir. Lovibond cihazları, yerel olarak üretilen reaktifler ve test standartları yardımıyla su analizi endüstrisindeki gereksinimleri karşılamak için eksiksiz bir çözüm sunar.

2.4.1 Enstrüman görünümü



Ön taraf

- 1 - Numune Odası
- 2 - Ekran
- 3 - Model Numarası
- 4 - Güç düğmesi



TR

2.4.2 Anahtarların ve anahtarların açıklaması

Tuş	İşlev
	Güç AÇMA/KAPAMA tuşu Enstrümanı açar veya kapatır aşağı doğru kaydırmak için kullanılır
	Test anahtarı Örnek ölçün Bir eylemi seçme veya onaylama
	Arka anahtar Önceki menüye geri dön Arka ışığı açar veya kapatır
	Navigasyon tuşu Listeleri yukarı kaydırma Ayarlar menüsüne gidin


2.4.3 Arayüz açıklaması

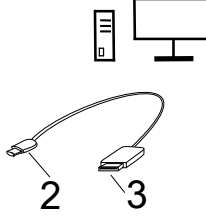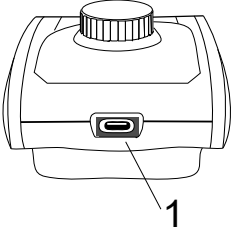1. PC yazılımı aracılığıyla veri aktarımı, güncellemeler ve yöntem içe aktarma için USB-C bağlantı noktası.



1. USB-C Bağlantı Noktası (su geçirmez)
2. USB-C
3. USB-A

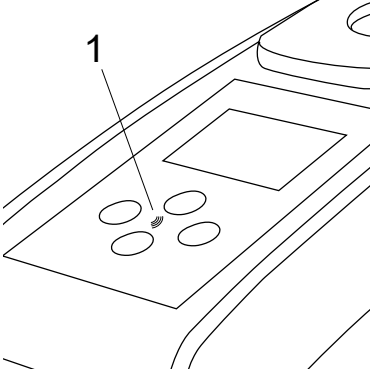2. Uygulama aracılığıyla akıllı cihazlara kablosuz veri aktarımı için NFC.



1. NFC alanı

3 Devreye alma

3.1 Çalışma ortamı

Cihaz, bir operatörün analizi gerçekleştirmesi için güvenli kabul edilen herhangi bir iç veya dış ortamda kullanılabilir. bununla birlikte, başıboş ışıktan kaynaklanan hataları önlemek için aleti parlak güneş ışığında kullanmamanız tavsiye edilir. Bu ortam, %90'a kadar yoğunlaşmış nem ile 5 ila 40 derece C sıcaklık aralığını içerir. Cihaz ve ortam arasındaki büyük sıcaklık farkları hatalara neden olabilir – örn. lens alanında veya küvet üzerinde yoğunlaşma oluşumu nedeniyle.

TR

3.2 Teslimat içeriği

Enstrüman

2 (AA) Pil

3 Örnek Hücre 24 mm Ø

3 Plastik karıştırma çubukları 10 cm

Fırça 11 cm

Tornavida

10 mL kılavuz

USB Kablosu

Kullanım klavuzu

Metotlar klavuzu (QR Kodu)

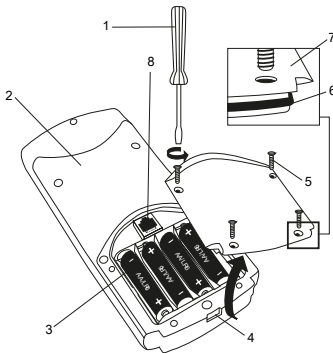
Uygunluk belgesi

Garanti Kitapçığı

Ekli kılıf

Her yöntem için reaktifler

3.3 Pilleri Takma ve Değiştirme



- 1 - tornavida
- 2 - alet geri
- 3 - pil
- 4 - çentik
- 5 - vida
- 6 - mühür halkası
- 7 - pil bölmesi kapağı
- 8 - Güncellemeler için RJ 45 konektörü

1. Aleti kapatın.
2. Gerekirse flakonu numune odasından çıkarın.
3. Aleti temiz ve düz bir yüzeye baş aşağı yerleştirin.
4. Pil bölmesi kapağının (7) bir vidasını (5) sökün.
5. Pil bölmesi kapağını (7) çentikten (4) kaldırın.
6. Eski pilleri (3) çıkarın.
7. 2 yeni pil yerleştirin. Doğru polariteyi sağlamak!
8. Pil bölmesi kapağını (7) kapatın. Sıkıştığından emin olmak için çentiğin conta halkasını (6) kontrol edin.
9. Vidaları (5) dikkatlice sıkın.



Dikkat!

Cihazın su geçirmez olduğundan emin olmak için:

- conta halkası yerinde olmalıdır
- pil bölmesi kapağı tüm vidalarla sabitlenmelidir



Dikkat!

Kullanılmış pilleri tüm federal, eyalet ve yerel yönetmeliklere uygun olarak atın.

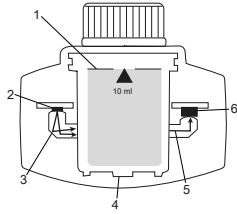
4 Operasyon

4.1 İlk devreye alma

- Pilleri bölüm 3.3'te açıklandığı gibi yerleştirin.
- Güç Aşağı tuşuna basarak cihazı açın.
- Ünite üzerinde önce şirket logosu görüntülenir.
- Cihazın aygıt yazılımı sürümü kısa bir süre için ekranda görüntülenecektir.
- Tarih ve saati 4.3.1'de açıklanan prosedürü takip ederek ayarlayın.
- Yalnızca istediğiniz yöntemleri görüntülemek için reaktif türünü seçin. Daha fazla ayrıntı için lütfen 4.3.1'de açıklanan prosedürü izleyin.
- Son olarak, ünitenin başlangıç ekranı olan bir yöntem listesi görüntülenir.

Not: Cihazın arka ışığı varsayılan olarak yanacaktır, arka ışığı kapatmak için lütfen 3 saniye boyunca Geri tuşuna basın.

4.2 Genel çalışma prensipleri



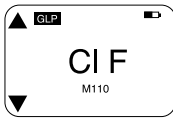

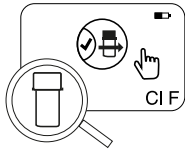



1. Örnek küvet
2. Işık kaynağı
3. Lightguide
4. Örnek odası
5. Işık Işını
6. Spektrometrik sensör + dedektör

Fotometre, standart analitik prosedürlerden türetilmiş önceden programlanmış metotlara sahiptir. Basitleştirilmiş ve hatasız analiz sağlamak için, reaktiflerle gerekli kalibrasyon eğrileri, reaksiyon süreleri ve dizileri bu yöntemlere programlanmıştır. Fotometrenin optik kurulumu bir ışık kaynağı, girişim filtreleri (belirli varyantlar) ve spektrometrik sensörden oluşur. Lovibond fotometrelerinde ışık kaynağı olarak enerji verimliliği yüksek ve fotometrenin kendi ömrü kadar uzun ömürlü olan LED'ler kullanılır. Yüksek kaliteli spektrometrik sensör, numuneden geçen ışık miktarını toplamak ve ölçmek için kullanılır ve konsantrasyonu dijital olarak hesaplayan ve sonuçları ilgili birimlerde görüntüleyen mikroişlemciye aktarır.

4.3 Kontrol elemanlarının listesi ve işlevleri

4.3.1 Kontrol elemanlarının listesi ve işlevleri

Fonksiyon	Açıklama	Fonksiyon nasıl yürütülür
	Enstrümanı açma/kapama	<ul style="list-style-type: none"> Cihazı açmak için Aşağı tuşu basın. Cihazı kapatmak için Aşağı tuşu basılı tutun.
	Arka Işık	<ul style="list-style-type: none"> Arka ışığı açmak veya kapatmak için geri tuşunu 3 saniye basılı tutun.
	Ölçüm modu	<ul style="list-style-type: none"> Son kullanılan yöntem ekranda gösterilecektir. Yöntem listesinde gezinin ve istediğiniz yöntemi seçin. Yöntemi seçmek için Test tuşuna basın.
	Önceki görünüme dön	<ul style="list-style-type: none"> Önceki ekrana geri dönmek için Geri tuşuna basın.
	Sıfır Gerçekleştir	<ul style="list-style-type: none"> 24 mm şişeyi 10 ml numune ile doldurun veya gerektiğinde 16 mm reaktif boş şişesi kullanın. Not: Her yöntemin farklı Blank gereksinimleri vardır, lütfen cihazı doğru şekilde blanklemek için yöntem prosedürünü izleyin. Lütfen son sayfadaki QR kodunu tarayarak yöntem açıklamasını indirin. Şişeyi kapatın. Numune şişesini numune haznesine yerleştirin. Konumlandırmaya dikkat edin! Cihazı boşaltmak için Test tuşuna basın. Geri sayım durumunda, ölçüm geri sayım bittikten sonra otomatik olarak gerçekleşir. Test düğmesine tekrar basarak geri sayım atlanabilir, ancak

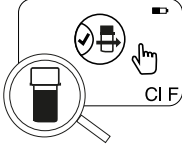Fonksiyon	Açıklama	Fonksiyon nasıl yürütülür
		<p>prosedürü takip etmeniz şiddetle tavsiye edilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ölçümden sonra boş küvet sembolü dolu küvete dönüşür (ekranın sol alt kısmı). <p>Not: Ayarlardan tüm yöntemler için zamanlayıcıları devre dışı bırakabilirsiniz.</p> <p>Dikkat: Yöntem prosedürleri takip edilmezse testlerin doğruluğu garanti edilemez.</p>
	Test Gerçekleştirin	<p>Lütfen yöntem açıklamasında açıklanan prosedürü izleyerek numune şişesini hazırlayın. Lütfen son sayfadaki QR kodunu tarayarak yöntem açıklamasını indirin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Testi gerçekleştirmek için Test tuşuna basın. Bazı yöntemlerde Test tuşuna basmadan önce veya sonra entegre zamanlayıcılar vardır. Geri sayım bittiğinde cihaz ölçümü gerçekleştirecektir. Bir kullanıcı Test tuşuna tekrar basarak geri sayımı atlayabilir, ancak yöntem prosedürünü takip etmesi şiddetle tavsiye edilir. <p>Not: Ayarlardan tüm yöntemler için zamanlayıcıları devre dışı bırakabilirsiniz.</p> <p>Dikkat: Yöntem prosedürleri takip edilmezse testlerin doğruluğu garanti edilemez.</p>
$Cl_2 F + Cl_2 T =$ $mg/L Cl_2 comb$	Birleştirilmiş yöntemler	<p>Bazı yöntemler belirli parametrelerin konsantrasyonunu hesaplamak için birbirine bağlanmıştır. Bu durumda, ilk kısmi yöntemin sonucu görüntülenmez ve cihaz ikinci kısmi yöntemle devam eder. İşlem tamamlandığında, hesaplanan nihai sonuç ile kısmi yöntemin sonucu arasında geçiş yapmak için aşağı veya yukarı düğmesine basın.</p>

Fonksiyon

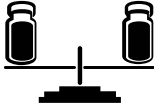
mg/L Cl₂ F ⇌
mg/L Br₂

Açıklama

Atıf formunu değiştir

Fonksiyon nasıl yürütülür

- Sonuç varsayılan atıf formunda görüntülenir.
- Atıf formunu değiştirmek için yukarı veya aşağı düğmesine basın.
- Seçilen yeni atıf formu cihaz tarafından varsayılan olarak kaydedilir ve varsayılan geri dönülmediği sürece sonuçları bu atıf formunda gösterir.



Kullanıcı kalibrasyonu

- Kullanıcı kalibrasyonu için, su numunesi yerine konsantrasyonu bilinen bir standart ile bir test seçin ve gerçekleştirin.
- Sonuçlar görüntülendiğinde Test tuşunu 3 saniye basılı tutun.
- Cihaz kalibrasyon moduna geçer.
- Görüntülenen değeri hedef değerle eşleştirecek şekilde artırmak / azaltmak için Yukarı tuşuna veya Aşağı tuşuna basın.
- Ayarlanan değeri kabul etmek için Geri tuşu basın. Sıfır tuşuna basarak kalibrasyonu istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
- Yöntem numarası ile bir günlük girişi oluşturulacaktır. "Calib" ve Kalibrasyon faktörü ile tarih ve saat damgası.



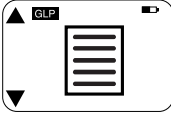
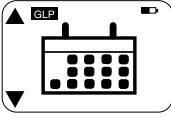
Absorbans

Absorbans ölçümü, konsantrasyon yöntemleriyle aynı prosedürü izleyecektir. Absorbans yöntemini seçmek için yöntemler listesini kaydırın. Mevcut her dalga boyu için absorbans yöntemleri listede görüntülenecektir.



Ayarlar menüsü

- Ana menüdeyken, ayarlar menüsüne girmek için yukarı tuşunu 3 saniye basılı tutun.
- Farklı ayar seçeneklerini görüntülemek için yukarı ve aşağı kaydırın.


Fonksiyon	Açıklama	Fonksiyon nasıl yürütülür
	Günlükleri görüntüle	<ul style="list-style-type: none"> Sembol görüntülediğinde günlüklere girmek için Test tuşuna basın. Cihaz, kaydedilen tüm sonuçların/protokollerin listesini görüntüler Listedeki sonuçlar arasında gezinmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Tüm sonuçlar ve protokoller aktarım için varsayılan olarak önceden seçilidir. Bireysel sonuçları seçmek/seçimini kaldırmak için Test tuşuna basın. Tüm sonuçları seçmek/seçimi kaldırmak için Test tuşunu 3 saniye basılı tutun. Sonuçları NFC aracılığıyla aktarmak için Yukarı tuşunu 3 saniye basılı tutun. Önceki menüye dönmek için Geri tuşuna basın.
	Tarih ayarı	<ul style="list-style-type: none"> Tarih ayarlama menüsünü açmak için Test tuşuna basın. Biçim arasında geçiş yapmak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Formatı onaylamak için Test tuşuna basın. Tarihi ayarlamak için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın. Ok son haneye geldiğinde, onaylamak için Test tuşuna basın veya önceki konuma dönmek için Geri tuşuna basın. Tarih ayarlanır ve cihaz ayarlar menüsüne geri döner. Tarih değişikliği için kayıtlarda bir protokol girişi oluşturulacaktır.

Fonksiyon

Açıklama

Fonksiyon nasıl yürütülür

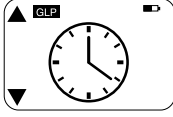Zaman ayarı




- Zaman ayarı menüsünü açmak için Test tuşuna basın.
- Değeri azaltmak veya artırmak için Aşağı düğmesine veya Yukarı düğmesine basın.
- Ok son konuma geldiğinde, onaylamak için Test düğmesine basın veya geri dönmek ya da ayarı iptal etmek için Geri düğmesine basın.
- Zaman değişikliği için günlüklerde bir protokol girişi oluşturulacaktır.

One Time Zero





- Bazı yöntemler ölçüm işlemini daha verimli hale getirmek için Tek Seferlik Sıfırlama sunar.
- Ayarlar menüsünde OTZ ögesini seçmek için aşağı veya yukarı düğmesine basın.
 - OTZ'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Test tuşuna basın.
 - Yöntemde açıklandığı gibi sıfırlama yapın, cihaz bu sıfırı kaydeder ve cihaz kapatılmadığı veya yeni bir sıfırlama yapılmadığı sürece sonraki ölçümler için kullanır.
 - Ölçüm sırasında ekranda bir OTZ simgesi görüntülenecek ve günlüklerde ayrı bir giriş olarak protokole alınacaktır.

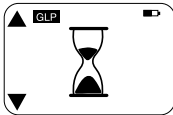Not: Geri tuşuna basarak ve yeni bir sıfırlama yaparak OTZ'nin üzerine her zaman yazabilirsiniz.

Zamanlayıcılar açık/
kapalı

- Ayarlar menüsünden Zamanlayıcılar simgesine gitmek için Yukarı veya Aşağı tuşuna basın.
- Bu ayar aracılığıyla tüm yöntemler için entegre zamanlayıcıları devre dışı bırakabilirsiniz.
- Zamanlayıcıyı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için test düğmesine basın.
- Bunun için günlüklerde zaman damgalı bir giriş oluşturulur.

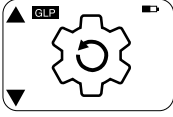Dikkat: Doğru sonuçlar elde etmek için yöntem prosedürlerinde entegre

Fonksiyon	Açıklama	Fonksiyon nasıl yürütülür
	Fabrika ayarlarına sıfırlama	<p>zamanlayıcıların takip edilmesi önerilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabrika ayarları menüsüne gitmek için Aşağı düğmesine veya Yukarı düğmesine basın. Fabrika ayarlarını seçmek için Test düğmesine basın. İşlemi onaylamak için Test düğmesine tekrar basın veya sıfırlamayı iptal etmek için Geri düğmesine basın. Günlüklerde zaman damgası içeren bir giriş oluşturulur. <p>Not: Sıfırlama işlemi kullanıcı yöntemlerini, kullanıcı kalibrasyonunu ve kaydedilen tüm sonuçları siler. Dikkat: Lütfen cihazı sıfırlamadan önce tüm sonuçları aktarın.</p>
	Reaktif türünü seçin	<p>Reaktif türünün seçilmesi, Ana menüde yalnızca seçilen yöntemleri görüntülemenizi ve diğer reaktif türlerinin yöntemlerini gizlemenizi sağlar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reaktif türünü seçme menüsüne gitmek için aşağı veya yukarı düğmesine basın. Menüye erişmek için Test düğmesine basın. Diğer seçeneklere gitmek için Aşağı veya Yukarı düğmesine basın veya istenen reaktif türünü seçmek için Test düğmesine basın.

4.5 Veri aktarımı

Tüm verileri veya seçilen verileri uygulamaya veya PC yazılımına aktarabilirsiniz. Kaydedilen sonuçları görüntülemek için lütfen ayarlar menüsündeki günlük simgesini seçin.

MD 50 veri aktarımı için iki seçenek sunar:

1. USB kablosu ile veri aktarımı
2. NFC üzerinden veri aktarımı

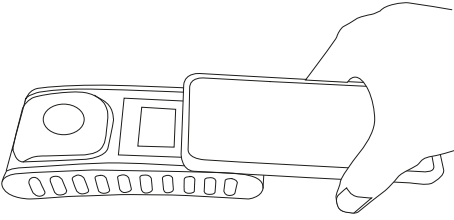
4.5.1 USB üzerinden veri aktarımı

- USB kablosu ile veri aktarımı için Lovibond web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen yazılım Lovibond® Data Expert gereklidir.
- Lütfen yazılımı bilgisayarınıza kurun ve yazılımdaki veri aktarım talimatlarını izleyin.
- Bağlandıktan sonra, cihaz durum çubuğunda USB Sembölü gösterecektir.
- Bölüm 4.3.1'de açıklandığı gibi Günlükler menüsüne gidin ve USB üzerinden aktarılacak belirli veya tüm sonuçları seçin.

Not: Veri aktarım işlemini başlatmak için fotometre üzerinde herhangi bir işlem yapılması gerekmez.

4.5.2 NFC üzerinden veri aktarımı

- Ölçüm sonuçlarını NFC aracılığıyla aktarmak için, bölüm 4.3.1'de açıklandığı gibi Günlükler menüsüne gidin ve NFC üzerinden aktarılacak belirli veya tüm sonuçları seçin.
 - Sonuçları NFC etiketine kaydetmek için YUKARI tuşunu basılı tutun.
 - AqualX uygulamasını açın ve sonuçları aktarmak için akıllı cihazı cihaza yaklaştırın (resimde gösterildiği gibi).
 - Ayarlar menüsüne dönmek için geri düğmesine basın.
- Not:** Ayarlar menüsüne döndüğünüzde, NFC etiketindeki tüm veriler silinir
- Akıllı cihazda NFC'nin etkin olduğundan emin olun.



5 Bakım

5.1 Yeniden başlatılan bakım programı

Görev	Ne Yapmalı	Ne yapmamalısınız
Cihazı ve ölçüm odasını temizleyin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ölçüm odasını tiftiksiz, nemli bezler (yağsız) veya pamuk çubuklar kullanarak temizleyin. 2. Muhafaza yüzeyi kirliyse, yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla silin. 3. Kimyasal madde sıçramalarını mümkün olan en kısa sürede giderin. 4. Dezenfeksiyon için, kısa süreli temizlik için izopropanol kullanabilirsiniz. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sıkıca kapatılmamış bir küvet kullanmayın. Solvent içeren temizlik maddeleri kullanmayın. Herhangi bir kimyasalı doğrudan numune haznesine püskürtmeyin veya dökmeyin.
Temiz Aksesuarlar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paraziti önlemek için şişeler, kapaklar ve karıştırma çubukları her analizden sonra iyice temizlenmelidir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kusurlar, çizikler veya çatlaklar gibi görünür kusurları olan bir küvet kullanmayın. 2. Dışarıdan tamamen kuru olmayan şişeler kullanın.
Pil Değiştirme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pil sızıntısını önlemek için cihazı uzun süre saklarken pilleri çıkarın. 2. Her zaman şarj edilemeyen piller kullanın. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belirtilmeyen pil türlerini kullanmayın.
Depolama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cihazı ve aksesuarları belirtilen ortam koşullarında saklayın. 	



Uyarı!

Bazı reaktiflerin yanlış kullanımı sağlığınıza zarar verebilir. Her durumda, ambalaj üzerindeki güvenlik etiketleri, paket broşüründeki güvenlik talimatları ve mevcut güvenlik veri sayfası hakkındaki bilgileri izleyin. Orada ortaya konan koruyucu önlemlere kesinlikle uyulmalıdır.

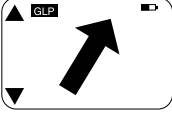
6 Sorun giderme

6.1 Hata mesajları ve yapılması gerekenler

Görüntülemek

Olası Nedenler

Ne yapmalı



Aşırı aralık - Okuma aralığı aşılıyor.

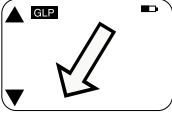
Numuneyi seyreltin.

Su numunesi çok bulanık.

Su örneğini süzün.

Dedektör üzerinde çok fazla ışık var.

Küvet kapağındaki contayı kontrol edin.



Aralık altında - Okuma, yöntemin tespit limitinin altındadır.

Reaktiflerin dozajının ve reaksiyon sürelerinin yöntemin talimatlarına uygun olduğundan emin olun.

Ölçülecek parametrenin yeterince yüksek konsantrasyonuna sahip olduğundan emin olmak için numuneyi kontrol edin.



Dedektör üzerinde yetersiz ışık.

Işığı engelleyen toz partiküllerini temizlemek için ölçüm odasını temizleyin.



Hesaplama hatası.

Alet derhal kapatılır

Pil zayıf

Pilleri değiştirin.



7 Aksesuarlar ve Yedek parçalar

7.1 Aksesuar Listesi

6 yuvarlak küvet için küvet Ø 24 mm	418951
24 mm'lik yuvarlak küvetler için küvet keçesi, 12'li set	197626
250 mL şişe, AF 631	375072
250 mL şişe ve kapakla birlikte numune toplama ünitesi, AF 631	170500
CI M100 (MD50) yöntemi için Fabrika Kalibrasyon sertifikası ISO 9001	999720
CI M110 (MD50) yöntemi için Fabrika Kalibrasyon sertifikası ISO 9001	999721
Doğrulama standardı kiti MD50	215700
Fırça, uzunluk 11 cm	380230
Kapaklı yuvarlak küvet Ø 24 mm, 48 mm yükseklik, 10 ml, 5'li set	197629
Kapaklı yuvarlak küvet Ø 24 mm, 48 mm yükseklik, 10 ml, 12'li set	197620
MD50 için Fabrika Kalibrasyon sertifikası ISO 9001	999756
MD50 için sabit fiyatlı hizmet paketi	19802710
Ölçü kabı, 100 ml	384801
Plastik karıştırma çubuğu, 10 cm uzunluk	364109
Plastik karıştırma çubuğu, 10 cm uzunluk, 10'lu set	364130
Plastik karıştırma çubuğu, 13 cm uzunluk	364100
Plastik karıştırma çubuğu, 13 cm uzunluk, 10'lu set	364120
Referans standardı kiti Klor 0,2 ve 1,0 mg/l (MD50)	275620
Referans standardı kiti Klor 0,5 ve 2,0 mg/l (MD50)	275621
Referans standardı kiti Klor 1,0 ve 4,0 mg/l (MD50)	275622
Servis planı - MD50 için 3 yıl	19802810
Tapalı karıştırma silindiri, molibden LR'nin MD 100 (276140) ile tespiti için gerekli bir aksesuardır	19802650
Temizleme Bezi	197635
Tutamaklı plastik huni	471007
USB-C kablosu 1 m, USB-C - A	19820-081

TR

8 Özellikler

Optikler	LED, spektrometre sensörü, parazit filtresi (yalnızca seçili varyantlar)
Işık Kaynağı	LED
Dalga Boyu	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Fotometrik Aralık	0 - 3 Abs
Fotometrik Doğruluk	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
Uygun Şişeler	<ul style="list-style-type: none"> • Yuvarlak Küvetler 13 mm • Yuvarlak Küvetler 16 mm • Yuvarlak Küvetler 24 mm
Ekran	Arka plan aydınlatmalı LCD
Arayüzler	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
Veri Aktarım Formatı	.csv
Kullanım	Folyo klavye
Auto – OFF	Evet
Programlanabilirlik	PC yazılımı ile evet
Kalibrasyon	Fabrika ve kullanıcı ayarı - her zaman fabrika ayarına geri dönüş mümkündür
Güncellemeler	Ürün yazılımı ve yöntem güncellemesi
Dahali Depolama	100 veri kaydı için dahili halka bellek
Pil Ömrü	yaklaşık 5000 ölçüm (arka ışısız)
Taşınabilirlik	Portable
Kirlilik Derecesi	2
Deniz seviyesinden maksimum yükseklik	3500
Çevre Koşulları	30 - %95 bağıl nemde (yoğuşmasız) 5 - 50 °C
Koruma Sınıfı	IP 67
Uygunluk	CE

Diller Tam Kullanım Kılavuzu	<ul style="list-style-type: none">• Almanca• Çince• Flemenkçe• Fransızca• İngilizce• İspanyolca• İtalyanca• Portekizce• Rusça• Tükçe
------------------------------	---

Boyutlar	155 x 76 x 45 mm
----------	------------------

Ağırlık	247 g
---------	-------

**Dikkat!**

Teknik değişikliğe tabidir!

Test sonuçlarının maksimum doğruluğunu sağlamak için daima cihaz üreticisi tarafından sağlanan reaktif sistemlerini kullanın.

9 Ekler

9.1 Telif Hakkı ve Ticari Marka Bildirimi

iOS®, Cisco, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve Apple, Inc.'e lisanslanmıştır.
iTunes Store®, Apple, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır.
Android™ ve Google Play™, Google, Inc.'in ticari markasıdır.
Excel®, Microsoft Corp.'un ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

Оглавление

Photometer Series	
1 Введение	205
1.1 Общая информация	205
1.1.1 Прочтите инструкцию перед использованием	205
1.1.2 Назначение продукта	205
1.1.3 Разрешенное использование	205
1.1.4 Требования к безопасному использованию	205
1.1.5 Соблюдайте инструкции	206
1.1.6 Квалификация пользователя	206
1.1.7 Обращение с опасными химическими веществами	206
1.1.8 Инструкции по утилизации	206
1.2 Список всех символов, используемых в документе	207
2 Обзор продукции	208
2.1 Руководство по символам	208
2.3 Характеристики	208
2.4 Описание продукта	208
2.4.1 Вид на прибор	209
2.4.2 Описание клавиш и переключателей	209
2.4.3 Описание интерфейса	210
3 Ввод в эксплуатацию	211
3.1 Условия эксплуатации	211
3.2 Содержание поставки	211
3.3 Установка и замена батареек	212
4 Операция	213
4.1 Первый запуск	213
4.2 Общие принципы работы	213
4.3 Список элементов управления и их функции	214
4.3.1 Список элементов управления и их функции	214
4.5 Передача данных	220
4.5.1 Передача данных через USB	220
4.5.2 Передача данных через NFC	220
5 Техническое обслуживание	222
5.1 Повторный график технического обслуживания	222
6 Устранение неполадок	224
6.1 Сообщения об ошибках и что делать	224
7 Аксессуары и запасные части	225
7.1 Список принадлежностей	225
8 Технические характеристики	227

9 Appendix	229
9.1 Уведомление об авторских правах и товарных знаках	229

1 Введение

1.1 Общая информация

1.1.1 Прочтите инструкцию перед использованием

В данном руководстве содержится важная информация о безопасной эксплуатации изделия. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и ознакомьтесь с изделием перед использованием.

RU

1.1.2 Назначение продукта

Фотометры Lovibond предназначены для измерения различных параметров в водных образцах в различных областях применения, таких как питьевая вода, сточные воды, вода для промышленной обработки, вода для бассейнов, наука и исследования.

Фотометры Lovibond подходят для использования как в лабораторных условиях в качестве настольных, так и в полевых условиях в качестве портативных приборов. Для портативности приборы поставляются в прочных кейсах с необходимыми аксессуарами.

На работу приборов может повлиять воздействие экстремального света и температуры, поэтому приборы всегда должны использоваться в рекомендуемых условиях окружающей среды.

1.1.3 Разрешенное использование

Ответственность производителя и гарантия на повреждения аннулируются при неправильном использовании, несоблюдении данного руководства, использовании неквалифицированным персоналом или внесении несанкционированных изменений в изделие.

Производитель не несет ответственности за расходы или убытки, возникшие по вине пользователя или третьих лиц вследствие использования данного изделия, особенно в случаях неправильного использования изделия, неправильного применения или неисправностей при подключении изделия.

Производитель не несет ответственности за ошибки при печати.

1.1.4 Требования к безопасному использованию

Обратите внимание на следующие пункты для безопасного использования:

- Если оборудование используется способом, не указанным производителем, защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть нарушена.
- Изделие можно использовать только в соответствии с указанным выше разрешенным использованием.
- Питание изделия может осуществляться только от источников энергии, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Изделие можно использовать только в условиях окружающей среды, указанных в данном руководстве по эксплуатации.
- Запрещается вскрывать или модифицировать изделие.

Запрещается использовать изделие, если:

- оно имеет видимые повреждения (например, после транспортировки)
- оно длительное время хранилось в неблагоприятных условиях (условия хранения, см. главу "Технические характеристики")

1.1.5 Соблюдайте инструкции

Руководство должно храниться рядом с изделием, чтобы вы всегда могли найти необходимую информацию.

1.1.6 Квалификация пользователя

Обслуживающий персонал должен уметь понимать и правильно применять этикетки безопасности и инструкции по технике безопасности на упаковках и вкладышах изделий.

Пользователь должен быть способен и иметь возможность прочитать и понять данное руководство, чтобы ознакомиться с правилами обращения и обеспечить безопасное использование.

1.1.7 Обращение с опасными химическими веществами

При использовании данного продукта могут существовать химические и/или биологические опасности. Соблюдайте все законы, правила и протоколы при использовании данного продукта.

При разработке продуктов компания Lovibond уделяет пристальное внимание безопасности. Некоторых опасностей, связанных с опасными веществами, избежать невозможно. Если используются самостоятельно изготовленные тесты или растворы, ответственность за любые риски, вызванные этими тестами или растворами, лежит на пользователе (личная ответственность).

1.1.8 Инструкции по утилизации

Утилизируйте батареи и электрооборудование на подходящем объекте в соответствии с местным законодательством.

Выбрасывать батарейки вместе с бытовыми отходами запрещено законом.

В Европейском Союзе по окончании срока службы устройства батареи утилизируются в специализированных пунктах приема вторсырья.



Приборы, отмеченные этим символом, нельзя выбрасывать в обычные бытовые отходы.

1.2 Список всех символов, используемых в документе

Следующие символы используются в данном руководстве для обозначения разделов, требующих особого внимания:



Опасность!

Существует опасность, которая может привести к смерти или серьезным травмам, если ее не избежать!



Предупреждение!

Неправильное обращение с некоторыми реагентами может нанести вред вашему здоровью. В любом случае следуйте информации на этикетках безопасности на упаковке, инструкциям по безопасности во вкладыше к упаковке и имеющемуся паспорту безопасности. Необходимо точно соблюдать указанные там защитные меры.



Внимание!

Существует опасность, которая может привести к травмам легкой или средней тяжести.



Примечание

Необходимо соблюдать важную информацию или специальные инструкции.

2 Обзор продукции

2.1 Руководство по символам

Во избежание травм или повреждения изделия следует строго соблюдать этикетки, прикрепленные к изделию. Прежде чем предпринимать какие-либо действия при наличии такой надписи, обратитесь к данной главе за информацией о характере опасности или риска.



Для профессиональных пользователей в Европейском Союзе:

Если вы хотите утилизировать электрическое и электронное оборудование (ЭЭО), обратитесь к своему дилеру или поставщику за дополнительной информацией.

Для утилизации в странах за пределами Европейского Союза:

Этот символ действителен только в Европейском Союзе (ЕС). Если вы хотите выбросить это изделие, обратитесь к местным властям или дилеру и попросите указать правильный способ утилизации.

2.3 Характеристики

Фотометры Lovibond MD50 и MD150 обеспечивают высокий уровень точности и эффективности при удобном интерфейсе.

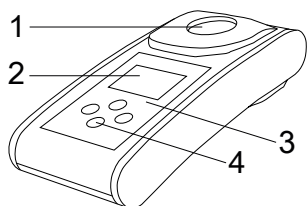
- Прочная конструкция, водо- и пылезащищенная.
- Инновационная оптическая система для обеспечения высокой точности.
- Многоцветная подсветка.
- Возможность обновления для включения новейших методов.
- Неязыковой пользовательский интерфейс с иконками и символами для глобального использования.
- Объем памяти до 100 наборов данных.
- Беспроводная передача данных через NFC в приложение AquaLX App.
- Проводная передача данных через кабель USB на ПК.
- Программное обеспечение для ПК для импорта одного пользовательского метода и обновления прибора.

2.4 Описание продукта

Lovibond MD50 и MD150 - это серии одно- и многопараметрических фотометров, разработанных специально для тех, кто хочет измерить конкретные параметры воды в бассейне, питьевой воды, промышленной воды или сточных вод. Благодаря высококачественному стабильному светодиоду и установленным световодам для достижения достаточного светового потока детектора, приборы обеспечивают высокую точность результатов измерений и эффективность работы. Компактный дизайн MD50 и MD150 делает их идеальными портативными приборами, идеально подходящими для работы в полевых условиях. Приборы Lovibond с помощью

реагентов и стандартов испытаний местного производства обеспечивают полное решение для удовлетворения требований в области анализа воды.

2.4.1 Вид на прибор



Передняя сторона
 1 - Камера для образцов
 2 - дисплей
 3 - Номер модели
 4 - Кнопка питания



RU

2.4.2 Описание клавиш и переключателей

кнопка	Функция
	Клавиша включения/выключения питания Включает или выключает прибор используется для прокрутки вниз
	Клавиша "Тест" Измерение образца Выбор или подтверждение действия
	Клавиша Назад Возврат к предыдущему меню Включение или выключение подсветки
	Навигационная клавиша Прокрутка списков вверх Переход в меню настроек


2.4.3 Описание интерфейса

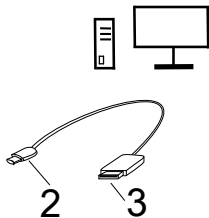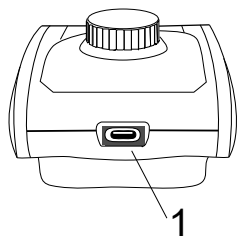1. Порт USB-C для передачи данных, обновления и импорта методов через программное обеспечение ПК.



1. Порт USB-C (водонепроницаемый)
2. USB-C
3. USB-A

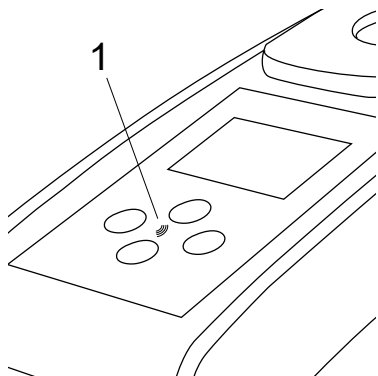2. NFC для беспроводной передачи данных на смарт-устройства через приложение.



1. Поле NFC

3 Ввод в эксплуатацию

3.1 Условия эксплуатации

Прибор можно использовать в любых условиях в помещении или на открытом воздухе, которые считаются безопасными для проведения анализа оператором. Однако рекомендуется не использовать прибор при ярком солнечном свете, чтобы избежать ошибок, вызванных рассеянным светом. Эта среда включает в себя диапазон температур от 5 до 40 градусов С при влажности без конденсации до 90%. Большая разница температур между прибором и окружающей средой может привести к ошибкам - например, из-за образования конденсата в области линзы или на пробирке.

RU

3.2 Содержание поставки

Инструмент

2 батарейки (AA)

3 ячейки для образцов 24 мм Ø

3 Пластиковый перемешивающие стержни 10 см

Щетка 11 см

Отвертка

Направляющая на 10 мл

Кабель USB

Инструкция по эксплуатации

Руководство по методам (QR-код)

Сертификат соответствия

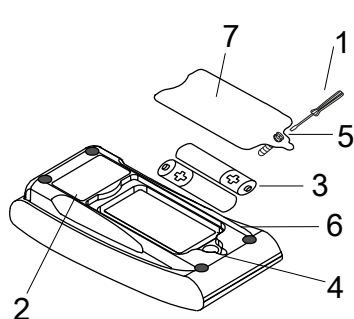
Гарантийный буклет

Картонная коробка

Футляр со вставкой

Реагенты для метода

3.3 Установка и замена батареек



- 1 - отвертка
- 2 - задняя панель прибора
- 3 - батарея
- 4 - выемка
- 5 - винт
- 6 - уплотнительное кольцо
- 7 - крышка батарейного отсека

1. Выключите прибор.
2. При необходимости извлеките пробирку из камеры для образца.
3. Поместите прибор вверх дном на чистую и ровную поверхность.
4. Открутите один винт (5) крышки батарейного отсека (7).
5. Поднимите крышку батарейного отсека (7) по вырезу (4).
6. Извлеките старые батарейки (3).
7. Установите 2 новые батарейки. Соблюдайте правильную полярность!
8. Закройте крышку батарейного отсека (7). Проверьте уплотнительное кольцо (6) в выемке, чтобы убедиться, что оно плотно прилегает.
9. Осторожно затяните винты (5).

**Внимание!**

Чтобы обеспечить водонепроницаемость прибора:

- уплотнительное кольцо должно быть на месте
- крышка батарейного отсека должна быть закреплена всеми винтами

**Внимание!**

Утилизируйте использованные батареи в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными нормами.

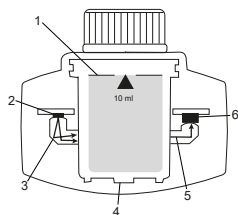
4 Операция

4.1 Первый запуск

- Вставьте батарейки, как описано в главе 3.3.
- Включите прибор, нажав клавишу уменьшения мощности.
- Сначала на экране устройства отобразится логотип компании.
- На экране на короткое время отобразится версия прошивки прибора.
- Установите дату и время, следуя процедуре, описанной в разделе 4.3.1.
- Выберите тип реагента для отображения только нужных методов. Для получения более подробной информации следуйте процедуре, описанной в разделе 4.3.1.
- Наконец, отображается список методов, который является экраном запуска устройства.

Примечание: Подсветка прибора включена по умолчанию, чтобы выключить подсветку, нажмите кнопку Back и удерживайте ее в течение 3 секунд.

4.2 Общие принципы работы



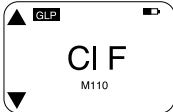

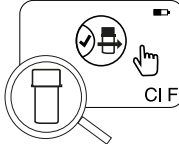



1. Кювета для образцов
2. Источник света
3. Световод
4. Камера для образца
5. Световой луч
6. Спектрометрический датчик + детектор


Фотометр имеет запрограммированные методы, которые основаны на стандартных аналитических процедурах. Для обеспечения упрощенного и безошибочного анализа в этих методах запрограммированы необходимые калибровочные кривые с реагентами, время реакции и последовательность действий. Оптическая система фотометра состоит из источника света, интерференционных фильтров (определенных вариантов) и спектрометрического датчика. В фотометрах Lovibond в качестве источника света используются светодиоды, которые отличаются высокой энергоэффективностью и длительным сроком службы, равным сроку службы самого фотометра. Высококачественный спектрометрический датчик используется для сбора и измерения количества света, проходящего через образец, и передает его на микропроцессор, который в цифровом виде вычисляет концентрацию и отображает результаты в соответствующих единицах.





4.3 Список элементов управления и их функции

4.3.1 Список элементов управления и их функции

Функция	Описание	Как выполнить функцию
	Включение/ выключение прибора	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите Клавиша Вниз, чтобы включить прибор. • Нажмите и удерживайте Клавиша Вниз чтобы выключить прибор.
	Подсветка	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте кнопку "Назад" в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить подсветку.
	Режим измерения	<ul style="list-style-type: none"> • На дисплее отобразится последний использованный метод. • Перейдите по списку методов и выберите нужный метод. • Нажмите кнопку Test, чтобы выбрать метод.
	Вернуться к предыдущему просмотру	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
	Выполните обнуление	<ul style="list-style-type: none"> • Заполните 24-миллилитровый флакон образцом объемом 10 мл или используйте 16-миллилитровый флакон для реагентного бланка, если необходимо. • Примечание: Для каждого метода существуют свои требования к холостым пробам, пожалуйста, следуйте процедуре метода для правильной очистки прибора. Пожалуйста, загрузите описание метода, отсканировав QR-код на последней странице. • Закройте флакон. • Поместите флакон с образцом в камеру для образцов. Обратите внимание на расположение! • Нажмите кнопку Test, чтобы очистить прибор.

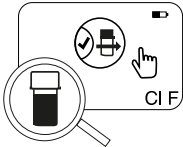Функция	Описание	Как выполнить функцию
		<ul style="list-style-type: none"> • В случае обратного отсчета измерение происходит автоматически после окончания отсчета. • Обратный отсчет можно пропустить, повторно нажав кнопку тестирования, но настоятельно рекомендуется выполнить эту процедуру. • После измерения символ пустой кюветы меняется на символ полной кюветы (в левой нижней части дисплея). <p>Примечание: В настройках можно отключить таймеры для всех методов.</p> <p>Внимание: Точность тестов не может быть гарантирована, если не соблюдаются процедуры метода.</p>
	<p>Выполните тест</p>	<p>Подготовьте пробирку с образцом, следуя процедуре, описанной в описании метода. Пожалуйста, загрузите описание метода, отсканировав QR-код на последней странице.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку Test, чтобы выполнить тест. • Некоторые методы имеют встроенные таймеры до или после нажатия кнопки Test. Прибор выполнит измерение, как только закончится обратный отсчет. • Пользователь может пропустить обратный отсчет, нажав кнопку Test еще раз, однако настоятельно рекомендуется следовать процедуре метода. <p>Примечание: Вы можете отключить таймеры для всех методов в настройках.</p> <p>Внимание: Точность тестов не может быть гарантирована, если не соблюдаются процедуры метода.</p>
$\text{Cl}_2 \text{ F} + \text{Cl}_2 \text{ T} = \text{mg/L Cl}_2 \text{ comb}$	<p>Конкатенированные методы</p>	<p>Некоторые методы связаны между собой для расчета концентрации определенных параметров.</p>

Функция	Описание	Как выполнить функцию
mg/L Cl ₂ F ⇌ mg/L Br ₂	Изменить форму цитирования	<p data-bbox="563 145 866 268">В этом случае результат первого частичного метода не отображается, и прибор продолжает работу со вторым частичным методом.</p> <p data-bbox="563 272 874 424">По завершении процедуры нажмите кнопку вниз или вверх, чтобы переключиться между рассчитанным итоговым результатом и результатом частичного метода.</p> <ul data-bbox="563 440 912 783" style="list-style-type: none"> • Результат отображается в стандартной форме цитирования. • Нажмите кнопку вверх или вниз, чтобы изменить форму цитирования. • Новая выбранная форма цитирования сохраняется прибором по умолчанию и будет показывать результаты в этой форме цитирования, пока не будет восстановлена форма по умолчанию.
	Калибровка пользователя	<ul data-bbox="563 807 912 1445" style="list-style-type: none"> • Для пользовательской калибровки выберите тест со стандартом известной концентрации вместо образца воды и выполните его. • Удерживайте кнопку Test в течение 3 секунд, когда на экране появятся результаты. • Прибор перейдет в режим калибровки. • Нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз" для увеличения/уменьшения отображаемого значения, чтобы оно совпало с заданным. • Нажмите кнопку Test, чтобы принять установленное значение. Вы можете отменить калибровку в любое время, нажав Клавиша Назад. • Будет создана запись в журнале с номером метода. "Calib" и коэффициент калибровки с отметкой даты и времени.

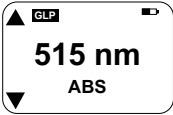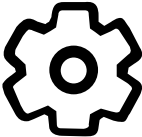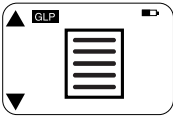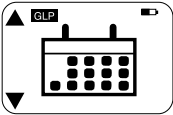Функция	Описание	Как выполнить функцию
	Измерение абсорбции	Измерение абсорбции выполняется по той же схеме, что и измерение концентрации. Прокрутите список методов, чтобы выбрать метод абсорбции. В списке будут отображены методы абсорбции для каждой доступной длины волны.
	Меню настроек	<ul style="list-style-type: none"> • Находясь в главном меню, нажмите и удерживайте кнопку вверх в течение 3 секунд, чтобы войти в меню настроек. • Прокрутите список вверх и вниз, чтобы просмотреть различные параметры настройки.
	Просмотр журналов	<ul style="list-style-type: none"> • При появлении символа нажмите кнопку Test, чтобы войти в журнал. • Прибор отобразит список всех сохраненных результатов/протоколов. • Нажмите кнопку Вверх или Вниз, чтобы прокрутить результаты в списке. • Все результаты и протоколы предварительно выбраны по умолчанию для передачи. • Нажмите кнопку Test, чтобы выбрать/отменить выбор отдельных результатов. • Нажмите и удерживайте кнопку Test в течение 3 секунд, чтобы выбрать/отменить выбор всех результатов. • Нажмите и удерживайте кнопку "Вверх" в течение 3 секунд, чтобы передать результаты через NFC. • Нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться в предыдущее меню.
	Установка даты	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите клавишу Test, чтобы открыть меню установки дат. • Нажмите клавишу Вверх или Вниз для переключения формата. • Нажмите клавишу Test, чтобы подтвердить формат.

Функция

Описание

Как выполнить функцию

- Нажмите кнопку Вверх или Вниз, чтобы настроить дату.
- Когда стрелка окажется на последней цифре, нажмите клавишу Test для подтверждения или клавишу Back для возврата в предыдущее положение. Дата установлена, и прибор возвращается в меню настроек.
- Для изменения даты в журналах будет создана запись протокола.



Установка времени

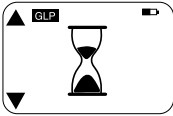
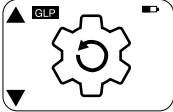

- Нажмите кнопку Test, чтобы открыть меню настройки времени.
- Нажмите кнопку «Вниз» или «Вверх», чтобы уменьшить или увеличить значение.
- Когда стрелка окажется в последнем положении, нажмите кнопку Test для подтверждения или кнопку Back для возврата назад или отмены настройки.
- В журнале будет создана запись протокола об изменении времени.



One Time Zero

- Некоторые методы предлагают функцию однократного обнуления, чтобы сделать процесс измерения более эффективным.
- Нажмите кнопку вниз или вверх, чтобы выбрать OTZ в меню настроек.
 - Нажмите кнопку Test, чтобы включить или выключить OTZ.
 - Выполните обнуление, как описано в методе, прибор сохранит этот ноль и будет использовать его для следующих измерений, пока прибор не будет выключен или не будет выполнено новое обнуление.
 - Значок OTZ будет отображаться на экране во время измерения и будет занесен в журнал как отдельная запись.

Примечание: Вы всегда можете перезаписать OTZ, нажав клавишу

Функция	Описание	Как выполнить функцию
	Включение/выключение таймеров	<p>"Назад" и выполнив новое обнуление.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку Вверх или Вниз, чтобы прокрутить значок Таймеры в меню настроек. • С помощью этой настройки можно отключить встроенные таймеры для всех методов. • Нажмите кнопку проверки, чтобы активировать/деактивировать таймер. • Для этого в журнале создается запись с отметкой времени. <p>Внимание: Для получения точных результатов рекомендуется использовать встроенные таймеры в методиках.</p>
	Сброс настроек	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку Вниз или Вверх для перехода к меню Заводские настройки. • Нажмите кнопку Test, чтобы выбрать заводские настройки. • Нажмите кнопку Test еще раз, чтобы подтвердить процесс, или нажмите кнопку Back, чтобы отменить сброс. • В журналах будет создана запись с отметкой времени.. <p>Примечание: При сбросе удаляются пользовательские методы, пользовательская калибровка и все сохраненные результаты.</p> <p>Внимание: Пожалуйста, перенесите все результаты перед сбросом прибора.</p>
	Выбор типа реагента	<p>Выбор типа реагента позволяет отображать в главном меню только выбранные методы и скрывать методы других типов реагентов.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нажмите кнопку вниз или вверх, чтобы перейти к меню выбора типа реагента. • Нажмите кнопку Тест, чтобы перейти в меню. • Нажмите кнопку вниз или вверх для перехода к другим опциям или нажмите кнопку "Тест",

Функция	Описание	Как выполнить функцию
		чтобы выбрать нужный тип реагента.

4.5 Передача данных

Вы можете перенести все или выбранные данные в приложение или в программное обеспечение для ПК.

Для отображения сохраненных результатов выберите значок журнала в меню настроек.

MD 50 предоставляет две опции для передачи данных:

1. Передача данных через кабель USB
2. Передача данных через NFC

4.5.1 Передача данных через USB

- Для передачи данных через USB-кабель требуется программное обеспечение Lovibond® Data Expert, которое можно бесплатно загрузить с веб-сайта Lovibond.
- Пожалуйста, установите программное обеспечение на свой компьютер и следуйте инструкциям по передаче данных.
- После подключения прибор покажет символ USB в строке состояния.
- Перейдите в меню Журналы, как описано в главе 4.3.1, и выберите конкретные или все результаты для передачи через USB.

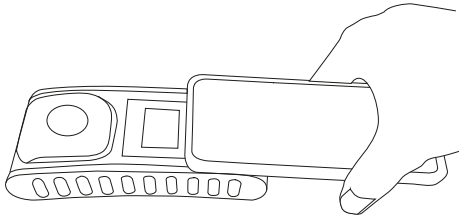
Примечание: Чтобы начать процесс передачи данных, от фотометра не требуется никаких действий.

4.5.2 Передача данных через NFC

- Чтобы передать результаты измерений через NFC, перейдите в меню Журналы, как описано в главе 4.3.1, и выберите конкретные или все результаты для передачи через NFC.
- Нажмите и удерживайте кнопку UP, чтобы сохранить результаты в метке NFC.
- Откройте приложение AquaLX и приблизьте смарт-устройство к прибору для передачи результатов (как показано на рисунке).
- Нажмите кнопку назад, чтобы вернуться в меню настроек.

Примечание: При возврате в меню настроек все данные будут удалены с метки NFC.

- Убедитесь, что на смарт-устройстве включена функция NFC.



5 Техническое обслуживание

5.1 Повторный график технического обслуживания


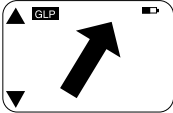




Задание	Что делать	Что не делать
Очистите прибор и измерительную камеру	<ol style="list-style-type: none"> 1. Очищайте измерительную камеру с помощью влажных безворсовых салфеток (без масла) или ватных палочек. 2. Если поверхность корпуса загрязнена, протрите ее мягкой тканью с мягким мыльным раствором. 3. Как можно скорее удалите брызги химических веществ. 4. Для дезинфекции можно использовать изопропанол для очистки в течение короткого времени. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не используйте кюветы с неплотно закрытой крышкой. 2. Не используйте чистящие средства, содержащие растворители. 3. Не распыляйте и не наливайте химические вещества непосредственно в камеру для образцов.
Очистите принадлежности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пробирки, крышки и перемешивающие стержни следует тщательно мыть после каждого анализа для предотвращения помех. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не используйте кюветы с видимыми дефектами, например, с изъянами, царапинами или трещинами. 2. Используйте пробирки, которые не полностью высохли снаружи.
Замена батареи	<ol style="list-style-type: none"> 1. При хранении прибора в течение длительного периода времени вынимайте батареи, чтобы избежать их утечки. 2. Всегда используйте непerezаряжаемые батареи. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не используйте батареи нестандартного типа.
Хранение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Храните прибор и принадлежности при указанных условиях окружающей среды. 	

**Предупреждение!**

Неправильное обращение с некоторыми реагентами может нанести вред вашему здоровью. В любом случае следуйте информации на этикетках безопасности на упаковке, инструкциям по безопасности во вкладыше к упаковке и имеющемуся паспорту безопасности. Необходимо точно соблюдать указанные там защитные меры.

6 Устранение неполадок

6.1 Сообщения об ошибках и что делать

Дисплей	Возможные причины	Что делать
 	Выход за пределы диапазона - Показания выходят за пределы диапазона.	Разбавьте образец.
	Проба воды слишком мутная.	Отфильтруйте пробу воды.
	Слишком много света на детекторе.	Проверьте герметичность крышки кюветы.
	Ниже диапазона - Показания ниже предела обнаружения метода.	Убедитесь, что дозировка реагентов и время реакции соответствуют инструкции метода. Проверьте образец, чтобы убедиться, что в нем достаточно высокая концентрация измеряемого параметра.
	Недостаточно света на детекторе.	Очистите измерительную камеру, чтобы убрать частицы пыли, блокирующие свет.
	Ошибка расчета.	
Прибор немедленно выключился	Батареи разряжены 	Замените батареи.

7 Аксессуары и запасные части

7.1 Список принадлежностей

Бутылка 250 мл, AF 631	375072
Заводской сертификат калибровки ISO 9001 для MD50	999756
Заводской сертификат калибровки ISO 9001 для метода Cl M100 (MD50)	999720
Заводской сертификат калибровки ISO 9001 для метода Cl M110 (MD50)	999721
Кабель USB-C 1 м, USB-C - A	19820-081
Круглая ячейка с крышкой Ø 24 мм, высота 48 мм, 10 мл, комплект из 5 штук	197629
Круглая ячейка с крышкой Ø 24 мм, высота 48 мм, 10 мл, комплект из 12 штук	197620
Мерный стакан, 100 мл	384801
Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 0,2 и 1,0 мг/л (MD50)	275620
Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 0,5 и 2,0 мг/л (MD50)	275621
Набор контрольных эталонов для измерения содержания хлора 1,0 и 4,0 мг/л (MD50)	275622
Набор поверочных эталонов для MD50	215700
Пакет услуг по фиксированной цене для MD50	19802710
План обслуживания - 3 года для MD50	19802810
Пластиковая воронка с ручкой	471007
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см	364109
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 10 штук	364130
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 10 см, комплект из 13 штук	364120
Пластиковая палочка для перемешивания длиной 13 см	364100
Смесительный цилиндр с пробкой является необходимой принадлежностью при определении содержания молибдена LR с помощью MD 100 (276140)	19802650
Стойка для 6 круглых кювет Ø 24 мм	418951
Уплотнительное кольцо для круглых кювет 24 мм, набор из 12 шт	197626

RU

Устройство для отбора проб с бутылкой 250 мл и крышкой, AF 631	170500
Чистящая салфетка	197635
Щетка, длина 11 см	380230

8 Технические характеристики

Оптика	Светодиод, датчик спектрометра, фильтр помех (только в некоторых вариантах)
Источник света	LED
Длина волны	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
Фотометрический диапазон	0 - 3 Abs
Фотометрическая точность	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
Подходящие кюветы	<ul style="list-style-type: none"> • Круглые кюветы 13 мм • Круглые кюветы 16 мм • Круглые кюветы 24 мм
Дисплей	ЖК-дисплей с подсветкой
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
Формат передачи данных	.csv
Обслуживание	Мембранная клавиатура
Auto – OFF	Да
Программируемость	да, с помощью программного обеспечения для ПК
Юстировка	Заводская и пользовательская настройка - возврат к заводской настройке возможен в любое время
Обновления	Обновление микропрограммного обеспечения и методов
Встроенная память	Внутренняя кольцевая память на 100 записей данных
Срок службы батареи	Приблизительно 5000 измерений (без подсветки)
Переносимость	Portable
Степень загрязнения	2
Максимальная высота над уровнем моря	3500
Окружающие условия	5 - 50 °C при относительной влажности 30 - 95 % (без конденсации)
Класс защиты	IP 67

Соответствие	CE
Языки руководства по эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• Английский• Голландский• Испанский• Итальянский• Китайский• Немецкий• Португальский• Русский• Турецкий• Французский
Размеры	155 x 76 x 45 mm
Вес	247 g

**Внимание!**

Подлежит техническому изменению!
Для обеспечения максимальной точности результатов тестирования всегда используйте системы реагентов, поставляемые производителем прибора.

9 Appendix

9.1 Уведомление об авторских правах и товарных знаках

iOS® является зарегистрированной торговой маркой компании Cisco, Inc. и лицензирована компанией Apple, Inc.

iTunes Store® является торговой маркой компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Android™ и Google Play™ являются торговыми марками компании Google, Inc.

Excel® является торговой маркой Microsoft Corp., зарегистрированной в США и других странах.

RU

目录

Photometer Series

1 简介	232
1.1 一般信息	232
1.1.1 使用前请阅读说明	232
1.1.2 产品的目的	232
1.1.3 授权使用	232
1.1.4 安全使用的要求	232
1.1.5 保存说明书	232
1.1.6 用户资格	232
1.1.7 危险化学品的处理	233
1.1.8 处置说明	233
1.2 文件中使用的所有符号的清单	233
2 产品概况	234
2.1 符号指南	234
2.3 特点	234
2.4 产品描述	234
2.4.1 仪表视图	235
2.4.2 键和开关的描述	235
2.4.3 接口描述	236
3 开始准备	237
3.1 操作环境	237
3.2 交付的内容	237
3.3 插入和更换电池	237
4 操作步骤	239
4.1 首次启动	239
4.2 一般操作原则	239
4.3 控制元素及其功能列表	240
4.3.1 控制元素及其功能列表	240
4.5 数据传输	244
4.5.1 通过USB传输数据	244
4.5.2 通过NFC传输数据	245
5 维护	246
5.1 推荐采用维护计划	246
6 故障排除	247
6.1 错误信息和如何处理	247
7 配件和替换零件	248
7.1 配件列表	248
8 技术参数	249

9 附录	251
9.1 版权和商标通知	251

1 简介

1.1 一般信息

1.1.1 使用前请阅读说明

本手册提供了有关本产品安全操作的重要信息。请仔细阅读本手册，并在使用前熟悉本产品。

1.1.2 产品的目的

Lovibond 光度计系列带有不同的参数，适用于各种水质检测应用，例如饮用水、污水、工业过程水、游泳池水以及科学和研究实验室。Lovibond 光度计系列含有适合在实验室环境中使用的台式光度计，也包含适合在野外使用的便携式光度计。便携式仪器装在坚固的手提箱中，并配有所需的配件，方便携带。若暴露在极端光线和温度下，仪器的性能可能会受影响，因此仪器需要在建议的环境条件下使用。

1.1.3 授权使用

如出现不正当使用、不遵守本手册、由不合格人员使用或未经授权改变产品现象，制造商不承担相关责任和损害保证。

制造商对用户或第三方因使用本产品而产生的费用或损失不承担任何责任，特别是在不正确使用产品或误用或产品连接出现故障的情况下。

制造商对打印错误不承担任何责任。

1.1.4 安全使用的要求

为安全使用本设备，请注意以下几点：

- 以未经制造商指定的方式使用本设备，可能会损害本设备的性能。
- 本产品只能按照本文规定的授权使用方式使用。
- 本产品需使用本操作手册提到的电源。
- 本产品只能在本操作手册中提到的环境条件下使用。
- 本产品不得被打开或修改。

出现下列情况，不得使用该产品：

- 产品有明显的损坏（例如，在运输之后）。
- 在不当条件下存放了很长时间（存放条件，见“技术参数”）。

1.1.5 保存说明书

手册必须放在产品的附近，以便你能随时找到你需要的信息。

1.1.6 用户资格

操作人员必须能够理解并正确执行产品包装和插页上的安全标签和安全说明。

用户必须有能力和能够阅读和理解本手册，以熟悉操作并确保安全使用。

1.1.7 危险化学品的处理

使用本产品的地方可能存在化学和/或生物危险。在使用本产品时，请遵守所有管理法律、法规和协议。

对于产品的开发，Lovibond公司密切关注安全问题。一些危险物质的危害是无法避免的。如果使用自制的试验或溶液，那么有关这些试验或溶液所造成的任何风险的责任由使用者承担（个人责任）。

1.1.8 处置说明

根据当地法律规定，将电池和电气设备丢弃在合适的设施中。

将电池与生活垃圾一起处理是违法的。

在欧盟范围内，在设备的使用寿命结束后，电池要在专门的回收点进行处理。



标有此标志的仪器不得在正常的生活垃圾中处理。

1.2 文件中使用的所有符号的清单

本手册中使用了以下符号来表示需要特别注意的部分。



危险！

危险！若不加以避免，可能导致死亡或引起严重伤害！



警告！

对某些试剂处理不当会损害你的健康。在任何情况下，都要遵循包装上的安全标签、包装内页的安全说明和可用的安全数据表上的信息。必须严格遵守其中规定的保护措施。



注意！

存在可能导致轻度或中度伤害的危险。



注

必须遵守重要信息或特别指示。

2 产品概况

2.1 符号指南

应严格遵守产品上的标签，以避免人身伤害或产品损坏。在采取任何行动之前，如果存在这种标签，请参考本章关于危险或风险的性质的信息。



适用于欧盟的专业用户。

如果你想丢弃电气和电子设备（EEE），请联系你的经销商或供应商以获得更多信息。

对于欧盟以外的国家的处置。

该标志仅在欧盟（EU）有效。如果您想丢弃本产品，请联系当地政府或经销商，并询问正确的处理方法。

2.3 特点

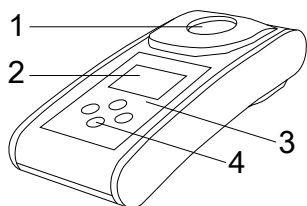
Lovibond MD50 和 MD150 光度计系列带有高水平的精准型测试系统、操作效率和用户友好型操作界面。

- 坚固的外壳设计，防水防尘。
- 创新的光学系统，提供更高的精准度。
- 多色背景提示灯。
- 支持程序更新至最新方法。
- 图标和符号显示，适用于全球不同语言用户。
- 数据储存 100 组数据。
- 通过 NFC 向 AquaLX 应用程序无线传输数据。
- 通过 USB 与电脑进行有线数据传输。
- 可通过电脑软件导入一个用户自定义方法并更新仪器。

2.4 产品描述

Lovibond 的 MD50 和 MD150 系列单参数和多参数光度计专为需要检测泳池水、饮用水、工业用水或污水中特定参数的客户而设计。仪器采用高质量的稳定的 LED 并安装导光板，以实现足够的光抵达检测器，提供高精度的测量结果和操作效率。MD50 和 MD150 设计结构紧凑，是理想的手持式现场测量仪器。Lovibond 仪器配有原厂家生产的全系列试剂和测试标准，提供了一个完整的解决方案，以满足水分析行业的要求。

2.4.1 仪表视图



正面

1 - 样品室





2 - 显示器

3 - 型号

4 - 电源按钮



ZH

2.4.2 键和开关的描述

钥匙	功能
	向下键 打开或关闭仪器 用于向下滚动
	测试键 测量样品 选择或确认操作
	返回键 返回上一个菜单 打开或关闭背光
	上键 向上滚动列表 进入设置菜单

2.4.3 接口描述

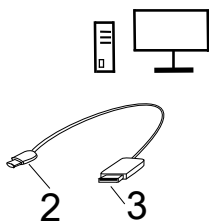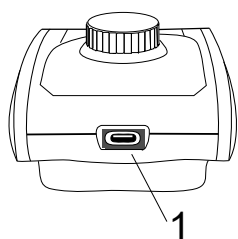
1. USB-C端口用于数据传输，更新和通过PC软件导入方法。



1. USB-C 端口
(防水)
2. USB-C
3. USB-A

ZH

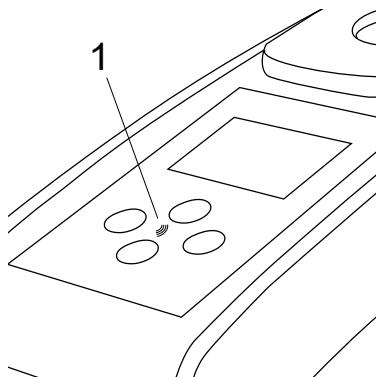2. NFC用于通过App向智能设备进行无线数据传输。



1. NFC 领域

3 开始准备

3.1 操作环境

本仪器可以在任何被认为对操作者安全的室内或室外环境中进行分析。然而，建议不要在明亮的阳光下使用仪器，以避免由杂光引起的错误。这个环境包括温度范围从5到40摄氏度，非凝结湿度高达90%。仪器和环境之间的巨大温差会导致误差--例如，由于在镜头区域或小瓶上形成的冷凝水。

3.2 交付的内容

仪器

2 节电池 (AA)

3 个 24 毫米 \varnothing 圆形比色皿

3 根 10 厘米塑料搅拌棒

刷子 11 厘米

螺丝刀

10 毫升注射器

USB 电缆

使用说明书

方法手册 (二维码)

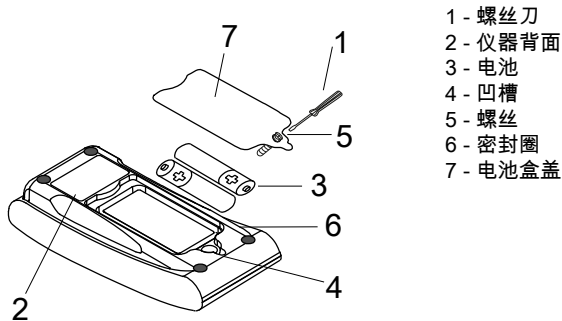
合格证书

保修信息

带泡沫内胆的便携箱

方法试剂

3.3 插入和更换电池



1. 将仪器关机。
2. 如有必要，从样品室中取出小瓶。
3. 将仪器倒置在一个干净、平整的表面上。
4. 拧下电池盒盖 (7) 的一个螺丝 (5)。
5. 在凹槽 (4) 处提起电池盒盖 (7)。
6. 取出旧电池 (3)。
7. 放入2个新电池。确保极性正确!
8. 关闭电池盒盖 (7)。检查槽口的密封环 (6)，确保它是紧固的。
9. 仔细拧紧螺钉 (5)。



注意!

为确保仪器的防水性。
密封环必须在位置上
电池盒盖必须拧上所有螺丝



注意!

按照所有联邦、州和当地的法规处理废旧电池。

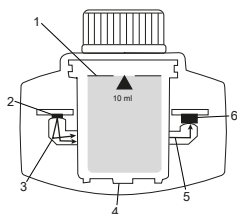
4 操作步骤

4.1 首次启动

- 按照第3.3章所述，插入电池。
- 按电源下键打开仪器。
- 设备上首先显示公司标志。
- 屏幕上将短暂显示仪器的固件版本。
- 按照 4.3.1 中所述步骤设置日期和时间。
- 选择试剂类型，只显示所需方法。详情请参阅 4.3.1 中的步骤。
- 最后，显示一个方法列表，这是设备的启动屏幕。

注意：仪器背光默认打开，若要关闭背光，请按 Back 键 3 秒钟。

4.2 一般操作原则






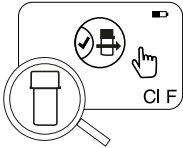
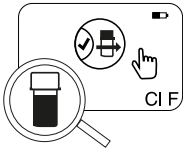
1. 样品池
2. 光源
3. 光导管
4. 样品室
5. 光束
6. 光谱传感器 + 检测器





光度计有根据标准分析程序预先编程的方法。为确保分析简便、无误，这些方法中都编入了必要的试剂校准曲线、反应时间和顺序。光度计的光学装置由光源、干涉滤光片（特定型号）和光谱传感器组成。Lovibond 光度计使用 LED 作为光源，这种光源能效高、寿命长，与光度计本身的寿命一样长。高质量的光谱传感器用于收集和测量透过样品的光量，并将其传输到微处理器，由微处理器以数字方式计算浓度并以相应的单位显示结果。




4.3 控制元素及其功能列表



4.3.1 控制元素及其功能列表

功能	说明	如何执行功能
	打开/关闭仪器	<ul style="list-style-type: none"> 按 向下 键打开仪器。 按住 向下 键关闭仪器。
	背光	<ul style="list-style-type: none"> 按住返回键 3 秒钟可打开或关闭背光。
	测量模式	<ul style="list-style-type: none"> 显示屏上将显示上次使用的方法。 浏览方法列表并选择所需的方法。 按测试键选择方法。
	返回上一视图	<ul style="list-style-type: none"> 按返回键返回上一屏幕。

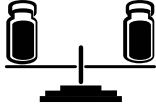功能	说明	如何执行功能
	进行调零	<ul style="list-style-type: none"> 在 24 毫米样品瓶中注入 10 毫升样品，或在必要时使用 16 毫米试剂空白瓶。 注：每种方法都有不同的空白要求，请按照方法步骤正确地对仪器进行空白处理。请扫描最后一页上的二维码下载方法说明。 拧紧样品瓶。 将样品瓶放入样品室。注意定位！ 按 Test 键 为仪器调零。 拧紧样品瓶。 在倒计时的情况下，测量将在倒计时结束后自动进行。 再次按下测试按钮可以跳过倒计时，但强烈建议您按照程序操作。 调零成功后，显示屏左下角的空白比色皿符号将变为满比色皿。 <p>注意：您可以通过设置禁用所有方法的计时器。</p> <p>注意：如果不遵守方法步骤，则无法保证测试的准确性。</p>
	进行测试	<p>请按照方法说明中的步骤准备样品瓶。请扫描最后一页上的二维码下载方法说明。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按 Test (测试) 键执行测试。 某些方法在按下测试键之前或之后集成了计时器。倒计时结束后，仪器将执行测量。 用户可以通过再次按下测试键跳过倒计时，但强烈建议按照方法步骤进行。 <p>注意：您可以通过设置禁用所有方法的计时器。</p> <p>注意：如果不遵守方法步骤，则无法保证测试的准确性。</p>
$\text{Cl}_2 \text{ F} + \text{Cl}_2 \text{ T} =$ $\text{mg/L Cl}_2 \text{ comb}$	组合方法	<p>有些方法是多个方法组合在一起的，用于计算某个参数的浓度。在第一部分测试结束后，仪器不会显示结果，将继续进行第二个部分的测试。组合方法测试结束后，可按向下或向上按键切换读取最终结果和部分结果。</p>
$\text{mg/L Cl}_2 \text{ F} \rightleftharpoons$ mg/L Br_2	更改显示单位	<ul style="list-style-type: none"> 结果以默认单位显示。 按向上或向下按钮可更改显示单位。 仪器会将新选择的数据单位保存为默认设置，并以该单位显示结果，除非恢复为默认设置。

功能	说明	如何执行功能
	用户校准	<ul style="list-style-type: none"> • 用户校准时，请使用已知浓度的标准物质代替水样进行测试。 • 显示结果时，按住 Test (测试) 键 3 秒钟。 • 仪器进入校准模式。 • 按 "上" 键或 "下" 键增加/减少显示值，使其与目标值一致。 • 按测试键接受调整值。按 背 键可随时取消校准。 • 将创建一个带有方法编号的日志条目。"校准"和校准因子，并带有日期和时间戳。
	吸光率测量	吸光度测量的步骤与浓度方法相同。滚动方法列表，选择吸光度方法。每个可用波长的吸光度测量方法将显示在列表中。
	设置菜单	<ul style="list-style-type: none"> • 在主菜单中，按住向上键 3 秒钟进入设置菜单。 • 上下滚动查看不同的设置选项。
	查看日志	<ul style="list-style-type: none"> • 当显示符号时，按测试键进入日志。 • 仪器显示所有已保存结果/日志的列表。 • 按向上或向下键滚动列表中的结果。 • 默认情况下，所有结果和日志都被预选用于传输。 • 按 Test (测试) 键可选择/取消选择要传输的单个结果。 • 按住 Test (测试) 键 3 秒钟可选择/取消选择所有结果。 • 按住向上键 3 秒钟，通过 NFC 传输结果。 • 按 "返回" 键返回上一级菜单。

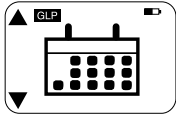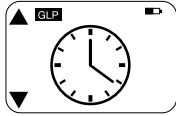功能	说明	如何执行功能
	日期设置	<ul style="list-style-type: none"> 按测试键打开日期设置菜单。 按向上或向下键切换格式。 按测试键确认格式。 按向上或向下键调整日期。 当箭头指向最后一位数字时，按测试键确认，或按返回键返回上一位置。日期已设定，仪器返回设置菜单。 日期更改成功后仪器将在日志中自动生成一条记录。
	时间设置	<ul style="list-style-type: none"> 按测试键打开时间设置菜单。 按“向下”按钮或“向上”按钮可减少或增加数值。 当箭头位于最后一个位置时，按下测试按钮确认，或按下返回按钮返回或取消设置。 时间更改成功后仪器将在日志中自动生成一条记录。
	One Time Zero	<p>有些方法提供一次性归零功能，使测量过程更加高效。</p> <ul style="list-style-type: none"> 按向下键或向上键，在设置菜单中选择 OTZ。 按测试键启用或禁用 OTZ。 按照方法中的说明执行调零，仪器将保存此调零并用于下一次测量，除非仪器关闭或执行新的调零。 测量期间，屏幕上将显示 OTZ 图标，并作为单独条目记录在日志中。 <p>注意：您可以通过按下返回键并重新归零来覆盖 OTZ。</p>

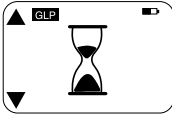功能	说明	如何执行功能
	计时器开/关	<ul style="list-style-type: none"> 按向上或向下键滚动到设置菜单中的定时器图标。 您可以通过此设置停用所有方法的综合定时器。 按下测试按钮激活/禁用计时器。 日志中将为创建带有时间戳的条目。 <p>注意：建议在方法步骤中使用集成计时器，以获得准确的结果。</p>
	出厂重置	<ul style="list-style-type: none"> 按向下按钮或向上按钮导航至出厂设置菜单。 按 "测试" 按钮选择出厂设置。 再次按下 "测试" 按钮确认重置过程，或按下 "返回" 按钮取消重置。 日志中会创建一个带有时间戳的条目。 <p>注意：重置会删除用户方法、用户校准和所有保存的结果。 请注意：重置仪器前请转移所有结果。</p>
	选择试剂类型	<p>选择试剂类型可让您在主菜单中只显示选定的方法，而隐藏其他试剂类型的方法。</p> <p>按向下按钮或向上按钮可进入试剂类型选择菜单。</p> <p>按下 Test (测试) 按钮进入菜单。</p> <p>按 "向下" 按钮或 "向上" 按钮浏览其他选项，或按 "测试" 按钮选择所需的试剂类型。</p>

4.5 数据传输

您可以将全部或部分数据传输到应用程序或 PC 软件中。
请在设置菜单中选择日志图标，以显示保存的结果。

MD 50 提供两种传输数据的选择。

1. 通过 USB 电缆传输数据
2. 通过 NFC 传输数据

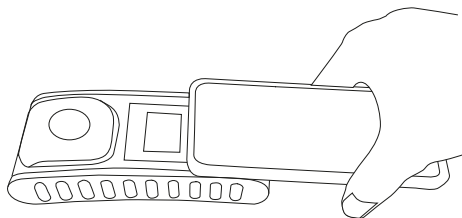
4.5.1 通过 USB 传输数据

- 通过 USB 电缆传输数据需要使用软件 Lovibond® Data Expert，该软件可从 Lovibond 网站免费下载。
- 请在电脑上安装软件，并按照软件中的说明进行数据传输。
- 连接后，仪器将在状态栏上显示 USB 符号。
- 如第 4.3.1 章所述，进入日志菜单，选择要通过 USB 传输的特定或全部结果。

注：无需对光度计进行任何操作即可启动数据传输过程。

4.5.2 通过NFC传输数据

- 要通过 NFC 传输测量结果，如第 4.3.1 章所述，进入日志菜单，选择要通过 NFC 传输的特定或全部结果。
- 按住 UP 键将结果保存到 NFC 标签中。
- 打开 AquaLX 应用程序，将智能设备靠近仪器以传输结果（如图所示）。
- 按返回按钮返回设置菜单。
注意：返回设置菜单后，NFC 标签中的所有数据将被删除。
- 确保智能设备上的NFC已经启用。



5 维护

5.1 推荐采用维护计划

任务	该做什么	不应该做什么
清洁仪器和测量室	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用无绒毛的湿布（无油）或棉棒清洁测量室。 2. 如果外壳表面很脏，用软布和温和的肥皂水擦拭。 3. 尽快清除任何化学品的飞溅。 4. 为了消毒，可以使用异丙醇进行短时间的清洁。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请勿使用密封不严的比色皿。 2. 不要使用含有溶剂的清洁剂。 3. 不要将任何化学品直接喷洒或倒入样品室。
清洁附件	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每次分析后应彻底清洗小瓶、瓶盖和搅拌棒以防止干扰。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不要使用有明显缺陷的样品池，例如缺陷、划痕或裂纹。 2. 使用从外面看没有完全干燥的样品瓶。
更换电池	<ol style="list-style-type: none"> 1. 长时间存放仪器时，应取出电池，以避免电池泄漏。 2. 始终使用不可充电的电池。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请勿使用非指定型号的电池。
储存	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在指定的环境条件下储存仪器和附件。 	

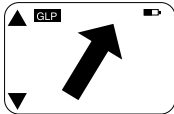
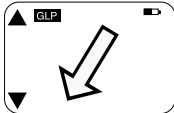





警告！

对某些试剂处理不当会损害你的健康。在任何情况下，都要遵循包装上的安全标签、包装内页的安全说明和可用的安全数据表上的信息。必须严格遵守其中规定的保护措施。

6 故障排除

6.1 错误信息和如何处理

显示	可能的原因	该怎么做
	<p>超过范围 - 读数超过范围。</p> <p>水样太浑浊。</p> <p>检测器上有太多的光。</p>	<p>稀释样品。</p> <p>滤去水样。</p> <p>检查比色皿盖的密封情况。</p>
	<p>量程不足 - 读数低于方法的检测限。</p>	<p>确保试剂剂量和反应时间符合方法的说明。</p> <p>检查样品，确保其中含有足够高浓度的待测参数。</p>
	<p>检测器上的光线不足。</p>	<p>清洁测量室，清除阻挡光线的任何灰尘颗粒。</p>
	<p>计算错误。</p>	
<p>仪器立即关闭</p>	<p>电池电量不足。</p> 	<p>更换电池。</p>

ZH

7 配件和替换零件

7.1 配件列表

250 mL 瓶子, AF 631	375072
MD50 固定价格服务包	19802710
MD50 的 ISO 9001 工厂校准证书	999756
USB-C 电缆 1 米, USB-C 到 A	19820-081
刷子, 长 11 cm	380230
圆形比色杯, 盖子直径 Ø 24 mm, 高 48 mm, 10 ml, 5 件套	197629
塑料搅拌棒, 长 10 cm	364109
塑料搅拌棒, 长 10 cm, 10 件套	364130
塑料搅拌棒, 长 13 cm	364100
塑料搅拌棒, 长 13 cm, 10 件套	364120
带塞混合缸, 必要附件, 用于利用 MD 100 测定铝 LR (276140)	19802650
带把手的塑料漏斗	471007
带盖的圆形比色杯 Ø24mm, 高 48 mm, 10 ml, 12 件套	197620
方法 CI M100 (MD50) 的 ISO 9001 工厂校准证书	999720
方法 CI M110 (MD50) 的 ISO 9001 工厂校准证书	999721
服务计划 - MD50 为 3 年	19802810
样本收集器, 250 mL 瓶和盖, AF 631	170500
氯参考标准套件 0.2 和 1.0 mg/l (MD50)	275620
氯参考标准套件 0.5 和 2.0 mg/l (MD50)	275621
氯参考标准套件 1.0 和 4.0 mg/l (MD50)	275622
清洁布	197635
用于 24 mm 圆形比色杯的比色杯密封圈, 12 件套	197626
试样瓶支架, 用于 6 个 Ø 24 mm 圆形试样瓶	418951
量杯, 100 ml	384801
验证标准套件 MD50	215700

ZH

8 技术参数

光学性质	LED、光谱仪传感器、干扰滤波器 (仅限特定型号)
光源	LED
波长	Variant specific (415, 445, 480, 515, 530, 555, 590, 630, 680)
光度范围	0 - 3 Abs
光度精度	3 % FS (T = 20 °C - 25 °C)
适用比色皿	<ul style="list-style-type: none"> • 比色管 16 mm • 比色管 13 mm • 比色管 24 mm
显示	背光 LCD
数据接口	<ul style="list-style-type: none"> • NFC (Near Field Communication) • USB-C
导出数据格式	.csv
操作	薄膜键盘
Auto - OFF	是
可编程性	可使用 PC 软件
校准	出厂调整 and 用户调整 - 可随时返回出厂调整
更新	固件和方法更新
内置存储器	内部环形存储器可存储 100 条数据记录
电池寿命	约 5000 次测量 (不带背光)
便携性	Portable
污染程度	2
最高海拔高度	3500
环境条件	5 - 50 °C , 相对湿度 30 - 95 % (无冷凝)
保护等级	IP 67
一致性	CE

多语言用户操作
手册

- 中文
- 俄语
- 土耳其语
- 德文
- 意大利
- 法文
- 英文
- 荷兰语
- 葡萄牙
- 西班牙

ZH

尺寸 155 x 76 x 45 mm

重量 247 g



注意!

可进行技术修改!

为确保测试结果的最大准确性，请始终使用仪器制造商提供的试剂系统。

9 附录

9.1 版权和商标通知

iOS®是Cisco, Inc.的注册商标，并授权给Apple, Inc.
iTunes Store®是苹果公司的商标，在美国和其他国家注册。
Android™和Google Play™是谷歌公司的商标。
Excel®是微软公司的商标，在美国和其他国家注册。

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germany

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
UK

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazil

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spain

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer France

BAL n°227
76-78 rue Chanzy
51100 Reims
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
France

Technical changes without notice

Printed in Germany 11/24

No.: 00386701

Lovibond® and Tintometer® are

Trademarks of the Tintometer Group
of Companies

