

pH

Strips pH 0-14

0 - 14 pH

Material


Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
tiras de pH pH 0-14 Plástico	1 pc.	56S001290

Lista de Aplicações

- Água de Refrigeração
- Controle de Desinfecção

Notas


1. Ao manusear as tiras-teste, certifique-se de que toca nelas com os dedos apenas na extremidade da tira-teste. As almofadas não devem entrar em contacto com os dedos.
2. As tiras-teste devem ser guardadas na embalagem fechada.

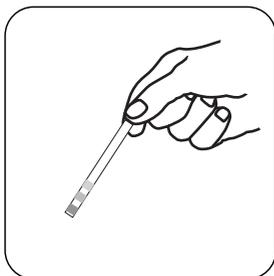


Remova uma tira de teste da embalagem. Segure a ponta da tira de teste entre o dedo indicador e o polegar.




Mergulhar a tira de teste na solução a testar, de modo a que todas as almofadas fiquem completamente imersas.

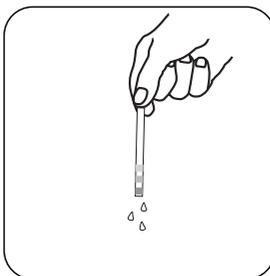

Sacudir o excesso de líquido.

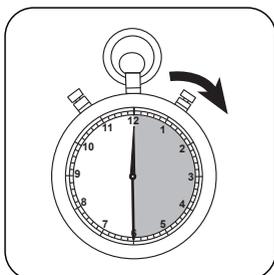

Comparar a cor da tira-teste no espaço de 30 segundos com a tabela de cores fornecida.

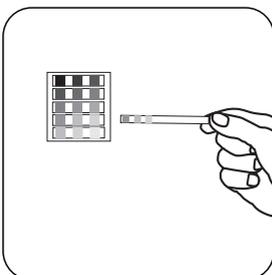

Ler o resultado na escala de cores.